

So verwenden Sie die Bedienungsanleitung	11
Einführung	13
A Technische Daten	15
B Sicherheitsbestimmungen und Wartung	17
1 Sicherheitsvorschriften.....	18
2 Schutzabdeckung.....	19
3 Gerätereinigung.....	20
4 Reparaturen.....	20
C Erste Schritte	21
1 Smart – Lieferumfang.....	22
2 Einführung zu Smart.....	23
3 Schutzabdeckung für den Smart.....	28
4 Einschalten des Smart.....	29
5 Gerätereinigung.....	29

6	Anzeige des Akkustatus	30
7	Verbleibende Akkukapazität überprüfen	31
8	Der Touchscreen	31
9	Mit Dateien arbeiten	32
10	Texteingabe	33
10.1	Texteingabe	33
10.2	Bildschirm-Input Panel anzeigen	34
10.3	Bildschirm-Input Panel ausblenden	35
10.4	Text mithilfe des Bildschirm-Input Panel eingeben	35
11	Allgemeine Einstellungen	36
11.1	Programmsprache festlegen	36
11.2	Sprachausgabe einstellen	36
11.3	Zeit und Datum einstellen	36
11.4	Bildschirmhelligkeit anpassen	37
11.5	Einstellen der allgemeinen Lautstärke	37
11.6	Ansicht drehen	38
11.7	Einstellen der Wunschzeit zum Ausschalten von Smart	38
11.8	Menüleiste ausblenden	39
11.9	Menüleiste wiederherstellen	39
11.10	Startoptionen einstellen	39
11.11	Aufnahmen einstellen	40

12	Smart in den Standby-Modus setzen	41
13	Herunterfahren des Smart	41

D Bestimmte Einstellungen, Backup und Speicherplatz 43

1	Anpassen der benutzerdefinierten Einstellungen	44
1.1	Auswahloptionen	44
1.2	Sprachwörterbuch, Satz- und Wortvorhersage	44
1.2.1	<i>Sprachwörterbuch</i>	44
1.2.2	<i>Wortvorhersage</i>	45
1.2.3	<i>Satzvorhersage</i>	45
2	Backup und Speicherplatz	46
2.1	Erstellen eines Backups von Smart	46
2.2	Rücksichern eines Backups auf Smart	47
2.3	Speicherbereinigung des Smart	47
2.4	Löschen einer Datei aus Smart	48

E Aufnahmen von Nachrichten **51**

1	Aufnahmen von Nachrichten	52
2	Nachrichten im Aufnahmemodus aufnehmen	52
3	Nachrichten im Mausmodus aufnehmen	53
4	Löschen von Nachrichten aus Smart	54

F Die Kamera **55**

1	Die Kamera	56
2	Bilder aufnehmen	56
3	Bilder zum Einfügen in ein Rechteck aufnehmen	56
4	Bilder anzeigen	57
5	Bilder löschen	58
6	Bilder löschen (durch Laufwerkberreinigung)	58

G Persönliche Anwendungen **61**

1	Der Terminkalender	62
1.1	Den Terminkalender anzeigen	62
1.2	Erinnerung hinzufügen	63

1.3	Signal ändern	64
1.4	Signal löschen	65
1.5	Aktivitäten hinzufügen	65
1.6	Aktivitäten ändern	67
1.7	Aktivitäten löschen	69
1.8	Hintergrund für den Terminkalender einstellen	70
2	Das Adressbuch	71
2.1	Kontakte hinzufügen	71
2.2	Kontakte bearbeiten	72
2.3	Kontakte löschen	72

H Verbindung mit dem Eddy 73

1	Was kann Eddy?	74
2	Bluetooth	74
3	Eddy-Einstellungen	75
4	Eddy-Suche	76
5	Verbindung dem Eddy herstellen	76
6	Verbindung vom Eddy trennen	77

I Verbindung mit dem Computer und USB-Anschlüssen herstellen 79

1	Verbindung mit dem Computer	80
2	Gerät mit dem Computer verbinden	80
3	Gerät vom Computer trennen	80
4	Externes Input Panel anschließen	81
5	Externe Maus anschließen	81
6	USB-Stick verbinden	81

J Anrufe 83

1 Telefon..... 84

2 Bluetooth aktivieren 84

3 Telefonoptionen für Smart einrichten 84

4 Telefon verbinden mit dem Smart..... 85

5 Telefonnummer wählen 86

6 Telefonanruf annehmen..... 86

7 Anruf beenden..... 87

K Umweltkontrolle 89

1 Umweltkontrolle..... 90

2 Infrarot-Codes erfassen 90

3 Erstellen eines Backups der Infrarot-Codes 91

4 Rücksichern eines Backups der Infrarot-Codes 92

L Kommunikation 93

1 Kommunikation 94

2 Hinzufügen einer speziellen Smart-Aktion..... 94

3	Eddy-Aktionen hinzufügen	95
4	Aktion Umweltkontrolle hinzufügen	96
5	Smart 3 Camera-Aktion hinzufügen	97
6	Hinzufügen einer Smart3-Aktion.....	98
7	Aktion Ansicht drehen hinzufügen	99

M Fehlerbehebung **101**

1	Seriennummer des Smart.....	102
2	Prüfen der Mind Express-Version auf dem Smart	102
3	Anzeige der aktivierten Symbolbibliotheken	103
4	Fehlerbehebung	104

N Anhänge **107**

1	Acapela	108
---	---------------	-----

Index **113**

So verwenden Sie die Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung beschreibt den Smart. Der Inhalt wurde so strukturiert, dass Sie sich als Anwender schnell und problemlos in der Handhabung des Smart und der Verwendung des Programms Mind Express zurechtfinden.

Um die Software optimal zu nutzen, empfehlen wir, dass Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig lesen und sich mit allen Komponenten des Geräts und dem Programms vertraut machen.

Wenn dabei etwas unklar bleiben sollte, wenden Sie sich bitte an Jabbla.

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung der Software übernimmt Jabbla für seit der Veröffentlichung dieser Betriebsanleitung erfolgte Änderungen an Inhalt oder Bildern keinerlei Haftung. Falls Änderungen vorgenommen werden, können keine Rechte in Bezug auf die bereits gelieferte Software geltend gemacht werden.

Jabbla kann nicht haftbar gemacht werden für direkte, indirekte, zufällige oder besondere Schäden, Folgeschäden, die aus der Verwendung (des Inhalts) dieser Dokumentation entstehen. Der Haftungsausschluss hat für jeden Rechtsanspruch Geltung, gleich aus welchem Rechtsgrund.

Der Inhalt dieses Handbuchs ist nicht rechtsbindend. Irrtümer bleiben vorbehalten.

Das Drucken oder Kopieren in Teilen oder als Ganzes ohne die schriftliche Genehmigung von Jabbla ist untersagt.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen am Programm vorzunehmen, wenn wir dies für sein fehlerfreies Funktionieren als nützlich erachten.

In diesem Fall hat der Kunde kein Recht, den Vertrag zu stornieren oder Änderungen an bereits bestellten Geräten zu verlangen.

Einführung

Der Smart ist ein kleines, handlich tragbares Kommunikationsgerät mit einem dynamischen Bildschirm. Unter Verwendung der Symbole, Bilder oder anderer visueller Darstellungen können beliebige Nachrichten gesprochen werden. Der Smart basiert auf einer Windows Mobile-Computerplattform und arbeitet mit dem Programm Mind Express.

Der Smart bietet ein integriertes Mikrofon in bester Qualität mit einem soliden Verstärker, sodass kompilierte und/oder ausgewählte Nachrichten auf realistische Weise und laut und klar verständlich wiedergegeben werden.

Der Smart besitzt eine Funktion zur Kommunikationsunterstützung. Dieses Gerät dient der allgemeinen Verwendung im täglichen Leben für Personen (ab 3 Jahre), die an einer Kommunikationsstörung leiden (und also nicht, oder nur undeutlich sprechen können). Diese Personen müssen motorisch und geistig zur Verwendung des Geräts in der Lage sein. Das Gerät ist nicht für klinisch-medizinische, therapeutische oder diagnostische Zwecke geeignet. Das Gerät kann Infrarot-Codes "erlernen" und übertragen. Auf diese Weise werden andere Geräte über das Gerät gesteuert. Dazu gehören Geräte für die allgemeine Verwendung, beispielsweise Geräte mit audio-visuellen Anwendungen und automatisch gesteuerte Anwendungen im Wohnbereich. Das Zusatzgerät ist nicht für klinisch-medizinische, therapeutische oder diagnostische Zwecke geeignet.

Weitere Informationen zum Erstellen von Dateien auf dem Smart finden Sie in der Bedienungsanleitung von Mind Express, die mit dem Smart an Sie ausgeliefert wurde.

Damit Sie aus dem Smart den größten Nutzen ziehen können, empfehlen wir Ihnen das sorgfältige Lesen dieser Bedienungsanleitung.

A Technische Daten

Tabelle 1: Technische Daten

Daten	Beschreibung
Prozessor	NVIDIA® Tegra 2 1GHz
Betriebssystem	Microsoft Windows® Mobile™6.0
Arbeitsspeicher	512 MB SDRAM + 1 GB FLASH
Bildschirm	Heller 4,3 Zoll WVGA TFT-Touchscreen <ul style="list-style-type: none">• 480 x 800 Pixel• 262.144 Farben• LED-Hintergrundbeleuchtung
USB	1 x USB 2.0 OTG (Slave + Master)
Akku	Interner Akku
Gewicht	Gerät 250 g, Schutzabdeckung 41 g
Abmessungen	<ul style="list-style-type: none">• Gerät: 135 mm x 79 mm x 25 mm• Gerät mit Abdeckung: 140,5 mm x 85 mm x 30 mm

B Sicherheitsbestimmungen und Wartung

1 Sicherheitsvorschriften

Aufgrund seines geringen Gewichtes dient der Smart als einfach tragbares Mobilgerät. Wir empfehlen, den Smart ausschließlich zusammen mit der im Lieferumfang enthaltenen Schutzabdeckung zu verwenden.



Das Gerät nutzt einen Li-Ionen-Akku. Muss der Akku ersetzt werden, darf er nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Halten Sie stets die in Ihrer Region geltenden Bestimmungen zur Abfallbeseitigung ein. Sie können den Akku jederzeit an Ihren Händler zurückgeben.



Sollte das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden, muss es immer mit vollständig geladenem Akku aufbewahrt werden. Vergewissern Sie sich stets, dass das Gerät ausgeschaltet wurde. (Drücken und halten Sie dazu vier Sekunden lang die Ein-/Aus-Taste).



Vermeiden Sie Wärmequellen oder Bereiche, die möglicherweise stark erhitzen, in der Nähe des Geräts. Beispielsweise in Autos entwickelt sich im Sommer oft starke Hitze. Zu hohe Temperaturen können sich nachteilig auf die Lebensdauer der Batterie auswirken.



Der Smart ist nicht wasserdicht, aber das Gerät wurde speziell mit spritzwasserdichter Oberseite entwickelt. Unten am Gerät befinden sich Öffnungen, durch die Feuchtigkeit oder Schmutzpartikel in die Aussparungen der Lautsprecher eindringen könnten. Dies kann sich negativ auf die Qualität der Lautsprecher auswirken. Versuchen Sie stets, Situationen zu vermeiden, in denen Feuchtigkeit oder Schmutzpartikel in die Öffnungen der Lautsprecher eindringen könnten. Ergreifen Sie außerdem beim Reinigen des Geräts Sicherheitsmaßnahmen und befolgen Sie stets die Reinigungsanleitung.



Der Bildschirm des Geräts kann durch Berührung mit dem Finger bedient werden. Dabei ist keinerlei Ausübung von Druck erforderlich. Beispielsweise reicht ganz leichtes Drücken, um ein Symbol auf dem Bildschirm auszuwählen. Sie können dazu auch einen Stift, Stylus oder Ähnliches verwenden, in keinem Fall jedoch ein spitzes, scharfkantiges Objekt.



Mit dem Smart können Tonsequenzen einfach und problemlos aufgenommen werden. Bei eigenen Stimmaufnahmen ist es nicht erforderlich, laut zu sprechen. Das Gerät verstärkt die Tonaufnahme und gibt sie so natürlich wie möglich wieder. Die Lautstärke kann jederzeit angepasst werden. Vergewissern Sie sich stets, dass sich die wiedergegebene Lautstärke weder für Sie selbst noch für Ihre Umgebung belästigend oder schädigend auswirkt.

2 Schutzabdeckung

Der Smart hat eine Schutzabdeckung (15), die zusätzlichen Schutz bietet. Die Schutzabdeckung vermindert auch die Anfälligkeit für Erschütterungen und Unebenheiten und schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz.



3 Gerätereinigung

Reinigen Sie das Gerät in regelmäßigen Abständen, damit sich keine Bakterien ausbreiten.

Zum Entfernen von Staub verwenden Sie vorzugsweise ein trockenes weiches Tuch. Zum Beseitigen von Flecken auf dem Gehäuse verwenden Sie ein feuchtes Tuch. Vergewissern Sie sich, dass weder durch die Lautsprecheröffnungen, noch durch die Mikrofonöffnungen oder die Anschlüsse Feuchtigkeit eindringen kann. Schmutzpartikel in der Nähe der Anschlüsse können mit einem Wattestäbchen entfernt werden.

Verwenden Sie zum Reinigen des Touchscreen ein trockenes Tuch; verwenden Sie kein Papier von einer Küchenrolle, denn damit können kleine Kratzer entstehen. Um Fettpartikel oder Flecken vom Bildschirm zu entfernen, empfiehlt es sich, ein speziell zur Reinigung von Displays entwickeltes Reinigungsmittel einzusetzen (Sprühdose oder Reinigungstücher). Während der Reinigung muss jeder starke Druck auf den Bildschirm vermieden werden.

Um besten ist es, den Smart mit einem trockenen oder einem leicht angefeuchteten Tuch zu reinigen.

4 Reparaturen

Im Falle eines Geräteschadens wenden Sie sich bitte an den Gerätehändler oder nehmen Sie Kontakt auf zu Jabblas Supportabteilung.

Versuchen Sie in keinem Fall, Reparaturen selbst auszuführen. Solche Versuche können zu Schäden am Gerät führen und ziehen das Erlöschen der Garantie nach sich.

C Erste Schritte

1 Smart – Lieferumfang

Der Lieferumfang des Smart umfasst folgende Teile:


- Schutzabdeckung
- Stift
- Netzteil mit Stecker und Kabel
- USB-Kabel zum Anschluss an USB-Input Panel, USB-Stick, USB-Maus
- USB-Kabel zum Anschluss an den Computer
- Bedienungsanleitung Smart
- Mind Express (Programm + Bedienungsanleitung)

2 Einführung zu Smart



Figur 1: Smart – Ansicht linke Seite


Nummer	Funktion	Beschreibung
1	Reset	Mithilfe dieser Taste können Sie das Menü verstecken/anzeigen und das Gerät zurücksetzen.
2	USB-Anschluss	Mithilfe des USB-Anschlusses können Sie eine Sicherung erstellen/wiederherstellen, eine Verbindung zu einem Computer herstellen und ein externes Input Panel oder eine Maus anschließen.

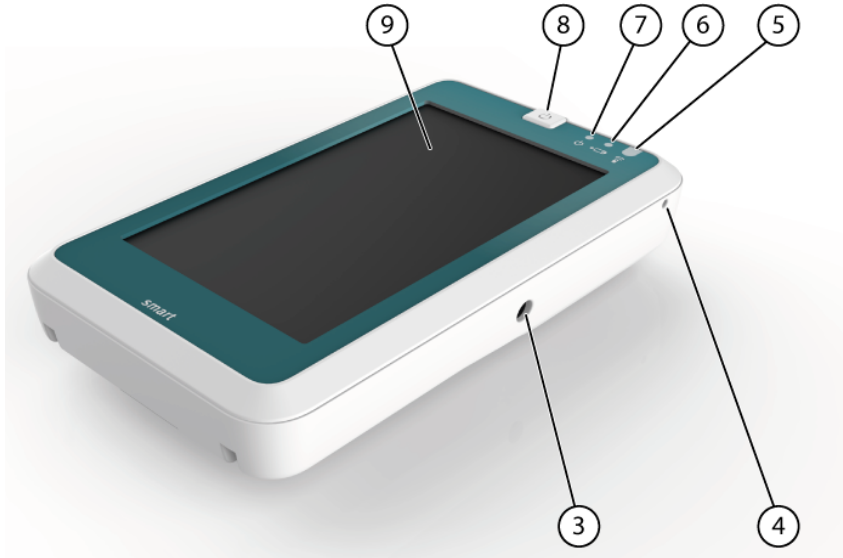

Figur 2: Smart – Ansicht rechte Seite

Nummer	Funktion	Beschreibung
3	Netzanschlussbuchse	Dieser Anschluss dient zum Laden des Geräts (zusammen mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil).
4	Mikrofonöffnung	Dies ist die Mikrofonöffnung, über die bei Aufnahmevorgängen Tonsequenzen an das integrierte Mikrofon geleitet werden.
5	Infrarot-Empfänger	Der Infrarot-Empfänger dient der Erfassung von Infrarot-Codes.

Nummer	Funktion	Beschreibung
6	Akkuladeanzeige	Die Akkuladeanzeige leuchtet auf, sobald das Gerät über das im Lieferumfang enthaltene Netzteil mit der Stromversorgung verbunden ist. Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige gelb. Sobald der Akku vollständig aufgeladen wurde, leuchtet die Anzeige grün.
7	Ein/Aus-Anzeige	Die Ein/Aus-Anzeige gibt den Ladezustand des Geräts an: <ul style="list-style-type: none">• Kein Anzeigelämpchen: Das Gerät ist ausgeschaltet.• Rot: Die Akkukapazität liegt zwischen 0% und 29%• Gelb: Die Akkukapazität liegt zwischen 30% und 50%• Grün: Die Akkukapazität liegt zwischen 51% und 100%
8	Ein/Aus-Taste	Durch Drücken dieser Taste wird das Gerät wechselweise ein-, aus- oder in den Modus 'Standby' geschaltet.
9	Touchscreen	Das Gerät besitzt einen 4,3 Zoll großen Touchscreen

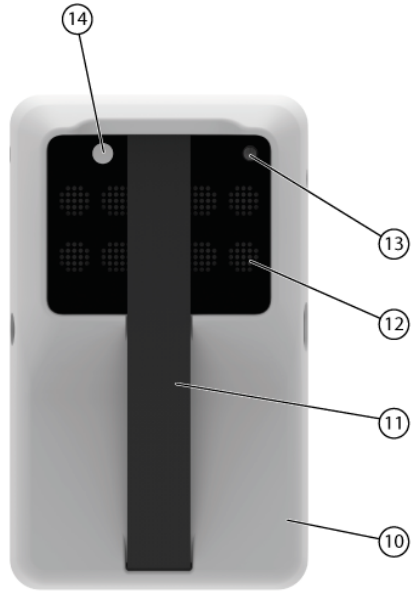

Figur 3: Smart – Rückseite

Nummer	Funktion	Beschreibung
10	Schutzabdeckung	Die Schutzabdeckung vermindert die Anfälligkeit für Erschütterungen und Unebenheiten und schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz.
11	Riemen	Mithilfe des Riemens kann das Gerät sicher in der Hand gehalten werden.
12	Lautsprecher	Das Gerät bietet eine Anzahl an leistungsstarken Lautsprechern.
13	Infrarot-Sender	Mithilfe des Infrarot-Senders werden Signale an andere Geräte übertragen.
14	Kamera	Das Gerät ist zur Aufnahme von Bildern mit einer Kamera ausgerüstet.

3 Schutzabdeckung für den Smart

Der Smart hat eine Schutzabdeckung (15), die zusätzlichen Schutz bietet. Die Schutzabdeckung vermindert auch die Anfälligkeit für Erschütterungen und Unebenheiten und schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz.

- 1 Positionieren Sie den Smart mit dem Riemen nach oben.



- 2 Lösen Sie den Verschluss (11b) am Riemen.
- 3 Ziehen Sie den Verschluss (11b) durch die längliche Öffnung an der Schutzabdeckung.
- 4 Ziehen Sie das untere Ende des Riemens (11a) durch die längliche Öffnung an der Schutzabdeckung.
- 5 Drücken Sie die Schutzabdeckung auf den unteren Teil des Smart während Sie die beiden Teile (11a und 11b) festhalten.
- 6 Halten Sie das obere Ende des Riemens (11c) während Sie das untere Ende der Schutzabdeckung über auf den Smart drücken.
- 7 Befestigen Sie den Verschluss (11b) am oberen Teil des Riemens (11c).
- 8 Drehen Sie den Smart um und vergewissern Sie sich, dass die Schutzabdeckung den Smart fest und sicher ummantelt.

4 Einschalten des Smart

Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste (8) des Smart.

War der Smart im Standby-Modus, kann er sofort eingesetzt werden.

War der Smart ausgeschaltet, dann muss zunächst das Programm Mind Express geladen werden.

SIEHE AUCH:

"Herunterfahren des Smart" auf Seite 41

"Smart in den Standby-Modus setzen" auf Seite 41

5 Gerätereinigung

Der Zeitraum über den Sie das Gerät ohne erneutes Laden verwenden können, hängt zum großen Teil von Folgendem ab:

- Tonlautstärke
- eingestellter Zeitpunkt zum Herunterfahren
- Verwendung von Bluetooth

Wird der Smart häufig verwendet, empfiehlt es sich, das Gerät täglich erneut zu laden. Verwenden Sie dazu das im Lieferumfang enthaltene Netzteil. Das Gerät kann während des Ladevorgangs weiterhin benutzt werden.


- 1 Prüfen Sie die verbleibende Akkukapazität.
- 2 Schließen Sie das Gerät mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil an die Stromversorgung an.

Die Akkuladeanzeige leuchtet auf und erscheint während des Ladevorgangs gelb. Sobald die Batterie vollständig geladen ist, wechselt die Anzeige von Gelb zu Grün.

6 Anzeige des Akkustatus

- 1 Prüfen Sie die Ein/Aus-Taste auf dem Gerät.
- 2 Die Ein/Aus-Taste kann folgende Farben anzeigen:

Grün	Akkukapazität zwischen 51% und 100%
Gelb	Akkukapazität zwischen 30% und 50%
Rot	Akkukapazität zwischen 0% und 29%

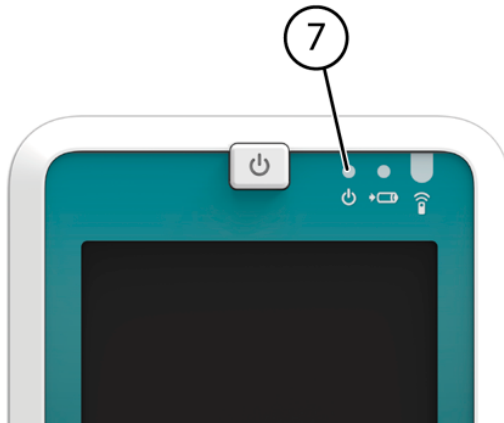

7 Verbleibende Akkukapazität überprüfen

- 1 Wählen Sie **Extras > Batterie**.
- 2 Prüfen Sie den Akkustatus:
 - Ist **Batteriebetrieb** aktiviert, nutzt das Gerät die Akkukapazität.
 - Ist **Lädt** aktiviert, ist das Gerät an den mitgelieferten Adapter angeschlossen und lädt.
- 3 Prüfen Sie die verbleibende Akkukapazität.
- 4 Ist die verbleibende Akkukapazität weniger als 30% (oder leuchtet die Ein/Aus-Anzeige rot), dann empfiehlt es sich, das Gerät zu laden.

8 Der Touchscreen

Der Touchscreen vereinfacht die Auswahl von Feldern. Die Bedienung erfolgt mit den Fingern (den Fingernägeln) oder einem Stift. Bei der Auswahl eines Elements mithilfe des Fingers muss etwas mehr Druck auf den Bildschirm ausgeübt werden, als bei der Verwendung eines Stifts.

Die Art und Weise, wie eine Auswahl auf dem Bildschirm erfolgen soll, kann vom Benutzer angepasst werden. Informationen finden Sie in der Mind Express Bedienungsanleitung.



Vergewissern Sie sich, dass die Schutzfolie vom Gerät abgezogen wurde.



Verwenden Sie kein scharfkantiges Werkzeug, um Kratzer auf dem Touchscreen zu verhindern.



Stellen Sie sicher, dass der Touchscreen nicht mit Wasser in Berührung kommt.



Der Touchscreen wird automatisch deaktiviert, wenn das Gerät zu "Standby" wechselt, oder wenn ein Benutzer "Standby" auswählt.

Verwenden Sie zur Bedienung des Touchscreen folgende Methoden:

- Antippen: Berühren Sie zur Auswahl ein Feld mit dem Finger oder mit dem Stift.
- Antippen (und halten): Berühren Sie ein Feld mit dem Finger oder mit dem Stift und drücken Sie länger als die reguläre, zur Auswahl des Feldes festgelegte, Betätigungsdauer.
- Ziehen: Berühren Sie zum Bewegen von Elementen ein Feld mit dem Finger oder mit dem Stift und wischen Sie aufwärts oder abwärts, nach links oder nach rechts (im Bearbeitungsmodus oder im Mausmodus).



Die Möglichkeit, innerhalb eines Kommunikationsrasters zu ziehen, können Sie unter Mind Express festlegen.

9 Mit Dateien arbeiten

Der Smart arbeitet mit Mind Express 4.

Sie können neue Dateien erstellen und bestehende öffnen, bearbeiten und speichern.



Informationen über das Bearbeiten von Dateien finden Sie in der Bedienungsanleitung für Mind Express.



Einfacher als Dateien auf dem Smart zu erstellen und zu bearbeiten, ist es, Dateien zunächst mit Mind Express auf einem Computer zu erstellen und zu bearbeiten und sie dann mithilfe einer USB-Verbindung an den Smart zu übertragen.

10 Texteingabe

10.1 Texteingabe

Zur Eingabe von Text in ein Dialogfeld können Sie das Bildschirm-Input Panel des Geräts verwenden. Es stehen vier verschiedene Input Panel zur Auswahl zur Verfügung.

Input Panel															
Esc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	=	←		
Tab	q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	[]	\		
Caps Lock	a	s	d	f	g	h	j	k	l	;	'	↵			
Shift	z	x	c	v	b	n	m	,	.	/	↑	àü	pgup		
Ctrl	Alt	`						ins	del	←	↓	→	pgdn		

Figur 4: Standardbildschirm-Input Panel

Input Panel															
Esc	!	@	#	\$	%	^	&	*	()	_	+	←		
Tab	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	{	}			
Caps Lock	A	S	D	F	G	H	J	K	L	:	"	↵			
Shift	Z	X	C	V	B	N	M	<	>	?	↑	àü	Home		
Ctrl	Alt	~						ins	del	←	↓	→	End		

Figur 5: Bildschirm-Input Panel mit aktivierten Großbuchstaben




Figur 6: Bildschirm-Input Panel mit aktivierten Sonderbuchstaben



Figur 7: Bildschirm-Input Panel mit aktivierten Sonderbuchstaben und aktivierten Großbuchstaben

10.2 Bildschirm-Input Panel anzeigen

- 1 Tippen Sie unten rechts in der Menüleiste auf  um das Bildschirm-Input Panel zu aktivieren.



Das Symbol  ist nur dann sichtbar, wenn ein Dialog mit einem bearbeitbaren Textfeld aktiviert ist.

- 2 Tippen Sie in der Symbolleiste das auf das Dialogfeld **Input Panel** und ziehen Sie es an die gewünschte Stelle auf dem Bildschirm.

SIEHE AUCH:

"Bildschirm-Input Panel ausblenden" auf Seite 35

"Text mithilfe des Bildschirm-Input Panel eingeben" auf Seite 35

10.3 Bildschirm-Input Panel ausblenden

- 1 Tippen Sie unten rechts in der Menüleiste auf  um das Bildschirm-Input Panel auszublenden.

SIEHE AUCH:

"Bildschirm-Input Panel anzeigen" auf Seite 34

10.4 Text mithilfe des Bildschirm-Input Panel eingeben

Sie können mithilfe eines bearbeitbaren Textfeldes Text in einen Dialog eingeben.

- 1 Zeigen Sie das Bildschirm-Input Panel an.
- 2 Tippen Sie auf das bearbeitbare Textfeld.
- 3 Tippen Sie auf die Tasten auf dem Input Panel, um Text einzugeben.



Tippen Sie auf Caps Lock, um Großbuchstaben und/oder weitere Zeichen einzugeben. Tippen Sie auf äü, um Sonderzeichen einzugeben.

SIEHE AUCH:

"Bildschirm-Input Panel anzeigen" auf Seite 34

11 Allgemeine Einstellungen

11.1 Programmsprache festlegen

Die Sprache des Programms oder der Benutzeroberfläche kann der jeweiligen Sprache des Benutzers angepasst werden.



Informationen zum Festlegen der Programmsprache finden Sie in der Bedienungsanleitung für Mind Express.

11.2 Sprachausgabe einstellen


Nachrichten, die Sie den Rechtecken im Kommunikationsraster zuweisen, werden mithilfe des Sprachausgabegeräts laut ausgesprochen. Sie bestimmen die Sprechereigenschaften, beispielsweise die Sprache, die Stimme, die Lautstärke der Stimme, die allgemeine Lautstärke und die Sprechgeschwindigkeit.



Informationen zum Einstellen der Sprachausgabe finden Sie in der Bedienungsanleitung für Mind Express.

11.3 Zeit und Datum einstellen

Der Smart kann die Uhrzeit, den Wochentag und das Datum laut vorlesen. Vergewissern Sie sich, dass die Uhrzeit und das Datum richtig eingestellt sind.

- 1 Wählen Sie **Extras > Datum/Uhrzeit**.
- 2 Tippen Sie im Dialogfeld **Uhrzeit** auf die Stunde und stellen Sie mithilfe der Pfeiltasten die Uhrzeit ein. Gehen Sie für die Minuten und Sekunden auf die gleiche Weise vor.
- 3 Tippen Sie im Feld **Datum** auf die Schaltfläche  und wählen Sie auf dem Kalender das aktuelle Datum aus.

- 4 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste **Zeitformat** eine der folgenden Optionen:
 - **24h (15:30)** – die Zeit wird als Uhr mit 24-Stunden-Darstellung angezeigt.
 - **12h (3:30)** – die Zeit wird als Uhr mit 12-Stunden-Darstellung angezeigt.
 - **AM/PM (3:30 PM)** – die Zeit wird als Uhr mit AM (0-12 Uhr) und PM (12-24 Uhr)-Darstellung angezeigt.
- 5 Tippen Sie auf **OK**.

11.4 Bildschirmhelligkeit anpassen

- 1 Wählen Sie **Extras > Smart3 > Einstellungen**.
- 2 Bewegen Sie den Schieberegler neben dem Eintrag **Helligkeit** solange, bis der Bildschirm die gewünschte Helligkeit erreicht.
- 3 Tippen Sie auf **OK**.

11.5 Einstellen der allgemeinen Lautstärke

Die allgemeine Lautstärke des Geräts entscheidet über die Lautstärke der Sprachausgabe und die der Systemtöne (Ton beim Tippen auf den Bildschirm).

- 1 Wählen Sie **Extras > Optionen**.
- 2 Führen Sie im Dialogfenster **Optionen** eine der folgenden Aktionen durch:
 - Ziehen Sie den Schieberegler nach links, um die Lautstärke zu verringern
 - Ziehen Sie den Schieberegler nach rechts, um die Lautstärke zu verringern
- 3 Tippen Sie auf **OK**.



Die allgemeine Lautstärke kann auch in Sprache festgelegt werden.

11.6 Ansicht drehen

Der Bildschirm kann sowohl im Hochformat als auch im Querformat angezeigt werden.

- 1 Wählen Sie **Extras > Ansicht drehen**.
- 2 Um den Bildschirm erneut zu drehen, wiederholen Sie Schritt 1.

11.7 Einstellen der Wunschzeit zum Ausschalten von Smart

Der Smart kann automatisch heruntergefahren werden.

Beispiel: Sie können festlegen, dass sich der Smart automatisch nach 5 Stunden im Standby-Modus ausschaltet.

- 1 Wählen Sie **Extras > Smart3 > Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste **Ausschalten nach: (nach Übergang in Standby)** eine der folgenden Optionen aus:
 - **Nie**
 - **5 Stunden**
 - **10 Stunden**
 - **20 Stunden**
 - **25 Stunden**
- 3 Tippen Sie auf **OK**.

11.8 Menüleiste ausblenden

Um zu vermeiden, dass Benutzer Änderungen am Gerät vornehmen, kann die Menüleiste ausgeblendet werden.

Wählen Sie **Extras > Menü verstecken**.

SIEHE AUCH:

"Menüleiste wiederherstellen" auf Seite 39

11.9 Menüleiste wiederherstellen

Wenn Sie Anpassungen auf dem Gerät vornehmen möchten, muss die Menüleiste verfügbar sein. Ist die Menüleiste nicht verfügbar, muss sie wiederhergestellt werden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Menüleiste wiederherzustellen:

- 1 Nehmen Sie einen Kugelschreiber und drücken Sie die Reset-Taste.
- 2 Ist für die Darstellung der Menüleiste ein Passwort erforderlich, wird das Dialogfenster **Password** angezeigt. Geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf **OK**.

Die Menüleiste wird unten angezeigt.

SIEHE AUCH:

"Menüleiste ausblenden" auf Seite 39

11.10 Startoptionen einstellen

Sie können einen bestimmten Modus festlegen, in dem Mind Express gestartet werden soll: Soll das Menü angezeigt werden? Soll der Zugriff auf das Menü mit einem Passwort geschützt sein? Welche Dokumente sollen nach dem Starten angezeigt werden?



Informationen zum Einstellen der Startoptionen finden Sie in der Bedienungsanleitung für Mind Express.

11.11 Aufnahmen einstellen



Informationen zum Einstellen Ihrer Aufnahmen finden Sie in der Bedienungsanleitung für Mind Express.

12 Smart in den Standby-Modus setzen

Im Standby-Modus wird der Smart nicht vollständig heruntergefahren und kann schnell und einfach wieder gestartet werden.



Versetzen Sie das Gerät in den Standby-Modus, wenn Sie es über einen kurzen Zeitraum hinweg nicht benutzen. Das Gerät verbraucht dann weniger Energie als im eingeschalteten Zustand. Fahren Sie das Gerät herunter, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum hinweg nicht benutzen.

Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Wählen Sie **Extras > Smart3 > Standby**.
- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste.

SIEHE AUCH:

"Einschalten des Smart" auf Seite 29

13 Herunterfahren des Smart

Wenn Sie den Smart über einen längeren Zeitraum hinweg nicht benutzen, empfiehlt es sich, den Smart auszuschalten.

Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Wählen Sie **Extras > Smart3 > Herunterfahren**.
- Halten Sie die Ein/Aus-Taste mindestens vier Sekunden lang gedrückt.

SIEHE AUCH:

"Einschalten des Smart" auf Seite 29

D Bestimmte Einstellungen, Backup und Speicherplatz

1 Anpassen der benutzerdefinierten Einstellungen

1.1 Auswahloptionen

Es gibt eine große Anzahl an Einstellungen, mit denen die Auswahloptionen benutzerdefiniert angepasst werden können. Auf diese Weise entsprechen sie vielfältigen Anforderungen. Eine Auswahl kann in einer bestimmten Farbe konturiert und/oder vergrößert werden; und sie kann durch Drücken oder Lösen aktiviert werden. Eine Auswahl kann mit Verweildauer eingestellt werden und es ist sogar möglich, nach einem Auswahlvorgang einen Ton abzuspielen und/oder für eine Auswahl Feedback in auditiver Form wiederzugeben.



Informationen zum Festlegen von Auswahloptionen finden Sie in der Bedienungsanleitung für Mind Express.

1.2 Sprachwörterbuch, Satz- und Wortvorhersage

1.2.1 Sprachwörterbuch

Möglicherweise werden manchmal Wörter nicht richtig ausgesprochen. Dies kann Namen oder Wörter aus Fremdsprachen betreffen. Sie können solche Wörter mit neuer Aussprache zu einem Sprachwörterbuch hinzufügen. Sie können mehrere Sprachwörterbücher hinzufügen:

- Sprachwörterbücher pro Sprache
- Sprachwörterbücher pro Benutzer, wenn das Gerät von mehreren Personen verwendet wird
- Sprachwörterbücher pro Stimme. Das Klangformat kann je nach Stimme variieren.



Informationen zur Verwendung von Sprachwörterbüchern finden Sie in der Bedienungsanleitung für Mind Express.



Die Einstellungen für die Sprachwörterbücher müssen direkt im Smart vorgenommen werden. Sprachwörterbücher können nicht importiert werden!

1.2.2 Wortvorhersage

Is der Benutzer in der Lage Text zu benutzen, kann die Einbindung der Wortvorhersage die Kommunikationsgeschwindigkeit deutlich erhöhen. Die Einstellungen im Mind Express können so festgelegt werden, dass die Vorhersagen in den Rechtecken angezeigt werden. So kann der Benutzer diese Vorhersagen auswählen, um Wörter oder Sätze schneller einzugeben. Sobald der Benutzer einen Buchstaben oder ein Wort aus der Kommunikationskarte aktiviert, erscheinen die Vorhersagen in den Vorhersagefeldern.

Die Wortvorhersage ist kontextabhängig. Dies bedeutet, dass die Wortvorhersage nicht nur versucht, das zu formende Wort, sondern auch das nächstfolgende Wort vorherzusagen.



Informationen zur Verwendung der Wortvorhersage finden Sie in der Bedienungsanleitung für Mind Express.



Die Einstellungen für die Wortvorhersage müssen direkt im Smart vorgenommen werden. Eine Wortvorhersageliste kann nicht importiert werden!

1.2.3 Satzvorschläge

Is der Benutzer in der Lage, Text zu benutzen, kann die Einbindung der Satzvorschläge die Kommunikationsgeschwindigkeit deutlich erhöhen. Die Einstellungen im Mind Express können so festgelegt werden, dass die Vorhersagen in den Rechtecken angezeigt werden. Dies ermöglicht es dem Benutzer, die Vorhersagen auszuwählen. Sobald der Benutzer einen Buchstaben oder ein Wort aus der Kommunikationskarte auswählt, erscheinen die Vorhersagen in den Vorhersagefeldern des Mind Express. Die Satzvorschläge sucht nach Sätzen. Wenn Sie beispielsweise das Wort 'Blumen' eingeben, schlägt die Satzvorschläge den Satz 'Gieß doch bitte die Blumen' vor.



Wenn Sie den Mind Express zum ersten Mal verwenden, ist die Satzvorschläge leer.



Informationen zur Verwendung der Satzvorschläge finden Sie in der Bedienungsanleitung für Mind Express.




Die Einstellungen für die Satzvorschläge müssen direkt im Smart vorgenommen werden. Eine Satzvorschlägeliste kann nicht importiert werden!

2 Backup und Speicherplatz

2.1 Erstellen eines Backups von Smart

Ein Backup der Inhalte von Smart kann auf einem USB-Stick gesichert werden. Im Falle einer Störung des Smart kann über den USB-Stick ein Backup rückgesichert werden auf den Smart

- 1 Verbinden Sie den USB-Stick mit dem Smart.
- 2 Wählen Sie **Extras > Smart3 > Smart3-Inhalt auf Speicher-Stick kopieren**.
- 3 Tippen Sie auf das Feld **Name eingeben**.
- 4 Tippen Sie unten rechts auf , um das Bildschirm-Input Panel zu aktivieren.
- 5 Tippen Sie erneut auf das Feld **Name eingeben**.
- 6 Tippen Sie auf das Bildschirm-Input Panel, um den Namen des Backups einzugeben.

BEISPIEL: Backup Juni

- 7 Tippen Sie auf **OK**.
- 8 Tippen Sie im Dialogfeld **Smart3-Inhalt auf Speicher-Stick kopieren** auf **Ja**.

Das Erstellen des Backups beginnt. Es kann einige Minuten dauern, bis das Dialogfeld **Smart3-Inhalt auf Speicher-Stick kopieren erfolgreich abgeschlossen** angezeigt wird.

- 9 Tippen Sie auf **OK**.

SIEHE AUCH:

"Rücksichern eines Backups auf Smart" auf Seite 47

2.2 Rücksichern eines Backups auf Smart

Im Falle einer Störung des Smart kann über den USB-Stick ein Backup rückgesichert werden auf den Smart

- 1 Verbinden Sie den USB-Stick mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen USB-Adapterkabels mit dem Smart.
- 2 Drücken Sie die Spitze eines Kugelschreibers in die Reset-Öffnung und halten Sie die Position fünf Sekunden lang.
- 3 Drücken Sie die Ein/Aus-Taste.
Das Dialogfenster **Restore Files** wird angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf **Ja**, um ein Backup rückzusichern.
- 5 Wählen Sie das Backup aus, die Sie rücksichern möchten.
- 6 Wählen Sie gegebenenfalls die Option **Format drive first, then restore**, wenn ein vorheriges Backup, bei dem diese Option nicht ausgewählt wurde, kein gutes Ergebnis erzielt hat.
- 7 Tippen Sie auf **OK**.

SIEHE AUCH:

"Erstellen eines Backups von Smart" auf Seite 46

2.3 Speicherbereinigung des Smart

Wenn Sie mehrere Tonaufnahmen unter demselben Rechteck erstellen, werden nicht mehr verwendete wave-Dateien weiterhin im Speicher des Smart gespeichert. Dies bedeutet, dass der Arbeitsspeicher des Smart möglicherweise belegt wird.

- 1 Wählen Sie **Extras > Smart3 > Smart3 aufräumen**.
- 2 Tippen Sie auf **Aufräumen**.
- 3 Tippen Sie auf **Ja**.
Der Speicher wird gelöscht. Um zu sehen, wie viel freier Speicherplatz verfügbar ist, rufen Sie das Dialogfenster **Smart3 aufräumen** auf.
- 4 Tippen Sie auf **OK**.

SIEHE AUCH:

"Löschen einer Datei aus Smart" auf Seite 48

2.4 Löschen einer Datei aus Smart



Dokumente, Vorlagen, Zahlen, Tonsequenzen ebenso wie Musik und mehr kann aus dem Speicher des Smart gelöscht werden.

- 1 Wählen Sie **Extras > Smart3 > Smart3 aufräumen**.
- 2 Tippen Sie auf **Dateiverwaltung**.
- 3 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste **Typ** eine der folgenden Optionen:

- **Dokumente**
- **Vorlagen**
- **Bilder**
- **Töne**
- **Musik**

- 4 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste **Verzeichnis** gegebenenfalls ein Verzeichnis oder Unterverzeichnis.
- 5 Wählen Sie die Dateien aus, die Sie löschen möchten.



Tippen Sie gegebenenfalls auf , um die Dateien alphabetisch zu sortieren, oder tippen Sie alternativ auf , um die Dateien der Größe nach zu ordnen (groß zu klein).

- 6 Tippen Sie auf **Dateien löschen**.
- 7 Tippen Sie im Dialogfenster **Datei löschen** auf **Ja**.
- 8 Tippen Sie auf **Schließen**.
- 9 Tippen Sie auf **OK**.

SIEHE AUCH:

"Speicherbereinigung des Smart" auf Seite 47

E Aufnahmen von Nachrichten

1 Aufnehmen von Nachrichten


Mithilfe des Geräts können Sie Ihre gesprochene Nachricht oder eine Tonsequenz aufnehmen und in einem Feld speichern. Aufnahmen können im Aufnahmemodus, im Mausmodus und im Bearbeitungsmodus erfolgen.

2 Nachrichten im Aufnahmemodus aufnehmen

1 Wählen Sie **Bearbeiten > Aufnahmemodus**.

2 Tippen Sie auf das Feld, zu dem Sie eine Nachricht hinzufügen möchten.


Das Dialogfenster **Aufnahme** wird angezeigt.

3 Tippen Sie auf die Taste  und halten Sie sie während der gesamten Aufnahme gedrückt.





Sprechen Sie während der Aufnahme in normalem Tonfall und mit normaler Lautstärke. Halten Sie einen Abstand von ungefähr 30 cm vom Gerät ein.

4 Lösen Sie die Taste, um die Aufnahme zu beenden.

5 Tippen Sie auf , um die Aufnahme anzuhören. Wiederholen Sie die einzelnen Schritte ab Schnitt 3, wenn Sie mit dem Ergebnis der Aufnahme nicht zufrieden sind.

6 Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Tippen Sie auf , um die Aufnahme für das ausgewählte Feld zu speichern.
- Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu löschen.


SIEHE AUCH:

"Nachrichten im Mausmodus aufnehmen" auf Seite 53

3 Nachrichten im Mausmodus aufnehmen




- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Aufnahme auf **Schnellaufnahme** eingestellt ist. Wählen Sie **Extras > Optionen**.
- 2 Tippen Sie auf das Feld, zu dem Sie eine Nachricht hinzufügen möchten, und drücken Sie leicht, bis das Dialogfenster **Aufnahme** angezeigt wird.

Die Dauer für das Antippen und Gedrückthalten des Feldes ist in den Optionen festgelegt.

- 3 Tippen Sie auf die Taste  und halten Sie sie während der gesamten Aufnahme gedrückt.



Sprechen Sie während der Aufnahme in normalem Tonfall und mit normaler Lautstärke. Halten Sie einen Abstand von ungefähr 30 cm vom Gerät ein.

- 4 Lösen Sie die Taste, um die Aufnahme zu beenden.
- 5 Tippen Sie auf , um die Aufnahme anzuhören. Wiederholen Sie die einzelnen Schritte ab Schnitt 3, wenn Sie mit dem Ergebnis der Aufnahme nicht zufrieden sind.
- 6 Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Tippen Sie auf , um die Aufnahme für das ausgewählte Feld zu speichern.
 - Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu löschen.

SIEHE AUCH:



"Nachrichten im Aufnahmemodus aufnehmen" auf Seite 52

4 Löschen von Nachrichten aus Smart

Eine mit dem Smart vorgenommene Tonaufnahme kann aus dem Speicher des Smart gelöscht werden.

- 1 Wählen Sie **Extras > Smart3 > Smart3 aufräumen**.
- 2 Tippen Sie auf **Dateiverwaltung**.
- 3 Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü **Typ** die Option **Töne** aus.
- 4 Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü **Verzeichnis** die Option **Rec** aus.
- 5 Wählen Sie die Dateien aus, die Sie löschen möchten.



Tippen Sie gegebenenfalls auf , um die Dateien alphabetisch zu sortieren, oder tippen Sie alternativ auf , um die Dateien der Größe nach zu ordnen (groß zu klein).

- 6 Tippen Sie auf **Dateien löschen**.
- 7 Tippen Sie im Dialogfenster **Datei löschen** auf **Ja**.
- 8 Tippen Sie auf **Schließen**.
- 9 Tippen Sie auf **OK**.



F Die Kamera

1 Die Kamera

Der Smart ist mit einer Kamera ausgerüstet. Die Kamera nimmt Bilder auf; die Aufnahme von Videosequenzen ist nicht möglich. Die Bilder werden automatisch gespeichert und können im Kommunikationsraster benutzt werden.

2 Bilder aufnehmen

Der Smart ermöglicht die Aufnahme von Bildern, wenn auf dem Kommunikationsraster ein Rechteck vorhanden ist, das die Aktion **Schnappschuss** einschließt.

- 1 Tippen Sie auf das Rechteck im Kommunikationsraster.
- 2 Richten Sie die Kameralinse auf das Subjekt und warten Sie, bis das Bild scharfgestellt ist.
- 3 Tippen Sie auf  um ein Bild zu machen.
- 4 Wiederholen Sie Schritt 4, um weitere Bilder aufzunehmen.
- 5 Tippen Sie auf  um zum Kommunikationsraster zurückzukehren.






*Verwenden Sie die Rechtecke Vorheriges Bild, Nächstes Bild, um die von Ihnen aufgenommenen Bilder zu betrachten.
Verwenden Sie gegebenenfalls das Rechteck Bild entfernen, um ein Bild zu löschen.*


3 Bilder zum Einfügen in ein Rechteck aufnehmen

Sie können ein mit dem Gerät aufgenommenes Bild in ein Rechteck in einem Kommunikationsraster einfügen.

- 1 Öffnen Sie die Datei mit dem Kommunikationsraster, um ein von Ihnen aufgenommenes Bild in ein oder mehrere Rechtecke einzufügen.
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten > Fotomodus**.

- 3 Tippen Sie auf das Rechteck im Kommunikationsraster.
- 4 Richten Sie die Kameralinse auf das Subjekt und warten Sie, bis das Bild scharfgestellt ist.
- 5 Tippen Sie auf , um ein Bild zu machen.
- 6 Prüfen Sie das von Ihnen aufgenommene Bild und führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
 - Tippen Sie auf : Das Bild wird im Gerät gespeichert.
 - Tippen Sie auf : Das Bild wird vom Gerät gelöscht.



Um zum Kommunikationsraster zurückzukehren, ohne ein Bild zu verwenden, tippen Sie auf .

4 Bilder anzeigen

- 1 Wählen Sie **Datei > Öffnen**.
- 2 Öffnen Sie ein für die Anzeige von Bildern geeignetes Kommunikationsraster.
- 3 Zeigen Sie die Bilder an.



Tippen Sie gegebenenfalls auf die Rechtecke Vorheriges Bild, Nächstes Bild, um die von Ihnen aufgenommenen Bilder zu betrachten. Tippen Sie gegebenenfalls auf das Rechteck Bild entfernen, um ein Bild zu löschen.

5 Bilder löschen



- 1 Wählen Sie **Datei > Öffnen**.
- 2 Öffnen Sie ein für die Anzeige von Bildern geeignetes Kommunikationsraster.
- 3 Tippen Sie auf das Rechteck **Vorheriges Bild** und/oder auf **Nächstes Bild**, bis Sie die Bilder sehen, die Sie löschen möchten.
- 4 Tippen Sie auf das Rechteck **Bild entfernen**.

6 Bilder löschen (durch Laufwerkbereinigung)

Sie können ein Bild, das Sie mit dem Smart gemacht haben aus dem Speicher des Smart entfernen. Die mit einem Kommunikationsraster aufgenommenen Bilder des Anwenders (beispielsweise mit der standardmäßig ausgelieferten Datei *Anw_Kamera_smart*) werden im Verzeichnis **Smart3Camera** gespeichert. Bilder, die ein Betreuer aufnimmt, um die Rechtecke im Kommunikationsraster zu füllen, werden im Verzeichnis **Smart3Pictures** gespeichert.

- 1 Wählen Sie **Extras > Smart3 > Smart3 aufräumen**.
- 2 Tippen Sie auf **Dateiverwaltung**.
- 3 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste **Typ** die Option **Bilder** aus.
- 4 Wählen Sie das Verzeichnis **Smart3Camera** oder das Verzeichnis **Smart3Pictures** aus der Dropdown-Liste **Ordner** aus.
- 5 Wählen Sie die Dateien aus, die Sie löschen möchten.



Tippen Sie gegebenenfalls auf , um die Dateien alphabetisch zu sortieren, oder tippen Sie alternativ auf , um die Dateien der Größe nach zu ordnen (groß zu klein).

- 6 Tippen Sie auf **Dateien löschen**.



Wenn Sie ein in einem Kommunikationsraster verwendetes Bild entfernen, kann dieses spezielle Bild nicht mehr im Kommunikationsraster angezeigt werden.

- 7 Tippen Sie im Dialogfenster **Datei löschen** auf **Ja**.

- 8 Tippen Sie auf **Schließen**.

- 9 Tippen Sie auf **OK**.

G Persönliche Anwendungen

1 Der Terminkalender

Mit diesem Gerät lassen sich Verabredungen und Termine in Ihrem Terminkalender ordnen. Sie können den Terminkalender auch verwenden, um Erinnerungen hinzuzufügen. Auf diese Weise werden Sie beispielsweise an die Geburtstage von Freunden und Familienmitgliedern erinnert.

1.1 Den Terminkalender anzeigen

- 1 Wählen Sie **Extras > Terminkalender > Terminkalender bearbeiten**.
- 2 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste **Anzeigen** eine der folgenden Optionen aus:
 - **Einzelner Tag**
 - **Woche**
 - **Monat**
- 3 Wählen Sie aus der zweiten Dropdown-Liste, das Datum aus, das angezeigt werden soll.
- 4 Tippen Sie auf **OK**.

1.2 Erinnerung hinzufügen

- 1 Wählen Sie **Extras > Terminkalender > Erinnerung hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste **Wann** ein sich wiederholendes Erinnerungssignal:
 - **Einmal**
 - **Jeden Tag**
 - **Jeden Arbeitstag**
 - **Jede Woche**
 - **Jedes Monat**
 - **Jedes Jahr**
- 3 Geben Sie im Feld **Um** den Zeitpunkt für das Erinnerungssignal ein. Verwenden Sie hierzu die Pfeiltasten.
- 4 Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Tippen Sie für ein einmaliges Erinnerungssignal auf im nachstehenden Feld und wählen Sie das Datum für das Erinnerungssignal aus.
 - Tippen Sie für ein wiederholtes Erinnerungssignal unter **Startdatum** auf , um das Datum für den Beginn des Termins auszuwählen. Tippen Sie dann unter **Enddatum** auf , um den Endzeitpunkt des Termins auszuwählen.
- 5 Geben Sie im Feld **Brief** den Text für das Erinnerungssignal ein.
- 6 Wählen Sie die Option **Sprechen**, wenn Sie möchten, dass die Nachricht laut vorgelesen wird.
- 7 Wählen Sie die Option **Nachricht zeigen** wenn Sie möchten, dass die Nachricht auf dem Gerät angezeigt wird.
- 8 Um dem Erinnerungssignal einen Ton zuzuweisen, tippen Sie neben der Option **Ton** auf . Wählen Sie einen Ton aus und tippen Sie auf **Öffnen**.
- 9 Tippen Sie auf **Speichern**.

1.3 Signal ändern


- 1 Wählen Sie **Extras > Terminkalender > Terminkalender bearbeiten**.
- 2 Wählen Sie das Erinnerungssignal aus, das Sie ändern möchten.
- 3 Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
- 4 Ändern Sie gegebenenfalls in der Dropdown-Liste **Wann** die Wiederholhäufigkeit des Erinnerungssignals:
 - **Einmal**
 - **Jeden Tag**
 - **Jeden Arbeitstag**
 - **Jede Woche**
 - **Jedes Monat**
 - **Jedes Jahr**
- 5 Ändern Sie gegebenenfalls im Feld **Um** den Zeitpunkt des Erinnerungssignals: Verwenden Sie hierzu die Pfeiltasten.
- 6 Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Tippen Sie für ein einmaliges Erinnerungssignal auf im nachstehenden Feld und wählen Sie das Datum für das Erinnerungssignal aus.
 - Tippen Sie für ein wiederholtes Erinnerungssignal unter **Startdatum** auf , um das Datum für den Beginn des Termins auszuwählen. Tippen Sie dann unter **Enddatum** auf , um den Endzeitpunkt des Termins auszuwählen.
- 7 Ändern Sie gegebenenfalls im Feld **Brief** den Text des Erinnerungssignals.
- 8 Ändern Sie gegebenenfalls die Option **Sprechen**, damit die Nachricht laut oder gar nicht gesprochen wird.
- 9 Ändern Sie gegebenenfalls die Option **Nachricht zeigen**, damit die Nachricht auf dem Gerät angezeigt oder nicht angezeigt wird.
- 10 Ändern Sie gegebenenfalls den Ton des Signals, indem Sie neben **Ton** auf tippen. Wählen Sie dann einen Ton aus und tippen Sie auf **Öffnen**.

- 11 Tippen Sie auf **Speichern**.
- 12 Tippen Sie auf **OK**.

1.4 Signal löschen

- 1 Wählen Sie **Extras > Terminkalender > Terminkalender bearbeiten**.
- 2 Wählen Sie das Erinnerungssignal aus, das Sie löschen möchten.
- 3 Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
- 4 Tippen Sie im Dialogfenster **Erinnerung bearbeiten** auf **Entfernen**.
- 5 Tippen Sie auf **OK**.

1.5 Aktivitäten hinzufügen

- 1 Wählen Sie **Extras > Terminkalender > Terminkalender bearbeiten**.
- 2 Tippen Sie auf **Hinzufügen**.
- 3 Geben Sie im Feld **Aktivität** den Namen der Aktivität oder des Termins ein.
- 4 Tippen Sie neben dem Feld **Bild** auf  um der Aktivität ein Bild hinzuzufügen.
- 5 Suchen Sie mithilfe der Dropdown-Listen im Dialogfenster **Symbole** das gewünschte Bild. Wählen Sie das Bild aus und tippen Sie auf **OK**.



- 6 Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Wann** einen Eintrag, um die Aktivität zu wiederholen:
 - **Einmal**
 - **Jeden Tag**
 - **Jeden Arbeitstag**
 - **Jede Woche**
 - **Jedes Monat**
 - **Jedes Jahr**

- 7 Wählen Sie im Feld **Dauer** eine der folgenden Optionen aus:
 - **Ganzer Tag**
 - **Von Bis**


- 8 Haben Sie die Option **Von Bis** ausgewählt, dann geben Sie nun in den Feldern **Von** und **Bis** die Startzeit und die Endzeit der Aktivität ein. Tippen Sie auf die Stundenziffern und verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Stunde individuell einzustellen. Tippen Sie auf die Minutenziffern und verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Minuten individuell einzustellen.

- 9 Wählen Sie gegebenenfalls die Option **Erinnerung**, wenn Sie zu Beginn der Aktivität oder vor dem Beginn der Aktivität ein Erinnerungssignal erhalten möchten.

- 10 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste **Erinnerung** eine der folgenden Optionen aus:
 - **Bei Beginn**
 - **5 Minuten vor dem Start**
 - **15 Minuten vor dem Start**
 - **30 Minuten vor dem Start**
 - **1 Stunde vor dem Start**
 - **2 Stunden vor dem Start**
 - **1 Tag vor dem Start**

- 11 Tippen Sie auf , um das Erinnerungssignal festzulegen.
- 12 Geben Sie im Feld **Brief** den Text für das Erinnerungssignal ein.
- 13 Wählen Sie die Option **Sprechen**, wenn Sie möchten, dass die Nachricht laut vorgelesen wird.
- 14 Wählen Sie die Option **Nachricht zeigen** wenn Sie möchten, dass die Nachricht auf dem Gerät angezeigt wird.
- 15 Um dem Erinnerungssignal einen Ton zuzuweisen, tippen Sie neben der Option **Ton** auf . Wählen Sie einen Ton aus und tippen Sie auf **Öffnen**.
- 16 Tippen Sie auf **OK**.
- 17 Tippen Sie auf **Speichern**.
- 18 Tippen Sie auf **OK**.

1.6 Aktivitäten ändern

- 1 Wählen Sie **Extras > Terminkalender > Terminkalender bearbeiten**.
- 2 Wählen Sie die Aktivität aus, die Sie ändern möchten.
- 3 Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
- 4 Geben Sie gegebenenfalls im Feld **Aktivität** den Namen der Aktivität oder des Termins ein.
- 5 Tippen Sie gegebenenfalls neben dem Feld **Bild** auf , um der Aktivität ein Bild zuzuweisen oder um das Bild der Aktivität zu ändern.
- 6 Suchen Sie mithilfe der Dropdown-Listen im Dialogfenster **Symbole** das gewünschte Bild. Wählen Sie das Bild aus und tippen Sie auf **OK**.



- 7 Ändern Sie gegebenenfalls in der Dropdown-Liste **Wann** die Wiederholhäufigkeit der Aktivität:
 - **Einmal**
 - **Jeden Tag**
 - **Jeden Arbeitstag**
 - **Jede Woche**
 - **Jedes Monat**
 - **Jedes Jahr**

- 8 Ändern Sie gegebenenfalls eine der folgenden Optionen im Feld **Dauer**:
 - **Ganzer Tag**
 - **Von Bis**

- 9 Haben Sie die Option **Von Bis** ausgewählt, dann geben Sie nun in den Feldern **Von** und **Bis** die Startzeit und die Endzeit der Aktivität ein. Tippen Sie auf die Stundenziffern und verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Stunde individuell einzustellen. Tippen Sie auf die Minutenziffern und verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Minuten individuell einzustellen.

- 10 Wählen Sie gegebenenfalls die Option **Erinnerung**, wenn Sie zu Beginn der Aktivität oder vor dem Beginn der Aktivität ein Erinnerungssignal erhalten möchten.

- 11 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste **Erinnerung** eine der folgenden Optionen aus:
 - **Bei Beginn**
 - **5 Minuten vor dem Start**
 - **15 Minuten vor dem Start**
 - **30 Minuten vor dem Start**
 - **1 Stunde vor dem Start**
 - **2 Stunden vor dem Start**
 - **1 Tag vor dem Start**


- 12 Tippen Sie auf , um das Erinnerungssignal festzulegen.
- 13 Geben Sie im Feld **Brief** den Text für das Erinnerungssignal ein.
- 14 Wählen Sie die Option **Sprechen**, wenn Sie möchten, dass die Nachricht laut vorgelesen wird.
- 15 Wählen Sie die Option **Nachricht zeigen** wenn Sie möchten, dass die Nachricht auf dem Gerät angezeigt wird.
- 16 Um dem Erinnerungssignal einen Ton zuzuweisen, tippen Sie neben der Option **Ton** auf . Wählen Sie einen Ton aus und tippen Sie auf **Öffnen**.
- 17 Tippen Sie auf **OK**.
- 18 Tippen Sie auf **Speichern**.
- 19 Tippen Sie auf **OK**.

1.7 Aktivitäten löschen

- 1 Wählen Sie **Extras > Terminkalender > Terminkalender bearbeiten**.
- 2 Wählen Sie die Aktivität aus, die Sie löschen möchten.
- 3 Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
- 4 Tippen Sie auf **Entfernen**.
- 5 Tippen Sie auf **OK**.

1.8 Hintergrund für den Terminkalender einstellen



In einem Kommunikationsraster, in dem Terminkalender-Rechtecke verwendet werden, können Sie für jeden Monat einen individuellen Hintergrund festlegen.

- 1 Öffnen Sie ein Kommunikationsraster mit Terminkalender-Rechtecken.
- 2 Wählen Sie **Extras > Terminkalender > Benutzerdefinierter Hintergrund**.
- 3 Tippen Sie auf  neben dem Monat, dessen Hintergrund Sie individuell anpassen möchten.
- 4 Suchen Sie mithilfe der Dropdown-Listen im Dialogfenster **Symbole** das gewünschte Bild. Wählen Sie das Bild aus und tippen Sie auf **OK**.
- 5 Wiederholen Sie die einzelnen Schritte ab Schritt 2 für alle anderen Monate.
- 6 Tippen Sie auf **OK**.
- 7 Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus, um die Änderungen im Kommunikationsraster zu speichern:
 - Wählen Sie **Datei > Speichern**.
 - Drücken Sie auf **Strg + S**.



2 Das Adressbuch

Das Gerät kann im Adressbuch sämtliche Namen und Telefonnummern Ihrer Freunde und Kontakte speichern. Das Adressbuch kann in einem Kommunikationsraster verwendet werden, beispielsweise um einen Kontakt anzurufen.


2.1 Kontakte hinzufügen

- 1 Wählen Sie **Extras > Adressbuch**.
- 2 Tippen Sie auf **Kontakt hinzufügen** .
- 3 Tippen Sie auf , um ein Bild zu diesem Kontakt hinzuzufügen.
- 4 Suchen Sie mithilfe der Dropdown-Listen im Dialogfenster **Symbole** das gewünschte Bild. Wählen Sie das Bild aus und tippen Sie auf **OK**.
- 5 Tippen Sie auf das Feld **Name eingeben** und geben Sie den Namen des Kontakts ein. Dieses Feld darf nicht leer bleiben.
- 6 Tippen Sie auf das Feld **Telefon** und geben Sie die Telefonnummer des Kontakts ein.
- 7 Tippen Sie auf **OK**.

2.2 Kontakte bearbeiten

- 1 Wählen Sie **Extras > Adressbuch**.
- 2 Tippen Sie auf **Kontakt bearbeiten** .
- 3 Tippen Sie auf , um ein (anderes) Bild zu diesem Kontakt hinzuzufügen.
- 4 Suchen Sie mithilfe der Dropdown-Listen im Dialogfenster **Symbole** das gewünschte Bild. Wählen Sie das Bild aus und tippen Sie auf **OK**.
- 5 Tippen Sie auf das Feld **Name eingeben** und ändern Sie den Namen des Kontakts. Dieses Feld darf nicht leer bleiben.
- 6 Tippen Sie auf das Feld **Telefon** und ändern Sie die Telefonnummer des Kontakts.
- 7 Tippen Sie auf **OK**.

2.3 Kontakte löschen

- 1 Wählen Sie **Extras > Adressbuch**.
- 2 Wählen Sie den Kontakt aus, den Sie löschen möchten.
- 3 Tippen Sie auf **Kontakt löschen** .
- 4 Tippen Sie auf **OK**.

H Verbindung mit dem Eddy

1 Was kann Eddy?

Der Eddy ist ein kleines tragbares Display mit eingebautem Lautsprecher. Zwischen dem Smart und dem Eddy kann eine Bluetooth-Verbindung hergestellt werden. Sie haben dann die Auswahl zur Übertragung von Text und/oder Ton. Der Text wird, abhängig von den Einstellungen, in 1, 2 oder 3 Textzeilen angezeigt.



Figur 1: Der Eddy

SIEHE AUCH:

"Eddy-Einstellungen" auf Seite 75

2 Bluetooth

Bluetooth bietet eine drahtlose Kommunikationstechnologie für die Kommunikation über kurze Entfernungen. Für Bluetooth ist keine physische Verbindung erforderlich. Daten können auf eine Entfernung von bis zu 10 Metern ausgetauscht werden. Mit Bluetooth ist die Ausrichtung der Geräte aufeinander nicht erforderlich. Werden die Geräte innerhalb der möglichen Reichweite verwendet, können Daten selbst dann übertragen werden, wenn die Geräte sich nicht im selben Raum befinden.

Mit dem Smart kann über Bluetooth eine Verbindung zu anderen Bluetooth-fähigen Geräten hergestellt werden. Beispielsweise zum Eddy oder einem Handy.



Einige Geräte sind möglicherweise nicht mit Ihrem Gerät kompatibel.



Objekte zwischen den verwendeten Geräten verringern möglicherweise den möglichen Kommunikationsabstand der Geräte.

3 Eddy-Einstellungen

- 1 Wählen Sie **Extras > Eddy > Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie – entsprechend Ihren Anforderungen – folgende Optionen:


Automatisch verbinden, wenn Mind Express startet	Mit dieser Auswahl versucht das Gerät automatisch, eine Verbindung zum Eddy herzustellen.
Ton senden	Mit dieser Auswahl werden Tonsequenzen ausschließlich über die Lautsprecher des Eddy geleitet.
Text senden	Mit dieser Auswahl wird der Text auf dem Eddy angezeigt.
Alles in Großbuchstaben schreiben	Mit dieser Auswahl wird der Text auf dem Eddy in Großbuchstaben angezeigt.
Anzahl der Zeilen in der Anzeige	Treffen Sie mithilfe der Dropdown-Liste eine Auswahl, wie viele Textzeilen (1, 2 oder 3) auf dem Bildschirm des Eddy angezeigt werden sollen.

- 3 Tippen Sie auf **OK**.


SIEHE AUCH:

"Was kann Eddy?" auf Seite 74

4 Eddy-Suche

- 1 Wählen Sie **Extras > Eddy > Verbinden**.
- 2 Tippen Sie auf **Suchen** .
Sobald der Eddy erkannt wurde, wird in der Dropdown-Liste angezeigt.
- 3 Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Tippen Sie auf **OK**.
 - Verbindung mit dem Eddy erfolgt.

5 Verbindung dem Eddy herstellen

- 1 Wählen Sie **Extras > Eddy > Verbinden**.
- 2 Tippen Sie auf **Verbinden** .
Das Dialogfeld **Eddy** wird zusammen mit der Nachricht **Verbunden mit Eddy** angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf **OK**.
- 4 Tippen Sie auf **OK**.

SIEHE AUCH:

"Verbindung vom Eddy trennen" auf Seite 77

6 Verbindung vom Eddy trennen

Wählen Sie **Extras > Eddy > Trennen**.

Verbindung zum Eddy wurde getrennt

SIEHE AUCH:

"Verbindung dem Eddy herstellen" auf Seite 76

I Verbindung mit dem Computer und USB-Anschlüssen herstellen

1 Verbindung mit dem Computer

Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel, um das Gerät mit einem Computer zu verbinden. Nachdem Sie das Gerät mit einem Computer verbunden haben, können Sie mit Mind Express Daten von und zum Gerät übertragen.

2 Gerät mit dem Computer verbinden

Verbinden Sie das Gerät mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel mit dem Computer.

Das Dialogfeld **Windows Mobile-Gerätecenter** wird auf dem PC angezeigt.

SIEHE AUCH:

"Gerät vom Computer trennen" auf Seite 80

3 Gerät vom Computer trennen

Um Datenverlust auf dem Gerät vorzubeugen und eine Beschädigung des Arbeitsspeichers zu vermeiden, sollten Sie den im Folgenden beschriebenen Vorgang einhalten, wenn Sie das Gerät vom Computer trennen.

- 1 Tippen Sie im Windows-Infobereich auf das USB-Symbol.
- 2 Tippen Sie auf die Option zum sicheren Entfernen des Geräts.
- 3 Trennen Sie das USB-Kabel zwischen Gerät und Computer.

SIEHE AUCH:

"Gerät mit dem Computer verbinden" auf Seite 80

4 Externes Input Panel anschließen

- 1 Verbinden Sie das externe Input Panel mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen USB-Adapterkabels mit dem Smart.
- 2 Wählen Sie **Extras > Smart3 > Einstellungen**.
- 3 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste **USB Tastatur** das Input Panel-Layout für das angeschlossene Input Panel aus.
- 4 Tippen Sie auf **OK**.

5 Externe Maus anschließen

Verbinden Sie die externe Maus mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen USB-Adapterkabels mit dem Smart.

6 USB-Stick verbinden

Mithilfe eines USB-Sticks können Sie ein Backup von Ihrem Smart erstellen.

Verwenden Sie den im Lieferumfang enthaltenen USB-Adapter, um den USB-Stick mit dem Smart zu verbinden.

J Anrufe

1 Telefon

Zwischen dem Smart und Ihrem Handy kann eine Bluetooth-Verbindung hergestellt werden. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, können Sie über den Smart eine von Ihnen eingegebene Telefonnummer oder eine Person aus Ihrem Adressbuch anrufen (beispielsweise mithilfe der Datei *Anw_Telefon_smart*).

2 Bluetooth aktivieren

Um eine Verbindung zwischen dem Handy und dem Smart herzustellen, muss Bluetooth auf beiden Geräten aktiviert sein.

Wählen Sie **Extras > Telefon > Bluetooth aktivieren**.

Ein Tonsignal gibt an, dass Bluetooth jetzt aktiviert ist.

3 Telefonoptionen für Smart einrichten

Sie können den Bluetooth-Namen des Smart ändern und Sie können einstellen, dass Bluetooth beim Starten von Smart automatisch aktiviert wird. Sie können auch Ereignisse visualisieren. Wenn beispielsweise Bluetooth aktiviert wurde, oder wenn Sie einen Anruf erhalten ...

1 Wählen Sie **Extras > Telefon > Einstellungen**.

2 Ändern Sie gegebenenfalls im Feld **Bluetooth Name**: den Namen des Smart.

Der Name erscheint in der Liste der gekoppelten Geräte auf Ihrem Handy.

3 Wählen Sie gegebenenfalls die Option **Beim nächsten Start erneut verbinden**, damit Bluetooth beim Starten von Smart aktiviert wird.

- 4 Wählen Sie gegebenenfalls die Option **Zusätzliche Informationen anzeigen**, um bestimmte Vorgänge auf dem Bildschirm zu erklären.
BEISPIEL: Bluetooth aktivieren.
- 5 Wählen Sie die Option **Benachrichtigung über eingehende Anrufe**.
Wenn Sie über den Smart einen Anruf erhalten, wird eine Nachricht angezeigt.
- 6 Tippen Sie auf **OK**.

4 Telefon verbinden mit dem Smart

Die Verbindung zwischen einem Handy und dem Smart hängt von der Marke und dem jeweiligen Handymodell ab. Im Folgenden wird der Vorgang im Allgemeinen beschrieben.



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Handys.

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Smart.
- 2 Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Handy und veranlassen Sie die Suche nach verfügbaren Geräten.
- 3 Suchen Sie den Bluetooth-Namen des Smart in der Liste der verfügbaren Geräte und koppeln Sie das Gerät.
- 4 Geben Sie den Pin-Code für den Smart ein. Der Standardcode ist 1111.

Wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt, können Sie über den Smart Anrufe tätigen, Anrufe entgegennehmen und Anrufe beenden.

5 Telefonnummer wählen

Mit dem Smart können Sie unter einer selbst gespeicherten Telefonnummer anrufen.



Sie können mithilfe der Datei `Anw_Telefon_smart` Personen aus Ihrem Adressbuch anrufen.

- 1 Wählen Sie **Extras > Telefon > Anrufen**.
- 2 Geben Sie im Dialogfeld **Telefonnummer** die Telefonnummer (nur Ziffern) ein.
- 3 Tippen Sie auf **OK**.

6 Telefonanruf annehmen

Mit dem Smart können Sie einen Anruf annehmen.



Außerdem können Sie mithilfe der Datei `Anw_Telefon_smart` ein Telefongespräch entgegennehmen.

Wählen Sie **Extras > Telefon > Anruf annehmen**.

7 Anruf beenden

Mit dem Smart können Sie einen Telefonanruf beenden.



Außerdem können Sie mithilfe der Datei `Anw_Telefon_smart` auflegen.

Wählen Sie **Extras > Telefon > Auflegen**.

K Umweltkontrolle

1 Umweltkontrolle

Der Smart ist mit einem Infrarot-Empfänger und einem Infrarot-Sender ausgestattet. Damit ist es möglich, mit dem Smart Geräte wie Fernseher, Radio und DVD-Spieler über Infrarot-Codes zu steuern. Der Smart ist in der Lage, die Infrarot-Codes der Geräte zu erkennen.

2 Infrarot-Codes erfassen

1 Wählen Sie **Extras > Umweltkontrolle > Signal lernen**.

2 Wählen Sie einen Infrarot-Code im Dialogfenster **Jabbl!iR** aus.

3 Tippen Sie im Feld **Name eingeben** auf den Namen des Infrarot-Codes.

BEISPIEL: Fernseher lauter

4 Halten Sie die Fernbedienung des entsprechenden Geräts (beispielsweise die TV-Fernbedienung) in einem Abstand von ungefähr 5 cm vom Infrarot-Empfänger (5) des Smart.

5 Tippen Sie auf **Signal lernen**.

Im Feld **Status** wird die Nachricht **Taste gedrückt halten** angezeigt.

6 Drücken Sie kurz die Taste der Fernbedienung (beispielsweise den Lautstärkeregler).

Im Feld **Status** wird die Meldung **OK** angezeigt. Falls die Meldung **Fehler** erscheint, beginnen Sie erneut ab Schritt 5 und wiederholen Sie den Vorgang.

7 Richten Sie den Smart auf das Gerät, dessen Infrarot-Code Sie testen möchten.



Das Infrarot-Signal wird über den Infrarot-Sender (13) auf der Rückseite des Smart übertragen.

8 Tippen Sie auf **Testen**.

Wenn der Infrarot-Code den geforderten Befehl tatsächlich ausführt, dann ist der Test OK. Andernfalls muss der Code erneut erfasst werden.

- 9 Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 2, um weitere Infrarot-Codes zu erfassen.
- 10 Tippen Sie auf **OK**.

3 Erstellen eines Backups der Infrarot-Codes

Sie können ein Backup der Infrarot-Codes erstellen, damit im Falle einer Störung eine Rücksicherung möglich ist. Dies kann nützlich sein, falls der Smart an unterschiedlichen Standorten zum Einsatz kommt. Erfassen Sie die Infrarot-Codes für Standort A. Erstellen Sie dann ein Backup. Führen Sie denselben Vorgang auch für Standort B durch. Rufen Sie dann **Rücksichern** auf, um – abhängig von Ihrem Standort – zwischen den Infrarot-Codes zu wechseln.

- 1 Wählen Sie **Extras > Umweltkontrolle > Sichern**.
- 2 Tippen Sie im Feld **Name eingeben** auf den Namen des Backups.
BEISPIEL: Zuhause
- 3 Tippen Sie auf **OK**.
- 4 Tippen Sie im Dialogfenster **Sichern** auf **Ja**.
Das Backup wird erstellt.

SIEHE AUCH:

"Rücksichern eines Backups der Infrarot-Codes" auf Seite 92

4 Rücksichern eines Backups der Infrarot-Codes

Sie können ein Backup der Infrarot-Codes erstellen, damit im Falle einer Störung eine Rücksicherung möglich ist. Dies kann nützlich sein, falls der Smart an unterschiedlichen Standorten zum Einsatz kommt. Erfassen Sie die Infrarot-Codes für Standort A. Erstellen Sie dann ein Backup. Führen Sie denselben Vorgang auch für Standort B durch. Rufen Sie dann "Rücksichern" auf, um – abhängig von Ihrem Standort – zwischen den Infrarot-Codes zu wechseln.

- 1 Wählen Sie **Extras > Umweltkontrolle > Rücksichern**.
- 2 Tippen Sie in der Liste **Backup wählen** auf den Namen des Backups, das Sie rücksichern möchten.



Die Rücksicherung eines Backups kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

- 3 Tippen Sie auf **OK**.
Das Backup wurde rückgesichert.

SIEHE AUCH:

"Erstellen eines Backups der Infrarot-Codes" auf Seite 91

L Kommunikation

1 Kommunikation

Mind Express 4 wurde auf dem Smart installiert.

Mind Express ist ein Computerprogramm, das sich einfach bedienen lässt und alle Funktionen umfasst, die ein Sprachtherapeut zum Erstellen neuer Kommunikationsraster und Übungen benötigt. Mithilfe einer Bandbreite an Symbolen, Bildern, Text-in-Sprache-Nachrichten, Musik und Tonsequenzen können interessante und stimulierende Kommunikationsraster erstellt werden.

Dank Mind Express können durch die Auswahl von Bildern und/oder Symbolen Sprachnachrichten erstellt werden. Mind Express umfasst auch ein integriertes Grammatikmodul, das – unter anderem – automatische Verbkonjugationen bietet.

Außerdem steht eine Bandbreite an Symbolen und Bildzeichen zur Verfügung. Damit können Kommunikationskarten, Spiele, Übungen oder weitere Anwendungen erstellt werden. Sie können darüber hinaus eigene Zeichnungen, Fotos oder neue Symbole hinzufügen.



Es ist möglich, auf dem Smart Dokumente zu erstellen und zu bearbeiten; allerdings ist es einfacher, ein Dokument auf dem Computer zu erstellen und es danach über eine USB-Verbindung an den Smart weiterzuleiten.



Um Dokumente zu erstellen und zu bearbeiten, folgen Sie der im Mind Express beschriebenen Bedienungsanleitung.

2 Hinzufügen einer speziellen Smart-Aktion

Zusätzlich zu den im Mind Express verfügbaren Aktionen, können Sie spezielle Aktionen im Smart den Vierecken in folgenden Systemkomponenten zuweisen:

- Eddy
- Umweltkontrolle
- Ansicht drehen
- Smart 3 Camera
- Smart3

3 Eddy-Aktionen hinzufügen

Nachdem Sie einem Rechteck im Kommunikationsraster eine Eddy-Aktion zugewiesen haben, können dieses Rechteck aktivieren und die Verbindung zum Eddy herstellen oder trennen, Text aktivieren oder deaktivieren, den Ton ein- oder ausschalten und die Lautstärke erhöhen oder verringern.

- 1 Wählen Sie **Bearbeiten > Bearbeitungsmodus**.
- 2 Tippen Sie zweimal (entspricht Doppelklick) auf das Rechteck, dem eine Aktion hinzugefügt werden soll.
- 3 Wählen Sie in der Optionsgruppe **Aktionen** den Eintrag **Eddy** aus.
- 4 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste **Aktionen > Eddy** eine der folgenden Optionen aus:

(Wieder) verbinden	Stellt die Verbindung zum Eddy her
Trennen	Stellt die Verbindung zum Eddy.
Text löschen	Löscht den Text aus dem Eddy.
Ton: an	Schaltet im Eddy den Ton an.
Ton: aus	Schaltet im Eddy den Ton aus.
Ton: umschalten	Wechselt den Tonstatus im Eddy zwischen an und aus. Ist der Ton an, wird er mit dieser Aktion ausgeschaltet. Ist der Ton aus, wird er mit dieser Aktion eingeschaltet.
Text: an	Schaltet die Textfunktion im Eddy an.
Text: aus	Schaltet die Textanzeige im Eddy aus.
Text: umschalten	Wechselt den Textstatus im Eddy zwischen an und aus. Ist die Textanzeige an, wird sie mit dieser Aktion abgeschaltet. Ist die Textanzeige aus, wird sie mit dieser Aktion eingeschaltet.
Lautstärke: lauter	Erhöht die Lautstärke des Eddy.
Lautstärke: leiser	Verringert die Lautstärke des Eddy.

4 Aktion Umweltkontrolle hinzufügen

Nachdem Sie einem Rechteck im Kommunikationsraster eine **Umweltkontrolle** zugewiesen haben, können Sie dieses Rechteck aktivieren und ein Gerät in der Umgebung steuern.

- 1 Wählen Sie **Bearbeiten > Bearbeitungsmodus**.
- 2 Tippen Sie zweimal (entspricht Doppelklick) auf das Rechteck, dem eine Aktion hinzugefügt werden soll.
- 3 Wählen Sie in der Optionsgruppe **Aktionen** den Eintrag **Umweltkontrolle** aus.
- 4 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste **Aktionen > Umweltkontrolle** eine der folgenden Optionen:

Pause	Passen Sie, falls erforderlich, im Feld Dauer die Anzahl an Millisekunden an, um die Länge der Pause zu bestimmen. Die Pause-Aktion dient dazu, einen zeitlichen Abstand zwischen zwei Umweltkontrollen zu erstellen. Beispiel: Manche Geräte sind für sehr schnelle Signalfolgen ungeeignet.
IR1	Sie können hier einen eigenen benutzerdefinierten Namen für diese spezielle Umweltkontrolle-Aktion eingeben. Rufen Sie, falls erforderlich, das Feld Wiederholen : auf und passen Sie die Häufigkeit an, mit der die Übertragung des Signals erfolgen soll. Beispiel: Sie möchten die Lautstärke eines Geräts deutlich erhöhen jedoch das entsprechende Rechteck nicht 10 Mal drücken und geben darum Wiederholen : 10 ein.

5 Smart 3 Camera-Aktion hinzufügen

Nachdem Sie einem Rechteck im Kommunikationsraster eine der **Smart 3 Camera**-Aktionen zugewiesen haben, können Sie dieses Rechteck aktivieren und ein Bild machen, das vorherige oder das folgende Bild anzeigen oder ein Bild entfernen.



Um die Bilder betrachten zu können, muss sich im Kommunikationsraster ein Rechteck vom Typ Smart 3 Camera befinden.

- 1 Wählen Sie **Bearbeiten > Bearbeitungsmodus**.
- 2 Tippen Sie zweimal (entspricht Doppelklick) auf das Rechteck, dem eine Kamera-Aktion hinzugefügt werden soll.
- 3 Wählen Sie in der Optionsgruppe **Aktionen** den Eintrag **Smart 3 Camera** aus.
- 4 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste **Aktionen > Smart 3 Camera** eine der folgenden Optionen aus:

Schnappschuss	Mit dieser Option können Bilder gemacht werden.
Nächstes Bild	Das folgende Bild der Medienbibliothek wird angezeigt.
Vorheriges Bild	Das vorige Bild der Medienbibliothek wird angezeigt.
Bild entfernen	Das aktivierte Bild wird aus der Medienbibliothek gelöscht.

6 Hinzufügen einer Smart3-Aktion

Nachdem Sie einem Rechteck im Kommunikationsraster eine der Aktionen **Smart3** zugewiesen haben, können Sie dieses Rechteck aktivieren und die Helligkeit anpassen, das Gerät in den Standby-Modus versetzen und das Mikrofon aktivieren oder deaktivieren.

- 1 Wählen Sie **Bearbeiten > Bearbeitungsmodus**.
- 2 Tippen Sie zweimal (entspricht Doppelklick) auf das Rechteck, dem eine Aktion hinzugefügt werden soll.
- 3 Wählen Sie in der Optionsgruppe **Aktionen** den Eintrag **Smart3** aus.
- 4 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste **Aktionen > Smart3** eine der folgenden Optionen:

Helligkeit erhöhen	Erhöht die Bildschirmhelligkeit.
Helligkeit verringern	Verringert die Bildschirmhelligkeit.
Standby-Modus	Versetzt das Gerät in den Standby-Modus.
Herunterfahren	Führt das Gerät herunter.
Mikrofon einschalten	Schaltet das Mikrofon des Geräts ein.
Mikrofon ausschalten	Schaltet das Mikrofon des Geräts aus.
Mikrofon umschalten	Wechselt zwischen den Mikrofon-Modi. Ist das Mikrofon eingeschaltet, wird es durch dies Aktion ausgeschaltet. Ist das Mikrofon ausgeschaltet, wird es durch dies Aktion eingeschaltet.

