

Table des matières

Comment utiliser ce manuel d'utilisation	11
Introduction	13
A Spécifications techniques	15
B Règles de sécurité et entretien	17
1 Règles de sécurité	18
2 Housse de protection	19
3 Nettoyage de l'appareil	20
4 Réparations	20
C Démarrage	21
1 Que contient la boîte Smart ?	22
2 Présentation du Smart	23
3 Mise en place de la housse de protection sur le Smart	28
4 Mise en route du Smart	29
5 Charge de l'appareil	29

6	Consultation de l'état de la batterie	30
7	Contrôle de la capacité restante de la batterie	31
8	Utilisation de l'écran tactile	31
9	Travail avec des fichiers	32
10	Saisie d'un texte	33
10.1	Saisie d'un texte	33
10.2	Affichage du clavier à l'écran	34
10.3	Masquage du clavier à l'écran	35
10.4	Saisie de texte à l'aide du clavier à l'écran	35
11	Paramètres généraux	36
11.1	Configuration de la langue du logiciel	36
11.2	Configuration de la synthèse vocale	36
11.3	Réglage de l'heure et de la date	36
11.4	Réglage de la luminosité de l'écran	37
11.5	Réglage du volume général	37
11.6	Rotation de l'écran	38
11.7	Configuration de l'heure d'arrêt du Smart	38
11.8	Masquage de la barre de menu	39
11.9	Restauration de la barre de menu	39
11.10	Configuration des options de démarrage	39
11.11	Configuration de l'enregistrement	40

12	Mise du Smart en mode veille	41
13	Arrêt du Smart	41

D Paramètres spécifiques, sauvegarde et espace de stockage 43

1	Configuration des paramètres spécifiques à l'utilisateur	44
1.1	Sélection	44
1.2	Dictionnaire de prononciation, prédiction de phrases et de mots	44
1.2.1	<i>Le dictionnaire de prononciation</i>	<i>44</i>
1.2.2	<i>Prédiction de mots</i>	<i>45</i>
1.2.3	<i>Prédiction de phrases</i>	<i>45</i>
2	Sauvegarde et espace de stockage	46
2.1	Création d'une sauvegarde du Smart	46
2.2	Restauration d'une sauvegarde sur le Smart	47
2.3	Effacement de la mémoire du Smart	47
2.4	Suppression d'un fichier du Smart	48

E Enregistrement d'un message 49

1	Enregistrement d'un message	50
2	Enregistrement d'un message en Mode enregistrement	50
3	Enregistrement d'un message en Mode souris	51
4	Suppression d'un message du Smart	52

F La caméra 53

1	La caméra	54
2	Prise d'une photo	54
3	Prise d'une photo à insérer dans un carré	54
4	Affichage d'une photo.....	55
5	Suppression d'une photo	55
6	Suppression d'une photo (en effaçant le disque)	56

G Applications personnelles 57

1	L'agenda	58
1.1	Consultation de l'agenda	58
1.2	Ajout d'une alarme.....	59

1.3	Modification d'une alarme.....	60
1.4	Suppression d'une alarme.....	61
1.5	Ajout d'une activité.....	61
1.6	Modification d'une activité.....	63
1.7	Suppression d'une activité.....	65
1.8	Configuration de l'arrière-plan de l'agenda.....	65
2	Le carnet d'adresses.....	66
2.1	Ajout d'un contact.....	66
2.2	Modification d'un contact.....	66
2.3	Suppression d'un contact.....	67

H Connexion avec l'Eddy 69

1	Qu'est-ce que l'Eddy ?	70
2	Bluetooth	70
3	Configuration de l'Eddy	71
4	Recherche de l'Eddy.....	72
5	Connexion à l'Eddy.....	72
6	Déconnexion de l'Eddy	73

I Connexion à l'ordinateur et connexions USB 75

1	Connexion à l'ordinateur	76
2	Connexion de l'appareil à l'ordinateur.....	76
3	Déconnexion de l'appareil de l'ordinateur	76
4	Connexion à un clavier externe	77
5	Connexion d'une souris externe.....	77
6	Connexion d'une clé USB	77

J Passage d'un appel 79

1 Téléphone..... 80

2 Activation du Bluetooth 80

3 Configuration des options téléphoniques du Smart 80

4 Connexion du téléphone au Smart 81

5 Appel d'un numéro de téléphone 82

6 Répondre au téléphone 82

7 Raccrocher 83

K Contrôle de l'environnement 85

1 Contrôle de l'environnement 86

2 Acquisition d'un code infrarouge 86

3 Création d'une sauvegarde des codes infrarouges..... 87

4 Restauration d'une sauvegarde des codes infrarouges 88

L Communication 89

1 Communication..... 90

2 Ajout d'une action Smart spécifique..... 90

3	Ajout d'une action Eddy	91
4	Ajout d'une action de contrôle de l'environnement.	92
5	Ajout d'une action Smart 3 Camera.....	93
6	Ajout d'une action Smart3	94
7	Ajout d'une action de rotation de l'écran	95

M Dépannage **97**

1	Localisation du numéro de série du Smart	98
2	Consultation de la version de Mind Express sur le Smart	98
3	Affichage des bibliothèques de symboles activées	99
4	Dépannage	100

N Annexes **101**

1	Acapela	102
---	---------------	-----

Index **105**

Comment utiliser ce manuel d'utilisation

Ce manuel d'utilisation décrit le Smart. Il a été rédigé pour vous permettre, en tant qu'utilisateur, de trouver rapidement et aisément les informations liées à l'utilisation du Smart et du logiciel Mind Express.

Pour tirer pleinement profit de votre logiciel, nous vous recommandons de lire attentivement le manuel d'utilisation et de vous familiariser avec tous les aspects de l'appareil et du logiciel.

En cas de doutes, n'hésitez pas à contacter Jabbla.

De par l'évolution continue du logiciel, Jabbla n'endosse aucune responsabilité quant aux modifications apportées au contenu ou images depuis la publication de ce manuel d'utilisation. En cas de modifications, aucun droit ne peut être dérivé pour le logiciel déjà fourni.

Jabbla ne peut être tenu responsable des dommages (in)directs, accidentels ou spéciaux résultant de l'utilisation (du contenu) de la documentation. Cette exclusion s'applique à toute réclamation légale, quel que soit le contexte juridique.

Le contenu de ce manuel n'est pas contractuel. Il peut comporter des erreurs.

Toute impression, copie ou reproduction partielle est interdite sans l'accord écrit de Jabbla.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au logiciel si nous considérons qu'elles sont indispensables à son bon fonctionnement.

Dans ce cas, le client n'a pas le droit d'annuler le contrat ni d'exiger l'application des mêmes modifications aux appareils déjà commandés.

Introduction

Le Smart est un petit appareil de communication portable très pratique doté d'un écran dynamique. Il peut prononcer des messages aléatoires par le biais de symboles, de photos ou d'autres images visuelles. Le Smart fonctionne sur une plateforme Windows Mobile et utilise le logiciel Mind Express.

Le Smart est équipé d'un microphone interne haute qualité et d'un amplificateur de son qui permettent de reproduire des messages compilés et/ou choisis, de manière réaliste, forte et intelligible.

Le Smart dispose d'une fonction de prise en charge de la communication. Cet appareil est destiné à une utilisation générale dans la vie quotidienne des personnes (à partir de 3 ans) présentant un trouble de la communication (incapables de parler ou de parler distinctement). Elles doivent également posséder des capacités motrices et mentales suffisantes pour utiliser cet appareil. L'appareil n'est pas destiné à des applications cliniques, thérapeutiques ou diagnostiques. L'appareil est capable d'apprendre des codes infrarouges et de les transmettre pour contrôler d'autres appareils par le biais de l'unité. Cela comprend des appareils d'utilisation générale tels que des appareils audio-visuels et ménagers. Cette extension n'est pas destinée à des applications cliniques, thérapeutiques ou diagnostiques.

Vous trouverez plus d'informations sur la création de fichiers sur le Smart dans le manuel d'utilisation Mind Express fourni avec votre Smart.

Pour un usage optimal de votre Smart, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'utilisation.

A Spécifications techniques

Table 1: Spécifications techniques

Spécification	Explication
Processeur	NVIDIA® Tegra 2 1 GHz
Système d'exploitation	Microsoft Windows® Mobile™ 6.0
Mémoire interne	512 Mo SDRAM + 1 Go FLASH
Écran	Écran tactile WVGA TFT lumineux 4,3 pouces <ul style="list-style-type: none">• 480 x 800 pixels• 262 144 couleurs• Rétro-éclairage LED
USB	1 x USB 2.0 OTG (esclave + maître)
Batterie	Batterie interne
Poids	Appareil 250 g, housse de protection 41 g
Dimensions	<ul style="list-style-type: none">• Appareil : 135 mm x 79 mm x 25 mm• Appareil avec couverture : 140,5 mm x 85 mm x 30 mm

B Règles de sécurité et entretien

1 Règles de sécurité

Son poids limité rend le Smart extrêmement portable et mobile. Nous vous recommandons de toujours utiliser le Smart avec la housse de protection fournie.



L'appareil utilise une batterie Li-ion. Ne jetez pas la batterie avec les ordures lorsque vous la remplacez. Respectez la réglementation de mise au rebut en vigueur dans votre région. Vous pouvez également renvoyer la batterie à votre fournisseur.



Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, stockez-le toujours avec la batterie entièrement chargée. Vérifiez toujours que l'appareil est éteint (appuyez sur le bouton on/off et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes).



Évitez de placer l'appareil à proximité de sources de chaleur ou de zones pouvant devenir particulièrement chaudes. Par exemple, il peut faire très chaud dans une voiture en été. Des températures trop élevées peuvent avoir un effet défavorable sur les performances de la batterie.



Le Smart n'est pas étanche à l'eau mais l'appareil a été conçu de manière à ce que le dessus résiste aux éclaboussures. Au bas de l'appareil, des ouvertures sont prévues pour les haut-parleurs. De l'humidité ou de la saleté risque de pénétrer dans les renforcements des haut-parleurs. Cela peut affecter la qualité des haut-parleurs. Tâchez toujours d'éviter les situations susceptibles d'entraîner la pénétration d'humidité ou de saleté dans les ouvertures des haut-parleurs. Prenez les précautions nécessaires lors du nettoyage de l'appareil et respectez toujours les instructions de nettoyage.



L'appareil peut être utilisé en appliquant votre doigt sur l'écran. Il n'est pas nécessaire d'exercer une force. Par exemple, une légère pression suffit à sélectionner un symbole à l'écran. Vous pouvez également utiliser un stylet ou un objet similaire mais n'utilisez jamais d'objets pointus.



Enregistrer des sons devient très facile avec le Smart. Vous n'avez pas besoin de parler fort lorsque vous enregistrez votre voix. L'appareil amplifiera les enregistrements et les reproduira de la façon la plus naturelle possible. Naturellement, vous pouvez régler le volume. Veillez toujours à ce que le volume reproduit ne soit pas gênant ni nocif pour vous et votre environnement.

2 Housse de protection

Le Smart est doté d'une housse de protection (15) qui assure une protection supplémentaire. La housse de protection rend également l'appareil moins sensible aux chocs et chutes et le protège contre l'humidité et la saleté.



3 Nettoyage de l'appareil

Nettoyez régulièrement l'appareil afin d'éviter la prolifération de bactéries.

Utilisez de préférence un chiffon doux et sec pour ôter la poussière. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer les taches locales sur le boîtier. Veillez à ce qu'aucune humidité ne pénètre dans les trous du haut-parleur, l'ouverture du microphone ou les connecteurs. La saleté présente à proximité des connecteurs peut être nettoyée à l'aide d'un coton.

Utilisez un chiffon sec pour nettoyer l'écran tactile ; n'utilisez pas d'essuie-tout car cela risquerait de causer des rayures microscopiques. Pour ôter la graisse ou les taches présentes sur l'écran, il est recommandé d'utiliser des agents nettoyants spécialement conçus pour nettoyer les écrans (aérosol ou lingettes). N'appuyez pas trop fort sur l'écran pendant le nettoyage.

Il est préférable de nettoyer le Smart à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humide.

4 Réparations

En cas de dommages causés à l'appareil, contactez le distributeur de l'appareil ou le service d'assistance de Jabbla.

Ne tentez en aucun cas de procéder vous-mêmes à des réparations. Cela pourrait endommager davantage l'appareil et annuler la garantie.

C Démarrage

1 Que contient la boîte Smart ?

Le Smart est fourni avec les accessoires suivants :

- housse de protection
- stylet
- alimentation électrique avec prise et câble
- câble USB pour la connexion à un clavier USB, un lecteur de cartes Flash USB, une souris USB
- câble USB pour la connexion à l'ordinateur
- manuel d'utilisation Smart
- Mind Express (manuel du logiciel + de l'appareil)

2 Présentation du Smart



Figure 1: Vue côté gauche du Smart

N°	Identification	Explication
1	Réinitialisation	Ce bouton permet de masquer/afficher le menu et de réinitialiser l'appareil.
2	Port USB	Le port USB peut servir à créer/restaurer une sauvegarde, à se connecter à un ordinateur et un clavier externe ou à brancher une souris.

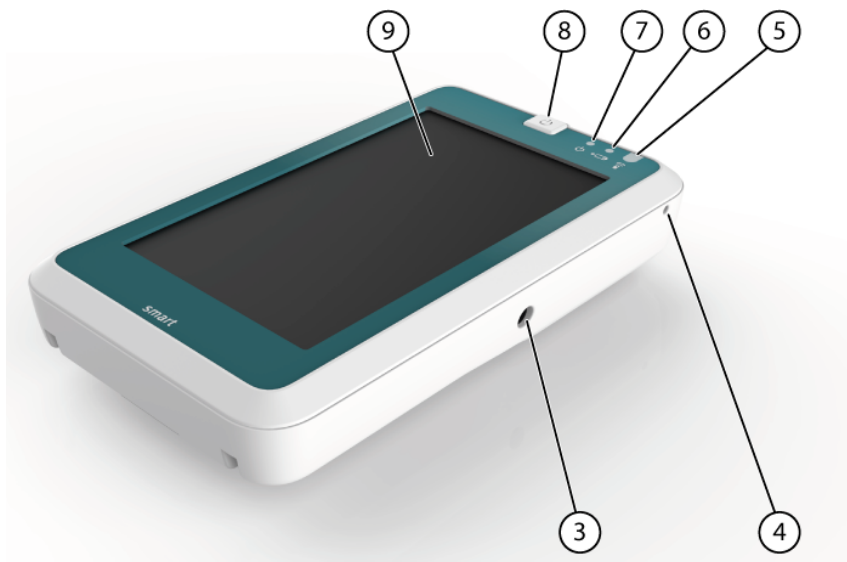


Figure 2: Vue côté droit du Smart

N°	Identification	Explication
3	Prise de l'alimentation électrique	Cette prise permet de charger l'appareil à l'aide de l'adaptateur électrique fourni.
4	Ouverture du microphone	Il s'agit de l'ouverture du microphone qui permet au son d'atteindre le microphone interne de l'appareil lors de l'enregistrement.
5	Récepteur infrarouge	Le récepteur infrarouge sert à acquérir les codes infrarouges.

N°	Identification	Explication
6	Indicateur de charge de la batterie	L'indicateur de charge de la batterie s'allume dès que l'appareil est branché sur le secteur à l'aide de l'adaptateur électrique fourni. Le voyant est orange pendant la charge. Il passe au vert une fois que la batterie est chargée.
7	Indicateur on/off	L'indicateur on/off indique l'état de l'appareil : <ul style="list-style-type: none">• l'indicateur est éteint : l'appareil est éteint• rouge : la capacité de la batterie se situe entre 0 % et 29 %• orange : la capacité de la batterie se situe entre 30 % et 50 %• vert : la capacité de la batterie se situe entre 51 % et 100 %
8	Bouton on/off	Il vous permet d'allumer/d'éteindre l'appareil ou de le mettre en veille.
9	Écran tactile	L'appareil est équipé d'un écran tactile de 4,3 pouces.

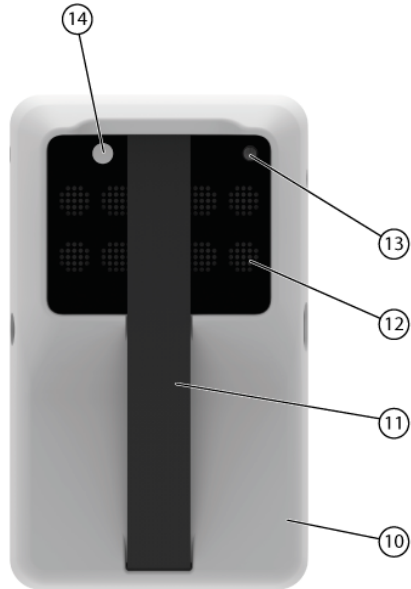


Figure 3: Vue arrière du Smart

N°	Identification	Explication
10	Housse de protection	La housse de protection rend l'appareil moins sensible aux chocs et chutes et le protège contre l'humidité et la saleté.
11	Sangle	La sangle permet de tenir fermement l'appareil dans la main.
12	Haut-parleurs	L'appareil est doté de plusieurs haut-parleurs puissants.
13	Transmetteur infrarouge	Il transmet les signaux infrarouges vers d'autres appareils.
14	Caméra	L'appareil est équipé d'une caméra pour prendre des photos.

3 Mise en place de la housse de protection sur le Smart

Le Smart est doté d'une housse de protection (15) qui assure une protection supplémentaire. La housse de protection rend également l'appareil moins sensible aux chocs et chutes et le protège contre l'humidité et la saleté.

- 1 Positionnez le Smart avec la sangle orientée vers le haut.



- 2 Défaites la fixation (11b) de la sangle.
- 3 Insérez la fixation (11b) dans l'ouverture allongée de la housse de protection.
- 4 Insérez la section inférieure de la sangle (11a) dans l'ouverture allongée de la housse de protection.
- 5 Sur la partie basse du Smart, appuyez sur la housse de protection tout en tenant les 2 parties (11a et 11b).
- 6 Maintenez la partie supérieure de la sangle (11c) tout en appuyant sur la partie supérieure de la housse de protection du Smart.
- 7 Attachez la fixation (11b) sur la partie supérieure de la sangle (11c).
- 8 Faites pivoter le Smart et vérifiez que la housse de protection est bien fixée autour du Smart.

4 Mise en route du Smart

Appuyez sur le bouton on/off (8) du Smart.

Si le Smart était en veille, vous pouvez l'utiliser immédiatement.
Si le Smart était éteint, le Mind Express doit d'abord se charger.

VOIR AUSSI:

"Arrêt du Smart" à la page 41
"Mise du Smart en mode veille" à la page 41

5 Charge de l'appareil

La durée d'utilisation de l'appareil sans charge dépend en grande partie des facteurs suivants :

- le volume audio
- l'heure d'arrêt configurée
- l'utilisation du Bluetooth

Si le Smart est utilisé fréquemment, il est recommandé de le recharger chaque jour. Pour cela, utilisez uniquement l'adaptateur électrique fourni. L'appareil peut continuer à être utilisé pendant la charge.


- 1 Vérifiez la capacité restante de la batterie.
- 2 Branchez le câble d'alimentation fourni entre l'appareil et l'ordinateur.

L'indicateur de charge de la batterie s'allume et reste orange pendant la charge. Une fois la batterie entièrement chargée, le voyant devient vert.

6 Consultation de l'état de la batterie

- 1 Localisez l'indicateur on/off sur l'appareil.
- 2 L'indicateur on/off peut présenter les couleurs suivantes :

Vert	Capacité de la batterie entre 51 % et 100 %
Orange	Capacité de la batterie entre 30 % et 50 %
Rouge	Capacité de la batterie entre 0 % et 29 %

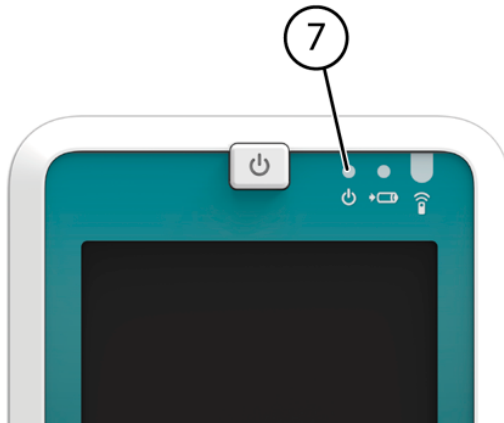

7 Contrôle de la capacité restante de la batterie

- 1 Sélectionnez **Outils > Batterie**.
- 2 Consultez l'état de la batterie :
 - **Sur batterie**, l'appareil utilise la batterie.
 - **En charge**, l'appareil est branché sur l'adaptateur fourni et est en charge.
- 3 Vérifiez la capacité restante de la batterie.
- 4 Si la capacité restante est inférieure à 30 % (ou que l'indicateur on/off est rouge), nous vous recommandons de charger l'appareil.

8 Utilisation de l'écran tactile

L'écran tactile permet de sélectionner aisément les cases. Pour cela, vous pouvez utiliser votre doigt (ongle) ou un stylet. La pression exercée sur l'écran pour sélectionner un élément avec le doigt doit être légèrement plus forte qu'avec un stylet.

Le mode de sélection à l'écran peut être paramétré par l'utilisateur. Consultez le manuel d'utilisation Mind Express.



Vérifiez que le film de protection a été retiré de l'appareil.



N'utilisez pas d'outils pointus afin d'éviter de rayer l'écran tactile.



Assurez-vous que l'écran tactile n'entre pas en contact avec de l'eau.



L'écran tactile est automatiquement désactivé lorsque l'appareil passe en mode veille ou si un utilisateur sélectionne la veille.

Appliquez les techniques suivantes pour utiliser l'écran tactile :

- Pression : touchez une fois une case avec votre doigt ou le stylet pour la sélectionner.
- Effleurement (et maintien) : utilisez votre doigt ou le stylet pour toucher une case et maintenir la pression plus longtemps qu'à l'accoutumée pour sélectionner la case.
- Glissement/déplacement : touchez avec votre doigt ou le stylet et faites-le glisser vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour déplacer des éléments (en Mode modifier ou en Mode de souris).



La possibilité de faire un glissement/déplacement dans un tableau de communication peut être paramétrée dans Mind Express.

9 Travail avec des fichiers

Le Smart utilise Mind Express 4.

Vous pouvez créer de nouveaux fichiers et ouvrir, modifier et enregistrer des fichiers existants.



Pour savoir comment travailler avec des fichiers, consultez le manuel d'utilisation Mind Express.



Il est plus aisé de créer et modifier des fichiers sur un ordinateur à l'aide de Mind Express puis de les transférer sur le Smart via une connexion USB que de créer et modifier les fichiers directement sur le Smart.

10 Saisie d'un texte

10.1 Saisie d'un texte

Si vous avez besoin de saisir un texte dans une boîte de dialogue, vous pouvez utiliser le clavier affiché à l'écran. Vous avez le choix parmi quatre claviers.

Input Panel															
Esc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	=	←		
Tab	q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	[]	\		
Caps Lock	a	s	d	f	g	h	j	k	l	;	'	↵			
Shift	z	x	c	v	b	n	m	,	.	/	↑	àù	pgup		
Ctrl	Alt	`						ins	del	←	↓	→	pgdn		

Figure 4: Clavier à l'écran standard

Input Panel															
Esc	!	@	#	\$	%	^	&	*	()	_	+	←		
Tab	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	{	}			
Caps Lock	A	S	D	F	G	H	J	K	L	:	"	↵			
Shift	Z	X	C	V	B	N	M	<	>	?	↑	àù	Home		
Ctrl	Alt	~						ins	del	←	↓	→	End		

Figure 5: Clavier à l'écran avec Caps Lock activé


Input Panel													
Esc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	ı	ı	←
Tab	æ	à	á	â	ã	ä	å	è	é	ê	ë	ç	ñ
Caps Lock	œ	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	↵
Shift	ß	ù	ú	û	ü	ý	ÿ	ð	ş	ž	↑	àú	pgup
Ctrl	Alt	€					ins	del	←	↓	→	pgdn	

Figure 6: Clavier à l'écran avec caractères spéciaux activés


Input Panel													
Esc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	°	µ	←
Tab	Æ	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	È	É	Ê	Ë	Ç	Ñ
Caps Lock	Œ	İ	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	↵
Shift	ß	Ù	Ú	Û	Ü	Ý	ÿ	Ð	Ş	Ž	↑	àú	Home
Ctrl	Alt	£					ins	del	←	↓	→	End	

Figure 7: Clavier à l'écran avec caractères spéciaux et Caps Lock activés

10.2 Affichage du clavier à l'écran

1 Appuyez sur  dans la barre de menu en bas à droite pour afficher le clavier à l'écran.



L'icône  n'est visible que si une boîte de dialogue comportant un champ de texte modifiable est activée.


2 Dans la barre de titre, appuyez sur la boîte de dialogue **Input Panel** et faites-la glisser jusqu'à l'endroit souhaité à l'écran.

VOIR AUSSI:

"Masquage du clavier à l'écran" à la page 35

"Saisie de texte à l'aide du clavier à l'écran" à la page 35

10.3 Masquage du clavier à l'écran

- 1 Appuyez sur  dans la barre de menu en bas à droite pour masquer le clavier à l'écran.

VOIR AUSSI:

"Affichage du clavier à l'écran" à la page 34

10.4 Saisie de texte à l'aide du clavier à l'écran

Pour saisir du texte dans une boîte de dialogue, vous pouvez utiliser un champ de texte modifiable.

- 1 Affichez le clavier à l'écran.
- 2 Appuyez sur le champ de texte modifiable.
- 3 Appuyez sur les touches du clavier pour saisir le texte.



Appuyez sur Caps Lock pour saisir des majuscules et/ou d'autres caractères. Appuyez sur àü pour saisir des caractères spéciaux.

VOIR AUSSI:

"Affichage du clavier à l'écran" à la page 34

11 Paramètres généraux

11.1 Configuration de la langue du logiciel

La langue du logiciel ou de l'interface peut être adaptée à la langue de l'utilisateur.



Pour configurer la langue du logiciel, consultez le manuel d'utilisation Mind Express.

11.2 Configuration de la synthèse vocale


Les messages que vous affectez aux carrés du tableau de communication sont prononcés à voie haute par la sortie vocale de l'appareil. À vous de déterminer les caractéristiques de la synthèse vocale, telles que la langue, la voix, le volume de la voix, le volume général et le débit de parole.



Pour configurer la synthèse vocale, consultez le manuel d'utilisation Mind Express.

11.3 Réglage de l'heure et de la date

Le Smart peut prononcer l'heure, le jour et la date. Veillez donc à ce que l'heure et la date soient correctement réglées.

- 1 Sélectionnez **Outils > Date / Heure**.
- 2 Dans le champ **Heure**, appuyez sur l'heure et utilisez les flèches pour la régler. Faites de même avec les minutes et les secondes.
- 3 Appuyez sur le bouton  dans le champ **Date** et sélectionnez la date du jour sur le calendrier.

- 4 Dans le menu déroulant **Format de l'heure**, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **24h (15:30)**, l'heure est affichée au format 24 heures.
 - **12h (3:30)**, l'heure est affichée au format 12 heures.
 - **AM/PM (3:30 PM)**, l'heure est affichée avec une indication AM (matin) et PM (après-midi).
- 5 Appuyez sur **OK**.

11.4 Réglage de la luminosité de l'écran

- 1 Sélectionnez **Outils > Smart3 > Configuration**.
- 2 À côté de **Luminosité**, faites glisser le curseur jusqu'à ce que l'écran atteigne la luminosité souhaitée.
- 3 Appuyez sur **OK**.

11.5 Réglage du volume général

Le volume général de l'appareil détermine le volume de la sortie de synthèse vocale mais également le volume des sons du système (son émis lorsque vous appuyez sur l'écran).

- 1 Sélectionnez **Outils > Options**.
- 2 Effectuez l'une des actions suivantes dans la boîte de dialogue **Options** :
 - faites glisser le curseur vers la gauche pour réduire le volume
 - faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter le volume
- 3 Appuyez sur **OK**.



Le volume général peut également être réglé dans Synthèse vocale.

11.6 Rotation de l'écran

L'écran peut être affiché au format portrait et paysage.

- 1 Sélectionnez **Outils > Pivoter l'aperçu**.
- 2 Pour pivoter à nouveau l'écran, répétez l'étape 1.

11.7 Configuration de l'heure d'arrêt du Smart

Le Smart peut s'éteindre automatiquement.

Par exemple : vous pouvez spécifier que le Smart s'éteigne automatiquement après 5 heures en mode veille.

- 1 Sélectionnez **Outils > Smart3 > Configuration**.
- 2 Dans le menu déroulant **Éteindre après : (après être mis en mode veille)**, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Jamais**
 - **5 heures**
 - **10 heures**
 - **20 heures**
 - **25 heures**
- 3 Appuyez sur **OK**.

11.8 Masquage de la barre de menu

Vous pouvez masquer la barre de menu pour empêcher l'utilisateur de modifier des paramètres.

Sélectionnez **Outils > Cacher menu**.

VOIR AUSSI:

"Restauration de la barre de menu" à la page 39

11.9 Restauration de la barre de menu

La barre de menu doit s'afficher si vous voulez procéder à des réglages sur l'appareil. Si la barre de menu n'apparaît pas, vous devez la restaurer.

Procédez comme suit pour restaurer la barre de menu :

- 1 Utilisez un stylo à bille pour enfoncer le bouton de réinitialisation.
- 2 Si un mot de passe est configuré pour afficher la barre de menu, la boîte de dialogue **Mot de passe** s'affiche. Saisissez le mot de passe puis cliquez sur **OK**.

La barre de menu s'affiche en bas de l'écran.

VOIR AUSSI:

"Masquage de la barre de menu" à la page 39

11.10 Configuration des options de démarrage

Vous pouvez configurer le mode dans lequel Mind Express démarre ; vous pouvez choisir si le menu doit s'afficher, ou si l'accès au menu doit être protégé par un mot de passe et le document qui doit apparaître au lancement.



Pour configurer les options de démarrage, consultez le manuel d'utilisation Mind Express.

11.11 Configuration de l'enregistrement



Pour configurer l'enregistrement, consultez le manuel d'utilisation Mind Express.

12 Mise du Smart en mode veille

Le mode veille est un mode dans lequel le Smart n'est pas complètement éteint et peut aisément être redémarré.



Placez l'appareil en mode veille si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une courte période. L'appareil consomme moins d'énergie que s'il reste allumé. Arrêtez l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.

Exécutez l'une des actions suivantes :

- Sélectionnez **Outils > Smart3 > Mode veille**.
- Appuyez sur le bouton on/off.

VOIR AUSSI:

"Mise en route du Smart" à la page 29

13 Arrêt du Smart

Si vous n'utilisez pas le Smart pendant une période prolongée, il est préférable d'arrêter le Smart.

Exécutez l'une des actions suivantes :

- Sélectionnez **Outils > Smart3 > Éteindre**.
- Appuyez sur le bouton on/off pendant au moins 4 secondes.

VOIR AUSSI:

"Mise en route du Smart" à la page 29

D Paramètres spécifiques, sauvegarde et espace de stockage

1 Configuration des paramètres spécifiques à l'utilisateur

1.1 Sélection

Un grand nombre de paramètres permettent de personnaliser les sélections pour répondre aux besoins de l'utilisateur. Une sélection peut s'afficher dans une couleur spécifique, elle peut être agrandie, effectuée après la pression ou le relâchement, une sélection dwell peut être configurée, etc. Il est même possible de jouer un son après la sélection et d'afficher un retour audible lors de la sélection.



Pour configurer les méthodes de sélection consultez le manuel d'utilisation Mind Express.

1.2 Dictionnaire de prononciation, prédiction de phrases et de mots

1.2.1 Le dictionnaire de prononciation

Il peut arriver que certains mots ne soient pas prononcés correctement. Par exemple, des noms ou mots d'une autre langue. Vous pouvez ajouter le mot et sa nouvelle prononciation à un dictionnaire de prononciation. Vous pouvez ajouter plusieurs dictionnaires de prononciation :

- dictionnaires de prononciation par langue
- dictionnaires de prononciation par utilisateur, si l'appareil est utilisé par plusieurs personnes
- dictionnaires de prononciation par voix. Le format phonétique peut différer selon la voix.



Pour savoir comment utiliser le dictionnaire de prononciation, consultez le manuel d'utilisation Mind Express.



La configuration du dictionnaire de prononciation doit se faire directement sur le Smart. Il n'est pas possible d'importer un dictionnaire de prononciation !

1.2.2 Prédiction de mots

Si l'utilisateur est en mesure d'utiliser du texte, la prédiction de mots peut considérablement accroître la vitesse de communication. Vous pouvez configurer Mind Express de manière à ce que ces prédictions apparaissent dans les carrés. Cela permet à l'utilisateur de sélectionner ces prédictions afin de saisir des phrases plus rapidement. Dès que l'utilisateur sélectionne une lettre ou un mot dans le tableau de communication, les prédictions apparaissent dans les carrés de prédiction.

La prédiction de mots s'appuie sur le contexte. Cela signifie que la prédiction de mots tente non seulement de prédire le mot formé, mais également le suivant.



Pour savoir comment utiliser la prédiction de mots, consultez le manuel d'utilisation Mind Express.



La configuration de la prédiction de mots doit se faire directement sur le Smart. Il n'est pas possible d'importer une liste de prédiction de mots !

1.2.3 Prédiction de phrases

Si l'utilisateur est en mesure d'utiliser du texte, la prédiction de phrases peut considérablement accroître la vitesse de communication. Vous pouvez configurer Mind Express de manière à ce que ces prédictions apparaissent dans les carrés. Cela permet à l'utilisateur de les sélectionner. Dès que l'utilisateur sélectionne une lettre ou un mot dans le tableau de communication, les prédictions apparaissent dans les carrés de prédiction de Mind Express. La prédiction de phrases recherche des phrases. Si vous saisissez le mot "thé", la prédiction de phrases donnera par exemple la phrase "J'aimerais boire une tasse de thé".



Lorsque vous utilisez Mind Express pour la première fois, la prédiction de phrases est vide.



Pour savoir comment utiliser la prédiction de phrases, consultez le manuel d'utilisation Mind Express.




La configuration de la prédiction de phrases doit se faire directement sur le Smart. Il n'est pas possible d'importer une liste de prédiction de phrases !

2 Sauvegarde et espace de stockage

2.1 Création d'une sauvegarde du Smart

Vous pouvez effectuer une sauvegarde du contenu du Smart sur une clé USB. En cas de problèmes avec le Smart, une sauvegarde peut être restaurée, à partir de la clé USB, sur le Smart

- 1 Branchez la clé USB sur le Smart.
- 2 Sélectionnez **Outils > Smart3 > Copier le disque sur USB**.
- 3 Appuyez sur le champ **Saisir nom**.
- 4 En bas à droite, appuyez sur  pour activer le clavier à l'écran.
- 5 Appuyez une nouvelle fois sur le champ **Saisir nom**.
- 6 Appuyez sur le clavier affiché à l'écran pour saisir le nom de la sauvegarde.

EXEMPLE: sauvegarde juin

- 7 Appuyez sur **OK**.
- 8 Appuyez sur **Oui** dans la boîte de dialogue **Copier le disque sur USB**.

La création de la sauvegarde démarre. Cela peut prendre quelques minutes jusqu'à ce que la boîte de dialogue **Sauvegarde sur clé USB accomplie avec succès**.

- 9 Appuyez sur **OK**.

VOIR AUSSI:

"Restauration d'une sauvegarde sur le Smart" à la page 47

2.2 Restauration d'une sauvegarde sur le Smart

En cas de problèmes avec le Smart, une sauvegarde peut être restaurée, à partir de la clé USB, sur le Smart

- 1 Branchez la clé USB sur le Smart à l'aide du câble adaptateur USB fourni.
- 2 Insérez la pointe d'un stylo à bille dans le trou de réinitialisation et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes minimum.
- 3 Appuyez sur le bouton on/off.
La boîte de dialogue **Restore Files** s'affiche.
- 4 Appuyez sur **Oui** pour restaurer une sauvegarde.
- 5 Sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez restaurer.
- 6 Si besoin, sélectionnez d'abord l'option **Format drive first, then restore**, si une sauvegarde précédente n'ayant pas cette option sélectionnée n'a pas donné de bons résultats.
- 7 Appuyez sur **OK**.

VOIR AUSSI:

"Création d'une sauvegarde du Smart" à la page 46

2.3 Effacement de la mémoire du Smart

Si vous créez plusieurs enregistrements sonores dans un même carré, les fichiers wave inutilisés sont quand même enregistrés dans la mémoire du Smart. Cela implique que la mémoire de stockage du Smart peut être pleine.

- 1 Sélectionnez **Outils > Smart3 > Nettoyer le disque**.
- 2 Appuyez sur **Nettoyage**.
- 3 Appuyez sur **Oui**.
La mémoire est effacée. Vous pouvez voir l'espace libre disponible dans la boîte de dialogue **Nettoyer le disque**.
- 4 Appuyez sur **OK**.

VOIR AUSSI:

"Suppression d'un fichier du Smart" à la page 48



- D Paramètres spécifiques, sauvegarde et espace de stockage
- 2 Sauvegarde et espace de stockage

2.4 Suppression d'un fichier du Smart

Les documents, modèles, chiffres, sons et la musique peuvent tous être effacés de la mémoire du Smart.

- 1 Sélectionnez **Outils > Smart3 > Nettoyer le disque**.
- 2 Appuyez sur **Gérer les fichiers**.
- 3 Dans le menu déroulant **Type**, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Documents**
 - **Modèles**
 - **Images**
 - **Sons**
 - **Musique**
- 4 Dans le menu déroulant, sélectionnez **Dossier**, si nécessaire un dossier ou un sous-dossier.
- 5 Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez supprimer.



Si nécessaire, appuyez sur  pour trier les fichiers par ordre alphabétique, sinon appuyez sur  pour trier les fichiers par taille de fichier (de la plus grande à la plus petite).

- 6 Appuyez sur **Supprimer fichiers**.
- 7 Appuyez sur **Oui** dans la boîte de dialogue **Supprimer fichier**.
- 8 Appuyez sur **Fermer**
- 9 Appuyez sur **OK**.

VOIR AUSSI:

"Effacement de la mémoire du Smart" à la page 47

E Enregistrement d'un message

1 Enregistrement d'un message


Vous pouvez utiliser l'appareil pour enregistrer votre message vocal ou un son puis l'enregistrer dans une case. Vous pouvez créer un enregistrement en Mode enregistrement, en Mode de souris et en Mode modifier.

2 Enregistrement d'un message en Mode enregistrement

1 Sélectionnez **Modifier > Mode enregistrement**.

2 Appuyez sur la case dans laquelle vous souhaitez ajouter un message.


La boîte de dialogue **Enregistrement** s'affiche.

3 Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant toute la durée de l'enregistrement.





Pendant l'enregistrement, parlez sur un ton et à un volume normaux. Tenez-vous à 30 centimètres environ de l'appareil.

4 Relâchez le bouton pour arrêter l'enregistrement.

5 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement. Répétez les opérations à partir de l'étape 3 si l'enregistrement ne vous convient pas.

6 Exécutez l'une des actions suivantes :

- Appuyez sur  pour enregistrer l'enregistrement dans la case sélectionnée.
- Appuyez sur  pour supprimer l'enregistrement.


VOIR AUSSI:

"Enregistrement d'un message en Mode souris" à la page 51

3 Enregistrement d'un message en Mode souris




- 1 Vérifiez que l'enregistrement est défini sur **Enregistrement rapide**. Sélectionnez **Outils > Options**.
- 2 Appuyez sur la case dans laquelle vous souhaitez ajouter le message et maintenez la pression jusqu'à ce que la boîte de dialogue **Enregistrement** apparaisse.

La durée nécessaire de maintien de la pression sur la case est indiquée dans les options.

- 3 Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant toute la durée de l'enregistrement.



Pendant l'enregistrement, parlez sur un ton et à un volume normaux. Tenez-vous à 30 centimètres environ de l'appareil.

- 4 Relâchez le bouton pour arrêter l'enregistrement.
- 5 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement. Répétez les opérations à partir de l'étape 3 si l'enregistrement ne vous convient pas.
- 6 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur  pour enregistrer l'enregistrement dans la case sélectionnée.
 - Appuyez sur  pour supprimer l'enregistrement.

VOIR AUSSI:



"Enregistrement d'un message en Mode enregistrement" à la page 50

4 Suppression d'un message du Smart

Un enregistrement sonore effectué avec le Smart peut être supprimé de la mémoire du Smart.

- 1 Sélectionnez **Outils > Smart3 > Nettoyer le disque**.
- 2 Appuyez sur **Gérer les fichiers**.
- 3 Sélectionnez **Sons** dans le menu déroulant **Type**.
- 4 Sélectionnez **Rec** dans le menu déroulant **Dossier**.
- 5 Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez supprimer.



Si nécessaire, appuyez sur  pour trier les fichiers par ordre alphabétique, sinon appuyez sur  pour trier les fichiers par taille de fichier (de la plus grande à la plus petite).

- 6 Appuyez sur **Supprimer fichiers**.
- 7 Appuyez sur **Oui** dans la boîte de dialogue **Supprimer fichier**.
- 8 Appuyez sur **Fermer**.
- 9 Appuyez sur **OK**.



F La cámara

1 La caméra

Le Smart est équipé d'une caméra. La caméra vous permet de prendre des photos mais pas d'enregistrer des vidéos. Les photos sont automatiquement enregistrées et peuvent être utilisées dans le tableau de communication.

2 Prise d'une photo

Le Smart vous permet de prendre une photo si le tableau de communication comporte un carré renfermant l'action **Prendre photo**.

- 1 Appuyez sur le carré dans le tableau de communication.
- 2 Pointez l'objectif de la caméra sur le sujet et attendez que l'image devienne nette.
- 3 Appuyez sur  pour prendre une photo.
- 4 Répétez l'étape 4 pour prendre d'autres photos.
- 5 Appuyez sur  pour revenir au tableau de communication.






Utilisez les carrés Photo précédente, Photo suivante pour visualiser les photos que vous avez prises. Si besoin, utilisez le carré Supprimer photo pour supprimer une photo.


3 Prise d'une photo à insérer dans un carré

Vous pouvez insérer une photo prise avec l'appareil dans un carré d'un tableau de communication.

- 1 Ouvrez le fichier du tableau de communication pour insérer une photo prise dans un ou plusieurs carrés.
- 2 Sélectionnez **Modifier > Mode photo**.
- 3 Appuyez sur le carré dans le tableau de communication.

- 4 Pointez l'objectif de la caméra sur le sujet et attendez que l'image devienne nette.
- 5 Appuyez sur  pour prendre une photo.
- 6 Vérifiez la photo que vous avez prise et effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur  pour enregistrer la photo dans l'appareil.
 - Appuyez sur  pour supprimer la photo de l'appareil.



Pour revenir au tableau de communication sans utiliser de photo, appuyez sur .

4 Affichage d'une photo

- 1 Sélectionnez **Fichier > Ouvrir**.
- 2 Ouvrez un tableau de communication conçu pour visualiser des photos.
- 3 Affichez les photos.



Si besoin, appuyez sur les carrés Photo précédente, Photo suivante pour visualiser les photos que vous avez prises. Si besoin, appuyez sur le carré Supprimer photo pour supprimer une photo.

5 Suppression d'une photo



- 1 Sélectionnez **Fichier > Ouvrir**.
- 2 Ouvrez un tableau de communication conçu pour visualiser des photos.
- 3 Appuyez sur les carrés **Photo précédente** et/ou **Photo suivante** jusqu'à accéder aux photos que vous souhaitez supprimer.
- 4 Appuyez sur le carré **Supprimer photo**.

6 Suppression d'une photo (en effaçant le disque)

Vous pouvez supprimer une photo prise avec le Smart de la mémoire du Smart. Les photos prises par l'utilisateur à l'aide d'un tableau de communication (par exemple avec le fichier fourni par défaut *app_caméra_smart*) sont enregistrées dans le dossier **Smart3Camera**. Les photos prises par le superviseur pour remplir les carrés du tableau de communication sont enregistrées dans le dossier **Smart3Pictures**.

- 1 Sélectionnez **Outils > Smart3 > Nettoyer le disque**.
- 2 Appuyez sur **Gérer les fichiers**.
- 3 Sélectionnez **Images** dans le menu déroulant **Type**.
- 4 Sélectionnez le dossier **Smart3Camera** ou le dossier **Smart3Pictures** dans le menu déroulant **Dossier**.
- 5 Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez supprimer.



Si nécessaire, appuyez sur  pour trier les fichiers par ordre alphabétique, sinon appuyez sur  pour trier les fichiers par taille de fichier (de la plus grande à la plus petite).

- 6 Appuyez sur **Supprimer fichiers**.



Si vous supprimez une photo utilisée dans un tableau de communication, cette photo ne sera plus affichée dans le tableau de communication !

- 7 Appuyez sur **Oui** dans la boîte de dialogue **Supprimer fichier**.
- 8 Appuyez sur **Fermer**
- 9 Appuyez sur **OK**.

G Applications personnelles

1 L'agenda

Cet appareil vous permet d'organiser vos rendez-vous dans votre agenda. Vous pouvez également utiliser l'agenda pour ajouter des alarmes. Par exemple, pour vous rappeler l'anniversaire de vos amis et membres de votre famille.

1.1 Consultation de l'agenda

- 1 Sélectionnez **Outils > Agenda > Modifier l'agenda**.
- 2 Sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu déroulant **Afficher** :
 - **Par jour**
 - **Semaine**
 - **Mois**
- 3 Dans la 2e liste déroulante, sélectionnez la date que vous souhaitez afficher.
- 4 Appuyez sur **OK**.

1.2 Ajout d'une alarme

- 1 Sélectionnez **Outils > Agenda > Ajouter alarme**.
- 2 Dans la liste déroulante **Quand**, sélectionnez la fréquence de l'alarme :
 - **À une seule reprise**
 - **Chaque jour**
 - **Chaque jour ouvrable**
 - **Chaque semaine**
 - **Chaque mois**
 - **Chaque année**
- 3 Dans le champ **À**, indiquez l'heure de l'alarme. Pour cela, utilisez les flèches.
- 4 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Pour une alarme unique, appuyez sur dans le champ du dessous et sélectionnez la date de l'alarme.
 - Pour une alarme répétée, dans **Date de début**, appuyez sur pour sélectionner la date à laquelle le rendez-vous commence et dans **Date de fin**, appuyez sur pour sélectionner la date à laquelle le rendez-vous prend fin.
- 5 Dans le champ **SMS**, saisissez le texte de l'alarme.
- 6 Sélectionnez l'option **Lire** si vous voulez que le message soit prononcé à voix haute.
- 7 Sélectionnez l'option **Afficher message** si vous voulez que le message s'affiche sur l'appareil.
- 8 Pour ajouter un son à l'alarme, appuyez sur en regard de **Son**, sélectionnez un son et appuyez sur **Ouvrir**.
- 9 Appuyez sur **Enregistrer**.


1.3 Modification d'une alarme

- 1 Sélectionnez **Outils > Agenda > Modifier l'agenda**.
- 2 Sélectionnez l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 3 Appuyez sur **Modifier**.
- 4 Si besoin, modifiez la fréquence de répétition de l'alarme dans le menu déroulant **Quand** :
 - **À une seule reprise**
 - **Chaque jour**
 - **Chaque jour ouvrable**
 - **Chaque semaine**
 - **Chaque mois**
 - **Chaque année**
- 5 Si besoin, modifiez l'heure de l'alarme dans le champ **À**. Pour cela, utilisez les flèches.
- 6 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Pour une alarme unique, appuyez sur dans le champ du dessous et sélectionnez la date de l'alarme.
 - Pour une alarme répétée, dans **Date de début**, appuyez sur pour sélectionner la date à laquelle le rendez-vous commence et dans **Date de fin**, appuyez sur pour sélectionner la date à laquelle le rendez-vous prend fin.
- 7 Si besoin, modifiez le texte de l'alarme dans le champ **SMS**.
- 8 Si besoin, modifiez l'option **Lire** si vous voulez que le message soit prononcé à voix haut ou non.
- 9 Si besoin, modifiez l'option **Afficher message** si vous voulez que le message s'affiche sur l'appareil ou non.
- 10 Si besoin, modifiez le son de l'alarme en appuyant sur en regard de **Son**, sélectionnant un son et en appuyant sur **Ouvrir**.
- 11 Appuyez sur **Enregistrer**.
- 12 Appuyez sur **OK**.

1.4 Suppression d'une alarme


- 1 Sélectionnez **Outils > Agenda > Modifier l'agenda**.
- 2 Sélectionnez l'alarme que vous souhaitez supprimer.
- 3 Appuyez sur **Modifier**.
- 4 Appuyez sur **Supprimer** dans la boîte de dialogue **Éditeur d'alarme**.
- 5 Appuyez sur **OK**.



1.5 Ajout d'une activité

- 1 Sélectionnez **Outils > Agenda > Modifier l'agenda**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter**.
- 3 Dans le champ **Activité**, indiquez le nom de l'activité ou du rendez-vous.
- 4 À côté du champ **Illustration**, appuyez sur  pour ajouter une image à l'activité.
- 5 Utilisez le menu déroulant de la boîte de dialogue **Symbole** pour trouver l'image, sélectionnez-la puis appuyez sur **OK**.
- 6 Dans la liste déroulante **Quand**, sélectionnez la fréquence de l'activité :
 - **À une seule reprise**
 - **Chaque jour**
 - **Chaque jour ouvrable**
 - **Chaque semaine**
 - **Chaque mois**
 - **Chaque année**

- 7 Dans le champ **Durée**, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Journée entière**
 - **De À**
- 8 Si vous avez sélectionné l'option **De À**, indiquez l'heure de début et l'heure de fin de l'activité dans les champs **De** et **Jusque**. Appuyez sur les chiffres des heures et utilisez les flèches pour les régler. Appuyez sur les chiffres des minutes et utilisez les flèches pour les régler.
- 9 Si besoin, sélectionnez l'option **Alarme** si vous souhaitez être averti lorsque l'activité démarre ou avant qu'elle ne démarre.
- 10 Sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu déroulant **Alarme** :
 - **Lors du démarrage**
 - **5 minutes avant le début**
 - **15 minutes avant le début**
 - **30 minutes avant le début**
 - **1 heure avant le début**
 - **2 heures avant le début**
 - **1 jour avant le début**
- 11 Appuyez sur pour régler l'alarme.
- 12 Dans le champ **SMS**, saisissez le texte de l'alarme.
- 13 Sélectionnez l'option **Lire** si vous voulez que le message soit prononcé à voix haute.
- 14 Sélectionnez l'option **Afficher message** si vous voulez que le message s'affiche sur l'appareil.
- 15 Pour ajouter un son à l'alarme, appuyez sur en regard de **Son**, sélectionnez un son et appuyez sur **Ouvrir**.
- 16 Appuyez sur **OK**.
- 17 Appuyez sur **Enregistrer**.
- 18 Appuyez sur **OK**.

1.6 Modification d'une activité

- 1 Sélectionnez **Outils > Agenda > Modifier l'agenda**.
- 2 Sélectionnez l'activité que vous souhaitez modifier.
- 3 Appuyez sur **Modifier**.
- 4 Si besoin, indiquez le nom de l'activité ou du rendez-vous dans le champ **Activité**.
- 5 À côté du champ **Illustration**, appuyez si besoin sur  pour ajouter une image à l'activité ou modifier l'image de l'activité.
- 6 Utilisez le menu déroulant de la boîte de dialogue **Symbole** pour trouver l'image, sélectionnez-la puis appuyez sur **OK**.
- 7 Le cas échéant, changez la fréquence de l'activité dans le menu déroulant **Quand** :
 - **À une seule reprise**
 - **Chaque jour**
 - **Chaque jour ouvrable**
 - **Chaque semaine**
 - **Chaque mois**
 - **Chaque année**
- 8 Si besoin, modifiez l'une des options suivantes dans le champ **Durée** :
 - **Journée entière**
 - **De À**
- 9 Si vous avez sélectionné l'option **De À**, indiquez l'heure de début et l'heure de fin de l'activité dans les champs **De** et **Jusque**. Appuyez sur les chiffres des heures et utilisez les flèches pour les régler. Appuyez sur les chiffres des minutes et utilisez les flèches pour les régler.
- 10 Si besoin, sélectionnez l'option **Alarme** si vous souhaitez être averti lorsque l'activité démarre ou avant qu'elle ne démarre.


- 11 Sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu déroulant **Alarme** :
 - **Lors du démarrage**
 - **5 minutes avant le début**
 - **15 minutes avant le début**
 - **30 minutes avant le début**
 - **1 heure avant le début**
 - **2 heures avant le début**
 - **1 jour avant le début**
- 12 Appuyez sur  pour régler l'alarme.
- 13 Dans le champ **SMS**, saisissez le texte de l'alarme.
- 14 Sélectionnez l'option **Lire** si vous voulez que le message soit prononcé à voix haute.
- 15 Sélectionnez l'option **Afficher message** si vous voulez que le message s'affiche sur l'appareil.
- 16 Pour ajouter un son à l'alarme, appuyez sur  en regard de **Son**, sélectionnez un son et appuyez sur **Ouvrir**.
- 17 Appuyez sur **OK**.
- 18 Appuyez sur **Enregistrer**.
- 19 Appuyez sur **OK**.

1.7 Suppression d'une activité

- 1 Sélectionnez **Outils > Agenda > Modifier l'agenda**.
- 2 Sélectionnez l'activité que vous souhaitez supprimer.
- 3 Appuyez sur **Modifier**.
- 4 Appuyez sur **Supprimer**.
- 5 Appuyez sur **OK**.

1.8 Configuration de l'arrière-plan de l'agenda



Dans un tableau de communication qui utilise des carrés d'agenda, vous pouvez configurer un arrière-plan personnalisé pour chaque mois.

- 1 Ouvrez un tableau de communication avec des carrés d'agenda.
- 2 Allez dans **Outils > Agenda > Image de fond standard**.
- 3 Appuyez sur  à côté du mois dont vous souhaitez personnaliser l'arrière-plan.
- 4 Utilisez le menu déroulant de la boîte de dialogue **Symbole** pour trouver l'image, sélectionnez-la puis appuyez sur **OK**.
- 5 Répétez à partir de l'étape 2 pour les autres mois.
- 6 Appuyez sur **OK**.
- 7 Procédez comme suit pour enregistrer les modifications dans le tableau de communication :
 - Sélectionnez **Fichier > Enregistrer**.
 - Appuyez sur **Ctrl + S**.



2 Le carnet d'adresses

L'appareil peut enregistrer tous les noms et numéros de téléphone de vos amis et contacts dans le carnet d'adresses. Le carnet d'adresses peut être utilisé dans un tableau de communication pour appeler un contact par exemple.

2.1 Ajout d'un contact


- 1 Sélectionnez **Outils > Carnet d'adresses**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter contact** .
- 3 Appuyez sur  pour ajouter une image au contact.
- 4 Utilisez le menu déroulant de la boîte de dialogue **Symbole** pour trouver l'image, sélectionnez-la puis appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur le champ **Saisir nom** pour saisir le nom du contact. Ce champ est obligatoire !
- 6 Appuyez sur le champ **Téléphone** pour saisir le numéro de téléphone du contact.
- 7 Appuyez sur **OK**.

2.2 Modification d'un contact

- 1 Sélectionnez **Outils > Carnet d'adresses**.
- 2 Appuyez sur **Éditer contact** .
- 3 Appuyez sur  pour ajouter une (autre) image au contact.
- 4 Utilisez le menu déroulant de la boîte de dialogue **Symbole** pour trouver l'image, sélectionnez-la puis appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur le champ **Saisir nom** pour modifier le nom du contact. Ce champ est obligatoire !

- 6 Appuyez sur le champ **Téléphone** pour modifier le numéro de téléphone du contact.
- 7 Appuyez sur **OK**.

2.3 Suppression d'un contact

- 1 Sélectionnez **Outils > Carnet d'adresses**.
- 2 Sélectionnez le contact que vous souhaitez supprimer.
- 3 Appuyez sur **Supprimer contact** .
- 4 Appuyez sur **OK**.

H Connexion avec l'Eddy

1 Qu'est-ce que l'Eddy ?

Le Eddy est un petit écran portable équipé d'un haut-parleur intégré. Il est également possible d'établir une connexion Bluetooth entre le Smart et l'Eddy. Vous pouvez choisir de transmettre du texte et/ou du son. Le texte s'affiche sur 1, 2 ou 3 lignes de texte, selon la configuration.



Figure 1: L'Eddy

VOIR AUSSI:

"Configuration de l'Eddy" à la page 71

2 Bluetooth

Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil qui fonctionne sur une courte distance. Le Bluetooth ne requiert pas de connexion physique. Vous pouvez échanger des données sur une distance de 10 mètres environ. Avec le Bluetooth, inutile de diriger les appareils les uns vers les autres. Si les appareils se trouvent dans la portée les uns des autres, des données peuvent être transférées même si les appareils sont dans des pièces séparées.

Avec le Smart, vous pouvez utiliser le Bluetooth pour vous connecter à d'autres appareils Bluetooth. Par exemple, le Eddy ou un téléphone portable.



Certains appareils risquent de ne pas être compatibles avec le vôtre.



La présence d'objets entre les appareils peut réduire la distance sur laquelle ils peuvent communiquer.

3 Configuration de l'Eddy

- 1 Sélectionnez **Outils > Eddy > Configuration**.
- 2 Si besoin, sélectionnez les options suivantes :

Connecter automatiquement au démarrage	Si cette option est sélectionnée, l'appareil tente automatiquement de se connecter à l'Eddy.
Envoyer Audio	Si cette option est sélectionnée, le son sera relayé uniquement par les haut-parleurs de l'Eddy.
Envoyer Texte	Si cette option est sélectionnée, le texte s'affichera sur l'Eddy.
Écrire en majuscules	Si cette option est sélectionnée, le texte s'affichera en majuscules sur l'Eddy.
Nombre de lignes sur l'écran	Dans le menu déroulant, sélectionnez le nombre de lignes de texte (1, 2 ou 3) que vous voulez voir apparaître à l'écran de l'Eddy.


- 3 Appuyez sur **OK**.

VOIR AUSSI:

"Qu'est-ce que l'Eddy ?" à la page 70

4 Recherche de l'Eddy

1 Sélectionnez **Outils > Eddy > Connecter**.

2 Appuyez sur **Chercher** .


L'Eddy détecté apparaîtra dans le menu déroulant.

3 Exécutez l'une des actions suivantes :

- Appuyez sur **OK**.
- Connectez-vous à l'Eddy.

5 Connexion à l'Eddy

1 Sélectionnez **Outils > Eddy > Connecter**.

2 Appuyez sur **Connecter** .

La boîte de dialogue **Eddy** s'affiche avec le message **Connecté à l'Eddy**.

3 Appuyez sur **OK**.

4 Appuyez sur **OK**.

VOIR AUSSI:

"Déconnexion de l'Eddy" à la page 73

6 Déconnexion de l'Eddy

Sélectionnez **Outils > Eddy > Déconnecter**.

Déconnecté de l'Eddy.

VOIR AUSSI:

"Connexion à l'Eddy" à la page 72

I Connexion à l'ordinateur et connexions USB

1 Connexion à l'ordinateur

Vous pouvez utiliser le câble USB fourni pour connecter l'appareil à un ordinateur. Le fait de connecter l'appareil à un ordinateur vous permet de transférer des données depuis et vers l'appareil utilisant Mind Express.

2 Connexion de l'appareil à l'ordinateur

Branchez le câble USB fourni entre l'appareil et l'ordinateur.

La boîte de dialogue **Windows Mobile Device Center** s'affiche sur l'ordinateur.

VOIR AUSSI:

"Déconnexion de l'appareil de l'ordinateur" à la page 76

3 Déconnexion de l'appareil de l'ordinateur

Afin d'éviter toute perte de données et l'endommagement de la mémoire de l'appareil, il est recommandé de suivre la procédure décrite ci-dessous pour déconnecter l'appareil de l'ordinateur.

- 1 Appuyez sur l'icône USB dans la zone de notification Windows.
- 2 Appuyez sur l'option permettant de retirer l'appareil en toute sécurité.
- 3 Retirez le câble USB qui relie l'appareil à l'ordinateur.

VOIR AUSSI:

"Connexion de l'appareil à l'ordinateur" à la page 76

4 Connexion à un clavier externe

- 1 Raccordez le clavier externe au Smart à l'aide du câble adaptateur USB fourni.
- 2 Sélectionnez **Outils > Smart3 > Configuration**.
- 3 Dans le menu déroulant **Clavier USB**, sélectionnez la disposition du clavier que vous avez connecté.
- 4 Appuyez sur **OK**.

5 Connexion d'une souris externe

Branchez la souris externe sur le Smart à l'aide du câble adaptateur USB fourni.

6 Connexion d'une clé USB

Vous pouvez créer une sauvegarde du Smart sur une clé USB.

Utilisez le câble adaptateur USB fourni pour relier la clé USB au Smart.

J Passage d'un appel

1 Téléphone

Vous pouvez établir une connexion Bluetooth entre le Smart et votre téléphone portable. Une fois la connexion établie, vous pouvez appeler à l'aide du Smart un numéro de téléphone que vous avez saisi ou un contact de votre carnet d'adresses (par exemple, en utilisant le fichier *app_téléphone_smart*).

2 Activation du Bluetooth

Pour établir une connexion entre le téléphone portable et le Smart, vous devez activer le Bluetooth sur les deux appareils.

Sélectionnez **Outils > Téléphone > Activer Bluetooth**.

Un signal sonore retentit une fois que le Bluetooth est activé.

3 Configuration des options téléphoniques du Smart

Vous pouvez modifier le nom Bluetooth du Smart et activer automatiquement le Bluetooth au démarrage du Smart. Vous pouvez également visualiser des événements. Par exemple, lorsque le Bluetooth est activé, ou lorsque l'on vous appelle, etc.

- 1 Sélectionnez **Outils > Téléphone > Configuration**.
- 2 Si besoin, modifiez le nom Bluetooth du Smart dans le champ **Nom Bluetooth**.
Ce nom apparaît dans la liste des appareils associés sur votre téléphone portable.
- 3 Si besoin, sélectionnez l'option **Se connecter au démarrage** pour activer le Bluetooth au démarrage du Smart.
- 4 Si besoin, sélectionnez l'option **Afficher infos additionnelles** pour expliquer certains événements à l'écran.

EXEMPLE: Activation du Bluetooth

- 5 Sélectionnez l'option **Notification pour appel entrant**.
Un message s'affiche lorsque l'on vous appelle sur le Smart.
- 6 Appuyez sur **OK**.

4 Connexion du téléphone au Smart

La connexion entre un téléphone portable et le Smart dépend de la marque et du modèle du téléphone. Vous trouverez ci-dessous une description de la procédure générale.



Consultez également le manuel d'utilisation de votre téléphone portable.

- 1 Activez le Bluetooth sur le Smart.
- 2 Activez le Bluetooth sur votre téléphone portable et laissez-le chercher les appareils disponibles.
- 3 Recherchez le nom Bluetooth du Smart dans la liste des appareils disponibles et procédez à la connexion.
- 4 Saisissez le code PIN du Smart. Le code par défaut est 1111.

Si la connexion s'établit avec succès, vous pouvez utiliser le Smart pour appeler, répondre à des appels et raccrocher.

5 Appel d'un numéro de téléphone

Vous pouvez utiliser le Smart pour appeler un numéro saisi.



Vous pouvez appeler des contacts du carnet d'adresses à l'aide du fichier app_téléphone_smart.

- 1 Sélectionnez **Outils > Téléphone > Appeler**.
- 2 Dans la boîte de dialogue **Numéro de Téléphone**, saisissez le numéro de téléphone (uniquement des chiffres).
- 3 Appuyez sur **OK**.

6 Répondre au téléphone

Vous pouvez utiliser le Smart pour répondre à un appel entrant.



Vous pouvez également répondre au téléphone à l'aide du fichier app_téléphone_smart.

Sélectionnez **Outils > Téléphone > Répondre**.

7 Raccrocher

Vous pouvez utiliser le Smart pour raccrocher.



Vous pouvez également raccrocher à l'aide du fichier `app_téléphone_smart`.

Sélectionnez **Outils > Téléphone > Raccrocher**.

K Contrôle de l'environnement

1 Contrôle de l'environnement

Le Smart est équipé d'un récepteur et d'un transmetteur infrarouges. Vous pouvez ainsi utiliser le Smart pour contrôler des appareils comme des téléviseurs, radios et lecteurs DVD par le biais de codes infrarouges. Le Smart peut apprendre à reconnaître les codes infrarouges des appareils.

2 Acquisition d'un code infrarouge

1 Sélectionnez **Outils > Contrôle de l'Environnement > Enregistrer**.

2 Sélectionnez un code infrarouge dans la boîte de dialogue **JabblaiR**.

3 Dans le champ **Saisir nom**, appuyez sur le nom du code infrarouge.

EXEMPLE: Haut-parleur de la télévision

4 Tenez la télécommande de l'appareil concerné (par exemple, la télécommande du téléviseur) à une distance de 5 cm environ du récepteur infrarouge (5) du Smart.

5 Appuyez sur **Enregistrer**.

Dans le champ **Etat**, le message **Enfoncer et tenir enfoncé** s'affiche.

6 Appuyez brièvement sur le bouton de la télécommande (par exemple pour augmenter le volume).

Dans le champ **Etat**, le message **OK** s'affiche. Si **Erreur** apparaît, répétez la procédure en commençant à l'étape 5.

7 Pointez le Smart vers l'appareil dont vous souhaitez tester le code infrarouge.



Le signal infrarouge est transmis par le transmetteur infrarouge (13) à l'arrière du Smart.

8 Appuyez sur **Test**.

Si le code infrarouge exécute la commande souhaitée, le test est réussi. Dans le cas contraire, le code doit être acquis une nouvelle fois.

- 9 Répétez les opérations à partir de l'étape 2 pour acquérir d'autres codes infrarouge.
- 10 Appuyez sur **OK**.

3 Création d'une sauvegarde des codes infrarouges

Vous pouvez créer une sauvegarde des codes infrarouges afin de pouvoir les restaurer en cas de problèmes. Cela peut s'avérer utile si le Smart est utilisé à plusieurs endroits. Vous pouvez acquérir les codes infrarouges pour l'emplacement A puis créer une sauvegarde. Faites de même pour l'emplacement B. Accédez à **Restaurer sauvegarde** pour permuter entre les codes infrarouges, selon l'emplacement.

- 1 Sélectionnez **Outils > Contrôle de l'Environnement > Sauvegarde**.
- 2 Dans le champ **Saisir nom**, indiquez le nom de la sauvegarde.
EXEMPLE: Maison
- 3 Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Oui** dans la boîte de dialogue **Sauvegarde**.
La sauvegarde est créée.

VOIR AUSSI:

"Restauration d'une sauvegarde des codes infrarouges" à la page 88

4 Restauration d'une sauvegarde des codes infrarouges

Vous pouvez créer une sauvegarde des codes infrarouges afin de pouvoir les restaurer en cas de problèmes. Cela peut s'avérer utile si le Smart est utilisé à plusieurs endroits. Vous pouvez acquérir les codes infrarouges pour l'emplacement A puis créer une sauvegarde. Faites de même pour l'emplacement B. Accédez à Restaurer sauvegarde pour permuter entre les codes infrarouges, selon l'emplacement.

- 1 Sélectionnez **Outils > Contrôle de l'Environnement > Restaurer sauvegarde**.
- 2 Dans la liste **Sélectionner sauvegarde**, appuyez sur le nom de la sauvegarde que vous souhaitez restaurer.



La restauration d'une sauvegarde peut prendre quelques minutes.

- 3 Appuyez sur **OK**.
La sauvegarde est restaurée.

VOIR AUSSI:

"Création d'une sauvegarde des codes infrarouges" à la page 87

L Communication

1 Communication

Mind Express 4 a été installé sur le Smart.

Mind Express est un logiciel simple d'utilisation qui contient tout ce dont un orthophoniste a besoin pour créer de nouveaux tableaux et exercices de communication. Une grande variété de symboles, images, messages texte vers voix, musiques et sons peuvent être utilisés pour créer des tableaux de communication intéressants et stimulants.

Le Mind Express permet de créer des messages vocaux en sélectionnant des images et/ou des symboles. Mind Express comprend également un module grammatical intégré qui conjugue automatiquement les verbes, entre autres.

Un large éventail de symboles et icônes sont également disponibles. Ils peuvent servir à créer des fiches, jeux, exercices ou autres applications de communication. Vous pouvez également ajouter vos propres dessins, photos ou nouveaux symboles.



Vous pouvez créer et modifier des documents sur le Smart ; toutefois, il est plus aisé de créer un document sur l'ordinateur puis de le transférer sur le Smart à l'aide d'une connexion USB.



Pour créer ou modifier des documents sur l'ordinateur, suivez la procédure décrite dans le manuel d'utilisation du Mind Express.

2 Ajout d'une action Smart spécifique

En plus des actions standard disponibles dans Mind Express, vous pouvez également affecter des actions spécifiques dans le Smart aux carrés de votre

- Eddy
- Contrôle de l'environnement
- Pivoter l'aperçu
- Smart 3 Camera
- Smart3

3 Ajout d'une action Eddy

Si vous ajoutez l'une des actions Eddy dans un carré du tableau de communication, vous pouvez ensuite sélectionner ce carré pour vous connecter ou vous déconnecter du Eddy, activer ou désactiver le texte, allumer ou éteindre le son et augmenter ou baisser le volume.

- 1 Sélectionnez **Modifier > Mode modifier**.
- 2 Appuyez deux fois sur un carré pour y insérer une action.
- 3 Sélectionnez **Eddy** dans le groupe d'options **Actions**.
- 4 Sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu déroulant **Actions > Eddy** :

(Re)connecter	Se connecte à l'Eddy.
Déconnecter	Se déconnecte de l'Eddy.
Supprimer le texte	Supprime le texte de l'Eddy.
Son : on	Active le son sur l'Eddy.
Son : off	Désactive le son sur l'Eddy.
Son : on/off	Permute l'état du son sur l'Eddy. Si le son est activé, cette action le désactive. Si le son est désactivé, cette action l'active.
Texte : on	Active le texte sur l'Eddy.
Texte : off	Désactive le texte sur l'Eddy.
Texte : on/off	Permute l'état du texte sur l'Eddy. Si l'affichage textuel est activé, cette action le désactive. Si l'affichage textuel est désactivé, cette action l'active.
Volume : augmenter	Augmente le volume de l'Eddy.
Volume : diminuer	Baisse le volume de l'Eddy.

4 Ajout d'une action de contrôle de l'environnement

Si vous ajoutez un **Contrôle de l'Environnement** dans un carré du tableau de communication, vous pouvez ensuite contrôler un appareil de votre environnement en sélectionnant le carré.

- 1 Sélectionnez **Modifier > Mode modifier**.
- 2 Appuyez deux fois sur un carré pour y insérer une action.
- 3 Sélectionnez **Contrôle de l'Environnement** dans le groupe d'options **Actions**.
- 4 Dans le menu déroulant **Actions > Contrôle de l'Environnement**, sélectionnez l'une des options suivantes :

Pause	Si besoin, dans le champ Durée , modifiez la durée en millisecondes de la pause. L'action de pause sert à créer un intervalle entre 2 actions de contrôle de l'environnement. Par exemple : si un appareil n'accepte pas une succession rapide de signaux.
IR1	Vous pouvez saisir un défini par l'utilisateur pour cette action spécifique de contrôle de l'environnement. Si besoin, accédez au champ Répéter pour modifier le nombre de répétitions de transmission du signal. Par exemple : si vous voulez augmenter considérablement le volume d'un appareil sans appuyer dix fois sur le carré, vous pouvez saisir Répéter 10 .

5 Ajout d'une action Smart 3 Camera

Si vous ajoutez l'une des actions **Smart 3 Camera** dans un carré du tableau de communication, vous pouvez prendre une photo, afficher la photo précédente ou suivante ou supprimer une photo en sélectionnant le carré.



Pour pouvoir visionner des photos, le tableau de communication doit comporter un carré du type Smart 3 Camera.

- 1 Sélectionnez **Modifier > Mode modifier**.
- 2 Appuyez deux fois sur le carré dans lequel vous souhaitez insérer une action de caméra.
- 3 Sélectionnez **Smart 3 Camera** dans le groupe d'options **Actions**.
- 4 Sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu déroulant **Actions > Smart 3 Camera** :

Prendre photo	Cela vous permet de prendre une photo.
Photo suivante	La photo suivante dans la bibliothèque s'affiche.
Photo précédente	La photo précédente dans la bibliothèque s'affiche.
Supprimer photo	La photo active est supprimée de la bibliothèque.

6 Ajout d'une action Smart3

Si vous ajoutez l'une des actions **Smart3** dans un carré du tableau de communication, vous pouvez régler la luminosité, placer l'appareil en veille ou l'arrêter et activer ou désactiver le microphone en sélectionnant le carré.

- 1 Sélectionnez **Modifier > Mode modifier**.
- 2 Appuyez deux fois sur un carré pour y insérer une action.
- 3 Sélectionnez **Smart3** dans le groupe d'options **Actions**.
- 4 Dans le menu déroulant **Actions > Smart3**, sélectionnez l'une des options suivantes :

Augmenter la luminosité	Augmente la luminosité de l'écran.
Diminuer la luminosité	Réduit la luminosité de l'écran.
Mode veille	Place l'appareil en mode veille.
Arrêt	Arrête l'appareil.
Activer microphone	Allume le microphone de l'appareil.
Désactiver microphone	Éteint le microphone de l'appareil.
Activer/Désactiver microphone	Passé d'un mode du microphone à l'autre. Si le microphone est allumé, cette action l'éteint. Si le microphone est éteint, cette action l'allume.

7 Ajout d'une action de rotation de l'écran

Si vous ajoutez l'une des actions **Pivoter l'aperçu** à un carré du tableau de communication, vous pouvez sélectionner le carré pour choisir d'afficher l'écran au format portrait ou paysage ou passer de l'orientation portrait à paysage et inversement.

- 1 Sélectionnez **Modifier > Mode modifier**.
- 2 Appuyez deux fois sur un carré pour y insérer une action.
- 3 Sélectionnez **Pivoter l'aperçu** dans le groupe d'options **Actions**.
- 4 Dans le menu déroulant **Actions > Pivoter l'aperçu**, sélectionnez l'une des options suivantes :

Portrait	L'écran s'affiche dans l'orientation portrait.
Paysage	L'écran s'affiche dans l'orientation paysage.
Basculer affichage	L'écran est pivoté. Si l'écran est affiché selon une orientation portrait, il passe à l'orientation paysage avec cette action. Si l'écran est affiché selon une orientation paysage, il passe à l'orientation portrait avec cette action.

M Dépannage

1 Localisation du numéro de série du Smart

Lorsque vous contactez le service d'assistance, vous devez systématiquement indiquer le numéro de série du Smart.

- 1 Positionnez le Smart avec la sangle orientée vers le haut.
- 2 Exécutez l'une des actions suivantes :

L'appareil est doté d'une housse de protection	Détachez la fixation de la sangle et retirez la housse de protection pour accéder à l'autocollant indiquant le numéro de série.
L'appareil n'est pas doté d'une housse de protection	Détachez la fixation de la sangle ou poussez la sangle sur un côté pour accéder à l'autocollant indiquant le numéro de série.

2 Consultation de la version de Mind Express sur le Smart

- 1 Sélectionnez **Fichier > Info licence**.
- 2 La version de Mind Express est indiquée en haut de la boîte de dialogue **Mind Express**. Par exemple 4.2.3.1267.

3 Affichage des bibliothèques de symboles activées

- 1 Sélectionnez **Fichier > Info licence**.
- 2 Affichez les bibliothèques de symboles de la liste. Si besoin, utilisez la barre de défilement vertical pour afficher l'ensemble de la liste.

Indication	Explication
noir	installé + licence
gris + *	non installé ou non disponible dans la langue sélectionnée
gris clair	installé, mais pas de licence



Si vous souhaitez demander une licence pour d'autres bibliothèques de symboles, contactez le distributeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.

4 Dépannage

Problème	Solution
L'écran tactile est lent ou ne fonctionne pas correctement.	<ul style="list-style-type: none">• Utilisez un stylet pour appuyer sur l'écran tactile.• Redémarrez l'appareil pour corriger d'éventuelles erreurs logicielles.• Vérifiez que la version la plus récente du logiciel est installée.• Si l'écran est endommagé ou présente des rayures, contactez le service d'assistance du distributeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.
L'appareil ne répond plus.	Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes. L'appareil s'éteindra. Appuyez sur le bouton de démarrage pour redémarrer l'appareil.
L'appareil est chaud.	En cas d'usage prolongé et intensif de l'appareil, celui-ci peut devenir chaud. Cela est normal et n'a aucun effet sur la durée de vie ou les performances de l'appareil.
Aucun appareil Bluetooth détecté.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le Bluetooth est activé sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.• Veillez à ce que votre appareil et l'autre appareil se trouvent à une distance maximale de 10 mètres.• Si besoin, retirez tout objet placé entre les deux appareils.• L'appareil risque de ne pas être compatible avec le vôtre.
Aucune connexion entre l'appareil et l'ordinateur.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le câble reliant l'appareil et l'ordinateur est correctement branché.• Vérifiez que le Windows Mobile Device Center est installé sur l'ordinateur.
L'appareil ne s'allume pas. À l'allumage de l'appareil, l'indicateur on/off clignote.	La batterie n'est pas suffisamment chargée. Branchez l'appareil sur l'alimentation électrique et laissez-le charger quelques minutes avant de le rallumer.
La batterie ne se charge pas correctement.	Si la batterie ne se charge plus complètement, contactez le service d'assistance du distributeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.

N Annexes

1 Acapela

Table 1: Consonnes

Symbole	Transcription	Comme dans:
j	ZynjOR	junior
w	tRwa	trois
H	Hit	huit
p	p a p a	papa
t	t a~ t	tante
k	k a k a o	cacao
b	bOR	bord
d	dOR	dort
g	g a l E t	galette
f	f a m	femme
s	s a~	sans
S	S a	chat
v	v O l	vol
z	z e R o	zéro
Z	Z w E	jouet
l	l o~	long
R	R a	rat

Symbole	Transcription	Comme dans:
m	m a~g	mangue
n	n a v E t	navette
N	p u d i N	pudding

Table 2: Voyelles

Symbole	Transcription	Comme dans:
i	v i l	ville
e	e	et
E	S E R	cher
a	S a	chat
O	n O R	nord
o	g o S	gauche
u	l u R	lourd
y	b y t	but
2	b l 2	bleu
9	n 9 f	neuf
@	d @ m e~	demain
e~	m e~	main
a~	g R a~	grand
o~	R o~	rond
9~	b R 9~	brun

Index

A

Acapela 102

Action

activer/désactiver le son Eddy 91

activer/désactiver le texte Eddy 91

arrêter 94

augmenter/baisser le volume de l'Eddy 91

caméra 93

contrôle de l'environnement 92

effacer le texte Eddy 91

établir une connexion avec l'Eddy 91

luminosité 94

microphone 94

Pivoter l'aperçu 95

prendre une photo 54

se déconnecter de l'Eddy 91

veille 94

Activité

ajouter 61

modifier 63

supprimer 65

Afficher agenda 58

Agenda 58

configurer l'arrière-plan 65

Alarme

ajouter 59

modifier 60

supprimer 61

Alimentation électrique 23

Annexes 101

Appareil

arrêter 41

fourni avec housse de protection 28

mettre en route 29

mettre en veille 41

Arrêt 41

ajouter une action 94

B

Barre de menu

- masquer 39
- restaurer 39

Batterie 15

- afficher la capacité restante 31
- consulter état 30
- indicateur de charge 23

Bibliothèques de symboles

- afficher les bibliothèques disponibles 99

Bluetooth 70

- activer 80

Bouton

- Bouton de réinitialisation 23
- On/off 23

Bouton de réinitialisation 23

C

Caméra 23, 54

- ajouter une action 93

Carnet d'adresses 66

Charge 29

Clavier 33

- afficher à l'écran 34
- connecter un clavier externe 77
- masquer à l'écran 34

Clavier à l'écran 33

- afficher 34
- masquer 35

Clé USB

- connecter 77

Codes infrarouges

- acquérir 86
- créer une sauvegarde 87
- restaurer une sauvegarde 88

Communication 90

Configuration de l'heure d'arrêt 38

Configurer la langue du logiciel 36

Connexion

- à l'Eddy 72
- à l'ordinateur 76
- déconnexion entre l'appareil et l'ordinateur 76
- et déconnexion de l'Eddy 73

Cont act

- supprimer 67

Contact

- ajouter 66
- modifier 66

Contrôle de l'environnement

- ajouter une action 92

Création d'une sauvegarde

- des codes infrarouges 87
- du Smart 46

D

Définition du débit de parole 36

Démarrage

- configurer les options 39

Dépannage 100
Dictionnaire de prononciation 44
Dimensions 15

E

Écran 15
 régler la luminosité 37
Écran tactile 23
 utiliser 31
Eddy
 ajouter une action 91
 configurer 71
 déconnecter 73
 établir la connexion 72
 qu'est-ce que l'Eddy ? 70
 rechercher 72
Effleurement 31
Enregistrement
 configurer 40
 en Mode de souris 51
 en Mode enregistrement 50
 message 50
 son 50
 supprimer 52
Enregistrement d'un message 50
 en Mode de souris 51
 en Mode enregistrement 50

F

Fichier 32
 supprimer 48

G

Glissement/déplacement 31

H

Haut-parleurs 23
Housse de protection 19, 23
 fournie avec le Smart 28

I

Indicateur
 batterie 23
 on/off 23
Infrarouge 86
 récepteur 23
 transmetteur 23

L

Langue

- configurer 36
- configurer la langue du logiciel 36

Luminosité

- ajouter une action 94

M

Manuel d'utilisation

- utiliser 11

Mémoire

- effacer 47
- interne 15

Mémoire interne 15

Microphone 23

- ajouter une action 94

Mind Express

- consulter la version 98

Mise en route 29

Mode de souris

- enregistrer un message 51

Mode enregistrement

- enregistrer un message 50

Mode veille 41

- ajouter une action 94

N

Nettoyage 20

Numéro de série

- Localiser Smart 98

O

On/off

- bouton 23
- indicateur 23

Ordinateur

- connecter l'appareil à l'ordinateur 76

P

Photo 54

- afficher 55
- prendre 54
- supprimer 55, 56

Pivoter l'aperçu 38

- ajouter une action 95

Port USB 23

Prédiction de mots 45

Prédiction de phrases 45

Pression 31

Processeur 15

R

- Réglage de l'heure 36
- Réglage de la date 36
- Réglage de la luminosité de l'écran 37
- Règles de sécurité 18
- Réparation 20
- Restauration d'une sauvegarde
 - des codes infrarouges 88
 - du 47

S

- Saisie d'un texte 33, 35
- Sangle 23
- Smart
 - accessoires fournis 22
 - connecter au téléphone 81
 - localiser le numéro de série 98
 - présentation 23
 - utiliser 13
 - vue arrière 23
 - vue côté droit 23
 - vue côté gauche 23
- Son
 - enregistrer 50
 - régler le volume général 37
- Souris
 - connecter une souris externe 77
- Spécifications techniques 15

- Stockage
 - effacer la mémoire 47
- Synthèse vocale
 - configurer 36
- Système d'exploitation 15

T

- Téléphone 80
 - appeler un numéro de téléphone 82
 - configurer 80
 - connecter à Smart 81
 - enregistrer 82
 - raccrocher 83
- Transcription phonétique 102

U

- USB 15
 - connecter à l'ordinateur 76
 - connecter un clavier externe 77
 - connecter une souris externe 77
- Connexion d'une clé USB 77

V

Veille 41

Voix

définir le type de voix 36

régler le volume 36

Volume

régler le volume de la voix 36

régler le volume général 36, 37