

Sommario

Modalità d'uso delle presenti istruzioni di funzionamento	11
Introduzione	13
A Specifiche tecniche	15
B Normative di sicurezza e manutenzione	17
1 Normative di sicurezza	18
2 Fodero protettivo	19
3 Pulizia del dispositivo	20
4 Riparazioni	20
C Introduzione	21
1 Che cos'è il riquadro Smart?	22
2 Presentazione di Smart	23
3 Fissazione del fodero protettivo a Smart	28

4	Attivazione di Smart	29
5	Ricarica del dispositivo	29
6	Visualizzazione dello stato della batteria	30
7	Verifica della capacità residua della batteria	31
8	Uso del touchscreen	31
9	Uso dei file	32
10	Immissione di testo	33
10.1	Immissione di testo	33
10.2	Visualizzazione del pannello di ingresso visualizzato	34
10.3	Nascondere pannello di ingresso visualizzato	35
10.4	Immissione di testo tramite il pannello di ingresso visualizzato	35
11	Impostazioni generali	36
11.1	Impostazione della lingua del software	36
11.2	Impostazione della sintesi vocale	36
11.3	Impostazione di data e ora	36
11.4	Regolazione della luminosità dello schermo	37
11.5	Impostazione del volume generico	37
11.6	Rotazione dello schermo	38
11.7	Impostazione del tempo di spegnimento di Smart	38
11.8	Nascondere barra dei menu	39

11.9	Ripristino della barra dei menu	39
11.10	Impostazione delle opzioni di avvio.....	39
11.11	Impostazione della registrazione	40
12	Passaggio di Smart in modalità standby	41
13	Spegnimento di Smart	41
 D Impostazioni specifiche, backup e spazio su disco		43
1	Modifica delle impostazioni specifiche per utente.....	44
1.1	Selezione	44
1.2	Dizionario vocale, frase e previsione parola	44
1.2.1	<i>Dizionario vocale.....</i>	44
1.2.2	<i>Previsione parola.....</i>	45
1.2.3	<i>Previsione frase.....</i>	45
2	Backup e spazio su disco	46
2.1	Creazione di un backup di Smart	46
2.2	Ripristino di un backup in Smart.....	47
2.3	Pulizia della memoria di Smart.....	47
2.4	Eliminazione di un file da Smart	48

E Registrazione di un messaggio 49

1	Registrazione di un messaggio.....	50
2	Registrazione di un messaggio in modalità registrazione.....	50
3	Registrazione di un messaggio in modalità mouse.....	51
4	Eliminazione di un messaggio da Smart.....	52

F Fotocamera 53

1	Fotocamera.....	54
2	Esecuzione di una foto.....	54
3	Scatto di una foto da inserire in un riquadro.....	54
4	Visualizzazione di un'immagine.....	55
5	Eliminazione di un'immagine.....	55
6	Eliminazione di una foto (pulendo l'unità).....	56

G Applicazioni personali 57

1	Agenda.....	58
1.1	Visualizzazione dell'agenda.....	58
1.2	Aggiunta di un allarme.....	59

1.3	Modifica di un allarme.....	60
1.4	Eliminazione di un allarme	61
1.5	Aggiunta di un'attività	61
1.6	Modifica di un'attività	63
1.7	Eliminazione di un'attività	65
1.8	Impostazione dello sfondo dell'agenda	65
2	Rubrica.....	66
2.1	Aggiunta di un contatto.....	66
2.2	Modifica di un contatto	66
2.3	Eliminazione di un contatto	67

H Connessione con Eddy 69

1	Che cos'è Eddy?	70
2	Bluetooth	70
3	Impostazione di Eddy	71
4	Ricerca di Eddy	72
5	Connessione a Eddy	72
6	Disconnessione da Eddy	73

I Collegamento al computer e connessioni USB 75

1	Connessione al computer	76
2	Connessione del dispositivo al computer	76
3	Scollegamento del dispositivo dal computer	76
4	Connessione a un pannello di ingresso esterno	77
5	Connessione di un mouse esterno	77
6	Collegare una penna USB	77

J Esecuzione di una chiamata 79

1 Telefono 80

2 Attivazione di bluetooth 80

3 Impostazione delle opzioni del telefono Smart..... 80

4 Collegamento del telefono a Smart..... 81

5 Chiamata di un numero di telefono..... 82

6 Risposta al telefono 82

7 Interruzione 83

K Controllo ambientale 85

1 Controllo ambientale 86

2 Acquisizione di un codice a infrarossi..... 86

3 Creazione di un backup dei codici a infrarossi 87

4 Ripristino di un backup dei codici a infrarossi 88

L Comunicazione 89

1 Comunicazione 90

2 Aggiunta di un'azione di Smart specifica 90

3	Aggiunta di un'azione Eddy.....	91
4	Aggiunta di un'azione di controllo ambientale.....	92
5	Aggiunta di un'azione Smart 3 Camera	93
6	Aggiunta di un'azione Smart3	94
7	Aggiunta di un'azione di rotazione dello schermo.....	95

M Risoluzione dei problemi 97

1	Ricerca del numero di serie di Smart.....	98
2	Verifica della versione di Mind Express su Smart	98
3	Visualizzazione delle librerie dei simboli attive	99
4	Risoluzione dei problemi	100

N Appendici 103

1	Acapela	104
---	---------------	-----

Index 107

Modalità d'uso delle presenti istruzioni di funzionamento

Le istruzioni di funzionamento descrivono Smart. Sono state redatte in modo che un utente possa trovare in modo rapido e semplice quanto desiderato quando utilizza Smart e il software Mind Express.

Per l'uso più efficiente del software, si consiglia di leggere con attenzione le istruzioni di funzionamento e acquisire familiarità con tutti gli aspetti del dispositivo e del software.

Se qualcosa non è chiaro, fare riferimento a Jabbla.

Poiché il software si evolve in continuazione, Jabbla non accetta alcuna responsabilità per le modifiche apportate al contenuto o alle immagini dalla pubblicazione delle presenti istruzioni di funzionamento. Nel caso di eventuali modifiche, nessun diritto può derivare per il software che è già stato fornito.

Jabbla non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni (in)diretti, incidentali o speciali derivanti da qualsiasi uso (del contenuto) della documentazione. Questa esclusione si applica a qualsiasi azione legale, per qualsiasi ambito giuridico.

Il contenuto del presente manuale non è vincolante. Soggetto a errori.

Non è consentita la stampa, la copia o la riproduzione parziale senza il consenso scritto di Jabbla.

Ci riserviamo il diritto di applicare modifiche al software, se le riterremo utili per il suo corretto funzionamento.

In tal caso il cliente non ha il diritto di annullare il contratto né di richiedere che le stesse modifiche vengano apportate ai dispositivi già ordinati.

Introduzione

Smart è un piccolo e maneggevole dispositivo portatile per la comunicazione dotato di uno schermo dinamico. Il dispositivo è in grado di pronunciare messaggi casuali tramite l'utilizzo di simboli, fotografie o altre immagini visive. Smart si basa su una piattaforma per computer Windows Mobile e utilizza il software Mind Express.

Smart dispone di un microfono interno di alta qualità e di un robusto amplificatore audio, in modo da riprodurre realisticamente e messaggi compilati e/o scelti e renderli chiaramente intelligibili.

Smart ha una funzione di supporto di comunicazione. Il dispositivo è utilizzato per uso generico nella vita quotidiana di persone (a partire dai 3 anni di età) che presentano un disturbo di comunicazione (non sono in grado di parlare o di parlare in modo chiaro). Per utilizzare il dispositivo, devono inoltre disporre di sufficienti capacità motorie e mentali. Il dispositivo è adatto per uso clinico, terapeutico o diagnostico. È in grado di imparare i codici a infrarossi e trasmetterli a fine di controllare altri dispositivi attraverso l'unità. Sono inclusi dispositivi per uso generico come dispositivi per applicazioni audio-visive e automazione domestica. Questa estensione non è idonea per l'uso clinico, terapeutico o diagnostico.

Sono disponibili ulteriori informazioni sulla creazione di file in Smart, nelle istruzioni di funzionamento di Mind Express fornite in dotazione con Smart.

Per un uso ottimale di Smart si consiglia di leggere con attenzione le presenti istruzioni di funzionamento.

A Specifiche tecniche

Tabella 1: Specifiche tecniche

Specifiche	Spiegazione
Processore	NVIDIA® Tegra 2 1 GHz
Sistema operativo	Microsoft Windows® Mobile™6.0
Memoria interna	512 MB SDRAM + 1 GB FLASH
Schermo	Touchscreen luminoso da 4,3 pollici TFT WVGA <ul style="list-style-type: none">• 480 x 800 pixel• 262.144 colori• Retroilluminazione a LED
USB	1 x USB 2.0 OTG (slave + master)
Batteria	Batteria interna
Peso	Dispositivo 250 g, fodero protettivo 41 g
Dimensioni	<ul style="list-style-type: none">• Dispositivo: 135 mm x 79 mm x 25 mm• Dispositivo con fodero: 140,5 mm x 85 mm x 30 mm

B Normative di sicurezza e manutenzione

1 Normative di sicurezza

Il suo peso contenuto rende Smart un dispositivo estremamente portatile e mobile. Si consiglia di utilizzare sempre Smart con il fodero di protezione in dotazione.



Il dispositivo utilizza una batteria agli ioni di litio. Quando si sostituisce la batteria non smaltirla secondo le usuali modalità di smaltimento. Attenersi alle indicazioni delle normative di smaltimento in vigore nella propria zona. È possibile sempre restituire la batteria al proprio fornitore.



Se non si utilizza il dispositivo per un periodo prolungato, conservarlo sempre con la batteria completamente carica. Assicurarsi sempre che il dispositivo sia spento (tenere premuto il pulsante di accensione/spengimento per 4 secondi).



Evitare fonti di calore nelle vicinanze del dispositivo o aree che potrebbero diventare particolarmente incandescenti. Ad esempio, durante l'estate potrebbe far molto caldo in macchina. Le temperature troppo elevate possono influire negativamente sulle prestazioni di durata della batteria.



Smart non è impermeabile, ma il dispositivo è stato progettato in modo che la parte superiore sia antischizzo. Nella parte inferiore sono presenti i fori degli altoparlanti che potrebbero far entrare umidità o sporco nei recessi degli altoparlanti. La qualità degli altoparlanti potrebbe esserne danneggiata. Cercare sempre ed evitare situazioni che potrebbero causare l'ingresso di umidità e sporco nei fori degli altoparlanti. Prendere inoltre le necessarie precauzioni quando si pulisce il dispositivo ed attenersi sempre alle istruzioni di pulizia.



Il dispositivo può funzionare utilizzando un dito per toccare lo schermo. Non è necessario esercitare alcuna forza. Ad esempio, una leggera pressione è sufficiente per selezionare un simbolo sullo schermo. È possibile inoltre eseguire questa operazione utilizzando una penna o un oggetto simile; non utilizzare tuttavia oggetti affilati.



È molto facile registrare suoni con Smart. Non è necessario parlare ad alta voce quando si registra la voce. Il dispositivo amplificherà le registrazioni e le riprodurrà nel modo più naturale possibile. È possibile regolare sempre il volume. Assicurarsi sempre che il volume riprodotto non infastidisca o non sia dannoso per l'utente e l'ambiente.

2 Fodero protettivo

Smart dispone di un fodero protettivo (15) che offre maggiore protezione. Inoltre, il fodero protettivo rende il dispositivo meno vulnerabile a urti e colpi e lo protegge da umidità e sporco.



3 Pulizia del dispositivo

Pulire il dispositivo in modo regolare in modo da evitare la diffusione di batteri.

Per rimuovere la polvere, utilizzare preferibilmente un panno morbido asciutto. Per macchie locali sul rivestimento, utilizzare un panno umido. Assicurarsi che non possa entrare umidità attraverso i fori dell'altoparlante, l'apertura del microfono o i connettori. È possibile asportare eventuale sporco intorno ai connettori utilizzando un batuffolo di cotone.

Per pulire il touchscreen utilizzare un panno asciutto; non utilizzare panno carta perché potrebbe causare dei piccoli graffi. Per rimuovere grasso o macchie dallo schermo, si consiglia di utilizzare detergenti progettati specificatamente per pulire gli schermi (aerosol o salviette). Non premere troppo forte sullo schermo durante il processo di pulizia.

È meglio pulire Smart con un panno asciutto o leggermente umido.

4 Riparazioni

Nel caso di danni al dispositivo, si prega di contattarne il distributore oppure il servizio assistenza di Jabbla.

Non tentare di eseguire riparazioni autonomamente. Tale operazione potrebbe causare danni al dispositivo e invalidare la garanzia.

C Introduzione

1 Che cos'è il riquadro Smart?

Smart è fornito insieme ai seguenti componenti:

- foderò protettivo
- penna
- alimentatore con spina e cavo
- cavo USB per la connessione a un pannello di ingresso USB, unità flash USB, mouse USB
- cavo USB per la connessione al computer
- istruzioni di funzionamento Smart
- Mind Express (software + istruzioni di funzionamento)

2 Presentazione di Smart



Figura 1: vista laterale sinistra Smart

No	Identificativo	Spiegazione
1	Riavvio	Questo pulsante è utilizzato per nascondere/visualizzare il menu e reimpostare il dispositivo.
2	Porta USB	È possibile utilizzare la porta USB per creare/ripristinare un backup, connettersi a un computer e a un pannello di ingresso esterno o per connettere un mouse.

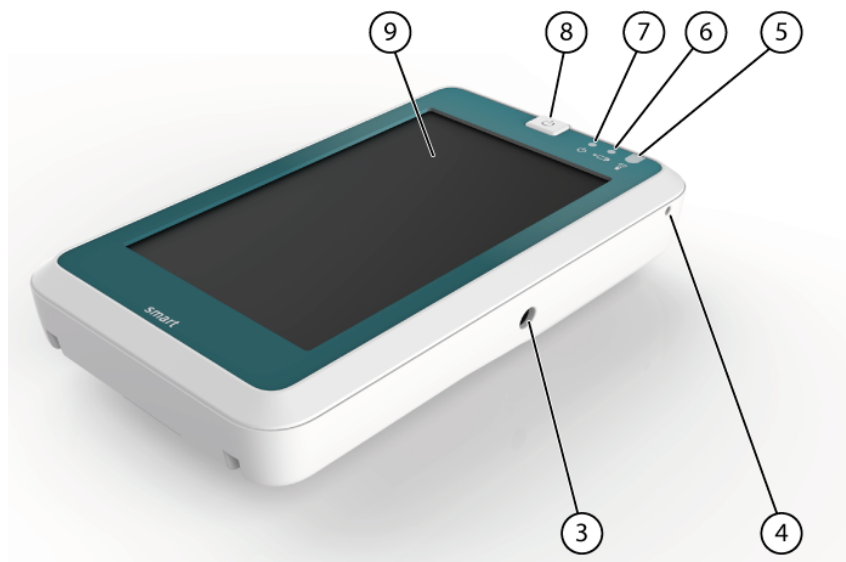


Figura 2: vista laterale destra Smart

No	Identificativo	Spiegazione
3	Connessione all'alimentatore	Questa connessione consente di caricare il dispositivo mediante l'adattatore di alimentazione incluso.
4	Apertura microfono	Si tratta dell'apertura del microfono utilizzata affinché i suoni raggiungano il microfono interno durante la registrazione.
5	Ricevitore a infrarossi	Il ricevitore a infrarossi si utilizza per acquisire i codici a infrarossi.

No	Identificativo	Spiegazione
6	Spia di carica batteria	La spia di carica batteria si accende non appena si connette il dispositivo alla rete elettrica tramite l'adattatore di alimentazione in dotazione. La spia ha una luce ambra durante la ricarica. Il colore della spia diventa verde non appena la batteria si carica.
7	Spia di accensione/spegnimento	L'indicatore di accensione/spegnimento mostra lo stato di alimentazione del dispositivo: <ul style="list-style-type: none">• se nessuna spia è accesa, il dispositivo è spento• rosso: carica della batteria compresa tra 0% e 29%• ambra: carica della batteria compresa tra 30% e 50%• verde: carica della batteria compresa tra 51% e 100%
8	Pulsante di accensione/spegnimento	Consente di accendere/spegnere il dispositivo o di metterlo in standby.
9	Touchscreen	Il dispositivo dispone di un touchscreen da 4,3 pollici.

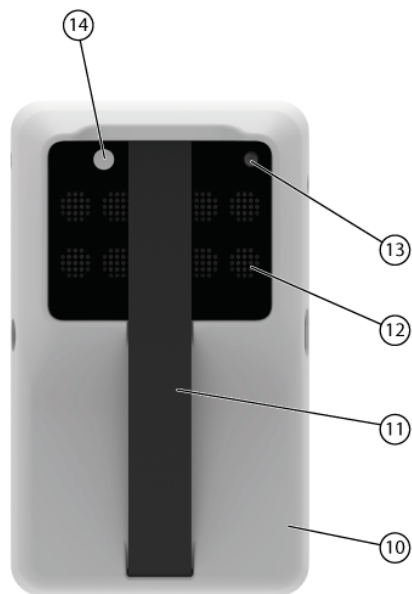


Figura 3: vista posteriore Smart

No	Identificativo	Spiegazione
10	Fodero protettivo	Il fodero protettivo rende il dispositivo meno vulnerabile a urti e colpi e lo protegge da umidità e sporco.
11	Fascetta	Con la fascetta è possibile tenere il dispositivo in sicurezza in mano.

No	Identificativo	Spiegazione
12	Altoparlanti	Il dispositivo dispone di una serie di potenti altoparlanti.
13	Trasmittitore a infrarossi	Trasmette segnali a infrarossi ad altri dispositivi.
14	Fotocamera	Il dispositivo dispone di una fotocamera in grado di effettuare fotografie.

3 Fissazione del fodero protettivo a Smart

Smart dispone di un fodero protettivo (15) che offre maggiore protezione. Inoltre, il fodero protettivo rende il dispositivo meno vulnerabile a urti e colpi e lo protegge da umidità e sporco.

- 1 Posizionare Smart in modo che la fascetta sia rivolta verso l'alto.



- 2 Sganciare il fermo (11b) sulla fascetta.
- 3 Inserire il fermo (11b) attraverso l'apertura lunga del fodero protettivo.
- 4 Inserire la sezione inferiore della fascetta (11a) attraverso l'apertura lunga del fodero protettivo.
- 5 Premere il fodero protettivo sulla parte inferiore del Smart tenendo le 2 parti (11a e 11b).
- 6 Tenere la parte superiore della fascetta (11c) premendo nel contempo la parte superiore del fodero protettivo sopra Smart.
- 7 Fissare il fermo (11b) alla parte superiore della fascetta (11c).
- 8 Inserire Smart e assicurarsi che il fodero protettivo sia ben sistemato intorno a Smart.

4 Attivazione di Smart

Premere il pulsante di accensione/spegnimento (8) di Smart.

Se Smart era in modalità standby, può essere utilizzato immediatamente.

Se Smart era spento, Mind Express deve essere prima caricato.

VEDI ANCHE:

"Spegnimento di Smart" a pagina 41

"Passaggio di Smart in modalità standby" a pagina 41

5 Ricarica del dispositivo

La durata di tempo per l'eventuale utilizzo del dispositivo senza ricaricarlo dipende in linea di massima da:

- il volume dell'audio
- il tempo di spegnimento impostato
- l'uso del bluetooth

Se Smart viene utilizzato con frequenza, si consiglia di ricaricarlo quotidianamente. Per eseguire questa operazione, utilizzare solo l'adattatore di alimentazione in dotazione. Il dispositivo può essere anche utilizzato durante l'operazione di ricarica.


- 1 Verificare la capacità della batteria residua.
- 2 Collegare l'adattatore di alimentazione in dotazione tra il dispositivo e l'alimentazione.

L'indicatore di carica batteria si accenderà e manterrà la luce gialla durante la ricarica. Dopo che la batteria sarà completamente carica, l'indicatore diventa verde.

6 Visualizzazione dello stato della batteria

- 1 Visualizzare l'indicatore di accensione/spengimento sul dispositivo.
- 2 L'indicatore di accensione/spengimento può visualizzare i seguenti colori:

Verde	Carica della batteria compresa tra 51% e 100%
Ambra	Carica della batteria compresa tra 30% e 50%
Rosso	Carica della batteria compresa tra 0% e 29%

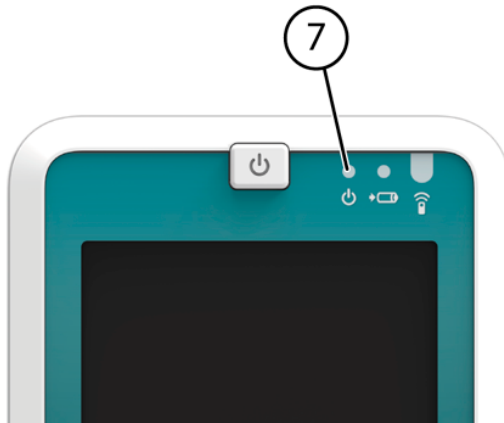

7 Verifica della capacità residua della batteria

- 1 Selezionare **Strumenti > Batteria**.
- 2 Visualizzare lo stato della batteria:
 - **A batteria**, il dispositivo sta utilizzando la batteria.
 - **Ricarica in corso...**, il dispositivo è connesso all'adattatore incluso e si sta ricaricando.
- 3 Visualizzare la capacità residua della batteria.
- 4 Se la capacità residua della batteria è inferiore al 30%, (o l'indicatore di accensione/spengimento è rosso), si consiglia di ricaricare il dispositivo.

8 Uso del touchscreen

Il touchscreen consente di selezionare in modo facile i riquadri. Per eseguire questa operazione utilizzare un dito (un'unghia) o una penna. La pressione applicata allo schermo per selezionare una voce con il dito deve essere leggermente superiore a quella di quando si utilizza una penna.

L'utente può regolare il modo con cui si esegue una selezione sullo schermo. Consultare le istruzioni di funzionamento di Mind Express.



Verificare che sia stata rimossa la pellicola protettiva dal dispositivo.



Non utilizzare strumenti taglienti per evitare di graffiare il touchscreen.



Assicurarsi che il touchscreen non entri in contatto con acqua.



Il touchscreen si disabilita automaticamente quando il dispositivo passa in modalità standby o se un utente seleziona Standby.

Attenersi alle tecniche seguenti per utilizzare il touchscreen:

- Tocco lieve: toccare un riquadro una volta con il dito o con la penna per selezionarlo.
- Tocco (e mantenimento della pressione): utilizzare il dito o la penna per toccare lievemente un riquadro e mantenere la pressione su di esso un po' più a lungo rispetto al tempo solito per selezionare il riquadro.
- Trascinamento: trascinare con il dito o la penna e spostarlo in alto, in basso, a sinistra o a destra per spostare le voci (in modalità di modifica o in modalità mouse).



In Mind Express è possibile impostare la funzione di trascinamento in una griglia di comunicazione.

9 Uso dei file

Smart utilizza Mind Express 4.

È possibile creare nuovi file, nonché aprirne, modificare e salvare quelli esistenti.



Sulle modalità di utilizzo di questi file, consultare le istruzioni di funzionamento di Mind Express.



È più facile creare e modificare file su un computer con Mind Express e quindi salvarli in Smart per mezzo di una connessione USB, poi creando e modificando i file direttamente in Smart.

10 Immissione di testo

10.1 Immissione di testo

Per immettere del testo in una casella di dialogo, è possibile utilizzare il pannello di ingresso visualizzato del dispositivo. Sono disponibili 4 diversi pannelli di ingresso tra cui scegliere.

Input Panel															
Esc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	=	←		
Tab	q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	[]	\		
Caps Lock	a	s	d	f	g	h	j	k	l	;	'	↵			
Shift	z	x	c	v	b	n	m	,	.	/	↑	àü	pgup		
Ctrl	Alt	`						ins	del	←	↓	→	pgdn		

Figura 4: Pannello di ingresso visualizzato standard

Input Panel															
Esc	!	@	#	\$	%	^	&	*	()	_	+	←		
Tab	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	{	}			
Caps Lock	A	S	D	F	G	H	J	K	L	:	"	↵			
Shift	Z	X	C	V	B	N	M	<	>	?	↑	àü	Home		
Ctrl	Alt	~						ins	del	←	↓	→	End		

Figura 5: Pannello di ingresso visualizzato con funzione Caps Lock abilitata




Figura 6: Pannello di ingresso visualizzato con funzione caratteri speciali abilitata



Figura 7: Pannello di ingresso visualizzato con funzioni caratteri speciali e Caps Lock abilitate

10.2 Visualizzazione del pannello di ingresso visualizzato

- 1 Toccare  nella barra dei menu in basso a destra per attivare il pannello di ingresso visualizzato.



L'icona  è visibile solo se è abilitata una finestra di dialogo con campo di testo modificabile.


- 2 Nella barra del titolo, toccare e trascinare la finestra di dialogo **Input Panel** nella posizione desiderata sullo schermo.

VEDI ANCHE:

"Nascondere pannello di ingresso visualizzato" a pagina 35

"Immissione di testo tramite il pannello di ingresso visualizzato" a pagina 35

10.3 Nascondere pannello di ingresso visualizzato

Toccare  nella barra dei menu in basso a destra per nascondere il pannello di ingresso visualizzato.

VEDI ANCHE:

"Visualizzazione del pannello di ingresso visualizzato" a pagina 34

10.4 Immissione di testo tramite il pannello di ingresso visualizzato

È possibile immettere testo nella finestra di dialogo utilizzando il campo di testo modificabile.

- 1 Visualizzare il pannello di ingresso visualizzato.
- 2 Toccare nel campo di testo modificabile.
- 3 Toccare i tasti sul pannello di ingresso per immettere testo.



Toccare Caps Lock per immettere caratteri maiuscoli e/o altri caratteri. Toccare àü per immettere caratteri speciali.

VEDI ANCHE:

"Visualizzazione del pannello di ingresso visualizzato" a pagina 34

11 Impostazioni generali

11.1 Impostazione della lingua del software

La lingua del software o l'interfaccia può essere modificata passando alla lingua dell'utente.



Per impostare la lingua del software, fare riferimento alle istruzioni di funzionamento di Mind Express.

11.2 Impostazione della sintesi vocale


I messaggi assegnati ai riquadri nella griglia di comunicazione vengono pronunciati ad alta voce dal dispositivo di uscita della sintesi vocale. L'utente determina le caratteristiche della sintesi vocale, come lingua, voce, volume della voce, volume complessivo, velocità di sintesi.



Per impostare la sintesi vocale, fare riferimento alle istruzioni di funzionamento di Mind Express.

11.3 Impostazione di data e ora

Smart è in grado di leggere ad alta voce ora, giorno e data. Assicurarsi quindi che l'ora e la data siano impostate correttamente.

- 1 Selezionare **Strumenti > Data / Ora**.
- 2 Nel campo **Ora** toccare l'ora e utilizzare le frecce per regolarla. Eseguire la stessa operazione per minuti e secondi.
- 3 Toccare il pulsante  nel campo **Data**, quindi selezionare la data attuale nel calendario.

- 4 Dall'elenco a discesa **Annotazione del tempo** scegliere una delle seguenti opzioni:
 - **24h (15:30)**, il tempo viene visualizzato con formato 24 ore.
 - **12h (3:30)**, il tempo viene visualizzato con formato 12 ore.
 - **AM/PM (3:30 PM)**, l'ora viene visualizzata con l'indicazione AM (mattino) e PM (pomeriggio).
- 5 Toccare **OK**.

11.4 Regolazione della luminosità dello schermo

- 1 Selezionare **Strumenti > Smart3 > Impostazioni**.
- 2 Spostare il dispositivo di scorrimento verso **Luminosità** finché lo schermo non raggiunge la luminosità desiderata.
- 3 Toccare **OK**.

11.5 Impostazione del volume generico

Il volume complessivo del dispositivo determina il volume della sintesi vocale in uscita e anche il volume dei suoni del sistema (suono quando si tocca lo schermo).

- 1 Selezionare **Strumenti > Opzioni**.
- 2 Completare una delle seguenti azioni nella finestra di dialogo **Opzioni**:
 - trascinare il dispositivo di scorrimento verso sinistra per ridurre il volume
 - trascinare il dispositivo di scorrimento verso destra per ridurre il volume
- 3 Toccare **OK**.



Il volume complessivo può essere impostato anche in Sintesi vocale.

11.6 Rotazione dello schermo

È possibile visualizzare lo schermo in orizzontale e verticale.

- 1 Selezionare **Strumenti > Ruota vista**.
- 2 Per ruotare lo schermo di nuovo, ripetere le operazioni del punto 1.

11.7 Impostazione del tempo di spegnimento di Smart

È possibile spegnere automaticamente Smart.

Ad esempio, è possibile specificare lo spegnimento automatico di Smart dopo 5 ore in modalità standby.

- 1 Selezionare **Strumenti > Smart3 > Impostazioni**.
- 2 Dall'elenco a discesa **Arresto dopo: (dopo Standby)**, selezionare una delle opzioni seguenti:
 - **Mai**
 - **5 ore**
 - **10 ore**
 - **20 ore**
 - **25 ore**
- 3 Toccare **OK**.

11.8 Nascondere barra dei menu

Per evitare che l'utente del dispositivo esegua delle modifiche, è possibile nascondere la barra dei menu.

Selezionare **Strumenti > Nascondi menu**.

VEDI ANCHE:

"Ripristino della barra dei menu" a pagina 39

11.9 Ripristino della barra dei menu

La barra dei menu deve essere disponibile per eseguire delle regolazioni al dispositivo. Se la barra dei menu non è disponibile, sarà necessario ripristinarla.

Procedere come segue per ripristinare la barra dei menu:

- 1 Utilizzare una penna a sfera per premere il pulsante di riavvio.
- 2 Se è necessaria una password per visualizzare la barra dei menu, viene visualizzata quindi la finestra di dialogo **Password**. Immettere la password, quindi fare clic su **OK**.

Viene visualizzata la barra dei menu in fondo.

VEDI ANCHE:

"Nascondere barra dei menu" a pagina 39

11.10 Impostazione delle opzioni di avvio

È possibile impostare la modalità desiderata per l'avvio di Mind Express; se si desidera che il menu sia visibile o l'accesso al menu sia protetto da password o il documento sia visualizzato quando viene avviato.



Per l'impostazione delle opzioni di avvio, fare riferimento alle istruzioni di funzionamento di Mind Express.

11.11 Impostazione della registrazione



Per impostare la registrazione, fare riferimento alle istruzioni di funzionamento di Mind Express.

12 Passaggio di Smart in modalità standby

Vai in standby si utilizza quando Smart non è stato completamente spento e può essere avviato di nuovo avviato facilmente.



Passare il dispositivo in modalità standby se non si utilizza il dispositivo per un breve periodo. Il dispositivo consuma meno energia se era ancora acceso. Spegnerlo il dispositivo se non si utilizza il dispositivo per un periodo prolungato.

Eeguire una delle seguenti azioni:

- Selezionare **Strumenti > Smart3 > Vai in standby**.
- Premere il pulsante di accensione/spengimento.

VEDI ANCHE:

"Attivazione di Smart" a pagina 29

13 Spegnimento di Smart

Se non si utilizza Smart per un periodo prolungato, si consiglia di spegnere Smart.

Eeguire una delle seguenti azioni:

- Selezionare **Strumenti > Smart3 > Arresto**
- Tenere premuto il pulsante di accensione/spengimento per almeno 4 secondi.

VEDI ANCHE:

"Attivazione di Smart" a pagina 29

D Impostazioni specifiche, backup e spazio su disco

1 Modifica delle impostazioni specifiche per utente

1.1 Selezione

Sono disponibili diverse impostazioni per personalizzare le selezioni in modo da soddisfare le esigenze dell'utente. È possibile evidenziare una selezione con un particolare colore, può essere allargata, può essere eseguita dopo aver premuto o rilasciato; è possibile selezionare una selezione di pausa, è anche possibile riprodurre un suono dopo la selezione e visualizzare un feedback sonoro sulla selezione.



Per configurare come eseguire le selezioni, fare riferimento alle istruzioni di funzionamento di Mind Express.

1.2 Dizionario vocale, frase e previsione parola

1.2.1 Dizionario vocale

È possibile che alcune parole non vengano pronunciate correttamente. Ad esempio, nomi o parole di una lingua diversa. È possibile aggiungere la parola con la sua nuova pronuncia a un dizionario vocale. Si possono aggiungere più dizionari vocali:

- dizionari vocali per lingua
- dizionari vocali per utente, se il dispositivo è utilizzato da più persone
- dizionari vocali per voce. Il formato fonetico può essere diverso per ogni voce.



Fare riferimento alle istruzioni di funzionamento di Mind Express per sapere come utilizzare il dizionario vocale.



Le impostazioni del dizionario vocale devono essere eseguite direttamente su Smart. Non è possibile importare un dizionario vocale.

1.2.2 Previsione parola

Se l'utente è in grado di utilizzare testo, la previsione parola può incrementare significativamente la velocità di comunicazione. È possibile impostare Mind Express in modo che tali previsioni vengano visualizzate nei riquadri. Ciò consente all'utente di selezionare queste previsioni per inserire parole o frasi molto più rapidamente. Non appena l'utente seleziona una lettera o una parola nella griglia di comunicazione, la previsione verrà visualizzata nei riquadri di previsione.

La previsione parola si basa sul contesto. Ciò significa che la previsione parola non solo tenta di prevedere la parola che si sta formando, ma anche la parola successiva.



Per informazioni sulla modalità di utilizzo della previsione parola, fare riferimento alle istruzioni di funzionamento di Mind Express.



Le impostazioni nella previsione parola devono essere eseguite direttamente in Smart. Non è possibile importare un elenco di previsione parola.

1.2.3 Previsione frase

Se l'utente è in grado di utilizzare testo, la previsione di frase può incrementare significativamente la velocità di comunicazione. È possibile impostare Mind Express in modo che tali previsioni vengano visualizzate nei riquadri. Ciò consente all'utente di selezionare queste previsioni. Non appena l'utente seleziona una lettera o una parola nella griglia di comunicazione, la previsione verrà visualizzata nei riquadri di Mind Express. La previsione frase cerca le frasi. Se ad esempio si scrive la parola "tè", la previsione frase potrebbe proporre ad esempio una frase del tipo "Voglio una tazza di tè".



Quando per la prima volta si esegue l'avvio tramite Mind Express, la previsione frase sarà vuota.



Per informazioni sulla modalità di utilizzo della previsione frase, fare riferimento alle istruzioni di funzionamento di Mind Express.




Le impostazioni nella previsione frase devono essere eseguite direttamente in Smart. Non è possibile importare un elenco di previsione frase.

2 Backup e spazio su disco

2.1 Creazione di un backup di Smart

È possibile eseguire un backup del contenuto di Smart su una penna USB. In caso di problemi con Smart, il backup può essere ripristinato dalla penna USB nel Smart

- 1 Collegare la penna USB a Smart.
- 2 Selezionare **Strumenti > Smart3 > Backup in penna USB**.
- 3 Toccare il campo **Nome**.
- 4 In basso a destra, toccare  per attivare il pannello di ingresso visualizzato.
- 5 Toccare una volta di nuovo il campo **Nome**.
- 6 Toccare il pannello di ingresso per immettere il nome del backup.

ESEMPIO: backup giugno

- 7 Toccare **OK**.
- 8 Toccare **Sì** nella finestra di dialogo **Backup in penna USB**.

Si avvia la creazione del backup. Potrebbero essere necessari alcuni minuti prima della visualizzazione della finestra di dialogo **Backup su memory stick completato con successo**.

- 9 Toccare **OK**.

VEDI ANCHE:

"Ripristino di un backup in Smart" a pagina 47

2.2 Ripristino di un backup in Smart

In caso di problemi con Smart, il backup può essere ripristinato dalla penna USB nel Smart

- 1 Collegare la penna USB a Smart utilizzando il cavo adattatore USB in dotazione.
- 2 Premere la punta di una penna a sfera nel foro di reimpostazione e mantenere la pressione per almeno 5 secondi.
- 3 Premere il pulsante di accensione/spegnimento.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Restore Files**.
- 4 Toccare **Sì** per ripristinare un backup.
- 5 Selezionare il backup da ripristinare.
- 6 Se necessario, selezionare innanzitutto l'opzione **Format drive first, then restore** se un precedente backup, che non disponeva di questa opzione, non ha ottenuto un buon risultato.
- 7 Toccare **OK**.

VEDI ANCHE:

"Creazione di un backup di Smart" a pagina 46

2.3 Pulizia della memoria di Smart

Se si creano più registrazioni audio nello stesso riquadro, i file wave non utilizzati vengono ancora salvati nella memoria di Smart. Ciò significa che la memoria di archiviazione di Smart si riempirà.

- 1 Selezionare **Strumenti > Smart3 > Pulizia del disco**.
- 2 Toccare **Ripulire**.
- 3 Toccare **Sì**.
La memoria viene ripulita. È possibile vedere la quantità di spazio libero nella finestra di dialogo **Pulizia del disco**.
- 4 Toccare **OK**.

VEDI ANCHE:

"Eliminazione di un file da Smart" a pagina 48



- D Impostazioni specifiche, backup e spazio su disco
- 2 Backup e spazio su disco

2.4 Eliminazione di un file da Smart

È possibile eliminare dalla memoria di Smart documenti, modelli, figure, suoni e brani musicali.

- 1 Selezionare **Strumenti > Smart3 > Pulizia del disco**.
- 2 Toccare **Organizza file**.
- 3 Dall'elenco a discesa **Tipo** scegliere una delle seguenti opzioni:
 - **Documenti**
 - **Modelli**
 - **Simboli**
 - **Suoni**
 - **Musica**
- 4 Dall'elenco a discesa, selezionare **Cartella**, se necessario una cartella o una sottocartella.
- 5 Selezionare i file da eliminare.



Se necessario, toccare  per ordinare i file alfabeticamente o in alternativa toccare  per ordinare i file per dimensione (dal grande al piccolo).

- 6 Toccare **Cancella files**.
- 7 Toccare **Sì** nella finestra di dialogo **Elimina file**.
- 8 Toccare **Chiudi**.
- 9 Toccare **OK**.

VEDI ANCHE:


"Pulizia della memoria di Smart" a pagina 47

E Registrazione di un messaggio

1 Registrazione di un messaggio




È possibile utilizzare il dispositivo per registrare il messaggio vocale o registrare un suono e salvarli in un riquadro. È possibile creare una registrazione in Modalità registrazione, Mouse mode e in Modalità modifica.

2 Registrazione di un messaggio in modalità registrazione

- 1 Selezionare **Modifica > Modalità registrazione**.
- 2 Toccare il riquadro a cui si desidera aggiungere un messaggio.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Registrazione**.
- 3 Toccare e tenere premuto il pulsante  durante l'intera registrazione.



Durante la registrazione parlare con tono di voce normale e a volume normale. Mantenersi a una distanza di circa 30 centimetri dal dispositivo.

- 4 Rilasciare il pulsante per terminare la registrazione.
- 5 Toccare  per ascoltare la registrazione. Ripetere dal punto 3 se si è soddisfatti della registrazione.
- 6 Eseguire una delle seguenti azioni:
 - Toccare  per salvare la registrazione nel riquadro desiderato.
 - Toccare  per eliminare la registrazione.


VEDI ANCHE:

"Registrazione di un messaggio in modalità mouse" a pagina 51

3 Registrazione di un messaggio in modalità mouse




- 1 Verificare che la registrazione è impostata per **Registrazione rapida**. Selezionare **Strumenti > Opzioni**.
- 2 Toccare e tenere premuto sul riquadro per aggiungere il messaggio finché non viene visualizzata la finestra di dialogo **Registrazione**.

La durata del tempo necessario per mantenere la pressione sul riquadro è specificata nelle opzioni.

- 3 Toccare e tenere premuto il pulsante  durante l'intera registrazione.



Durante la registrazione parlare con tono di voce normale e a volume normale. Mantenersi a una distanza di circa 30 centimetri dal dispositivo.

- 4 Rilasciare il pulsante per terminare la registrazione.
- 5 Toccare  per ascoltare la registrazione. Ripetere dal punto 3 se si è soddisfatti della registrazione.
- 6 Eseguire una delle seguenti azioni:
 - Toccare  per salvare la registrazione nel riquadro desiderato.
 - Toccare  per eliminare la registrazione.

VEDI ANCHE:



"Registrazione di un messaggio in modalità registrazione" a pagina 50

4 Eliminazione di un messaggio da Smart

È possibile eliminare la registrazione di un suono effettuata con Smart dalla memoria di Smart.

- 1 Selezionare **Strumenti > Smart3 > Pulizia del disco.**
- 2 Toccare **Organizza file.**
- 3 Selezionare **Suoni** dal menu a discesa **Tipo.**
- 4 Selezionare **Rec** nel menu a discesa **Cartella.**
- 5 Selezionare i file da eliminare.



Se necessario, toccare  per ordinare i file alfabeticamente o in alternativa toccare  per ordinare i file per dimensione (dal grande al piccolo).

- 6 Toccare **Cancella files.**
- 7 Toccare **Sì** nella finestra di dialogo **Elimina file.**
- 8 Toccare **Chiudi.**
- 9 Toccare **OK.**



F Fotocamera

1 Fotocamera

Smart è dotato di una fotocamera. Grazie alla fotocamera è possibile eseguire fotografie, ma non video. Le immagini vengono automaticamente salvate e sono utilizzabili nella griglia di comunicazione.

2 Esecuzione di una foto

Smart consente di effettuare una foto, se c'è un riquadro sulla griglia di comunicazione che include l'azione **Acquisisci snapshot**.

- 1 Toccare il riquadro nella griglia di comunicazione.
- 2 Puntare l'obiettivo sul soggetto e attendere finché l'immagine non diventa chiara.
- 3 Toccare  per scattare una foto.
- 4 Ripetere il punto 4 per creare più foto.
- 5 Toccare  nella griglia di comunicazione.






Utilizzare i riquadri Immagine precedente, Immagine successiva per visualizzare le foto effettuate. Se necessario, utilizzare il riquadro Elimina immagine per eliminare una foto.


3 Scatto di una foto da inserire in un riquadro

È possibile inserire una foto in un riquadro in una griglia di comunicazione utilizzando una foto scattata con il dispositivo.

- 1 Aprire il file con la griglia di comunicazione per inserire una foto scattata in uno o più riquadri.
- 2 Selezionare **Modifica > Modalità fotografia**.
- 3 Toccare il riquadro nella griglia di comunicazione.

- 4 Puntare l'obiettivo sul soggetto e attendere finché l'immagine non diventa chiara.
- 5 Toccare  per scattare una foto.
- 6 Verificare di aver scattato la foto ed eseguire una delle seguenti azioni:
 - Toccare  e la foto viene salvata sul dispositivo.
 - Toccare  e la foto viene eliminata dal dispositivo.



Per tornare alla griglia di comunicazione senza utilizzare una foto, toccare .

4 Visualizzazione di un'immagine

- 1 Selezionare **File > Apri**.
- 2 Aprire una griglia di comunicazione pensata per visualizzare le immagini.
- 3 Visualizzare le immagini.



Se necessario, toccare i riquadri Immagine precedente, Immagine successiva per visualizzare le foto effettuate. Se necessario, toccare il riquadro Elimina immagine per eliminare un'immagine.

5 Eliminazione di un'immagine



- 1 Selezionare **File > Apri**.
- 2 Aprire una griglia di comunicazione pensata per visualizzare le immagini.
- 3 Toccare i riquadri **Immagine precedente** e/o **Immagine successiva** finché non si vedono le immagini da eliminare.
- 4 Toccare il riquadro **Elimina immagine**.

6 Eliminazione di una foto (pulendo l'unità)

È possibile eliminare una foto scattata con Smart dalla memoria di Smart. Le foto scattate dall'utente con una griglia di comunicazione (ad esempio con il file fornito standard *app_camera_smart*) vengono salvate nella cartella **Smart3Camera**. Le immagini scattate dal supervisore per riempire i riquadri nella griglia di comunicazione vengono salvate nella cartella **Smart3Pictures**.

- 1 Selezionare **Strumenti > Smart3 > Pulizia del disco**.
- 2 Toccare **Organizza file**.
- 3 Selezionare **Simboli** dall'elenco a discesa **Tipo**.
- 4 Selezionare la cartella **Smart3Camera** oppure la cartella **Smart3Pictures** dall'elenco a discesa **Cartella**.
- 5 Selezionare i file da eliminare.



Se necessario, toccare  per ordinare i file alfabeticamente o in alternativa toccare  per ordinare i file per dimensione (dal grande al piccolo).

- 6 Toccare **Cancella files**.



Se si elimina una foto utilizzata in una griglia di comunicazione, tale foto particolare non sarà più visualizzata nella griglia di comunicazione

- 7 Toccare **Sì** nella finestra di dialogo **Elimina file**.
- 8 Toccare **Chiudi**.
- 9 Toccare **OK**.

G Applicazioni personali

1 Agenda

Il dispositivo consente di organizzare gli appuntamenti presenti in agenda. È possibile inoltre utilizzare l'agenda per aggiungere allarmi. Ad esempio, per ricordarsi i compleanni di amici e familiari.

1.1 Visualizzazione dell'agenda

- 1 Selezionare **Strumenti > Agenda > Modifica agenda**.
- 2 Selezionare una delle seguenti opzioni dall'elenco a discesa **Mostra**.
 - **Giorno singolo**
 - **Settimana**
 - **Mese**
- 3 Dal secondo elenco a discesa, selezionare la data che si desidera visualizzare.
- 4 Toccare **OK**.

1.2 Aggiunta di un allarme

- 1 Selezionare **Strumenti > Agenda > Aggiungi allarme**.
- 2 Dall'elenco a discesa **Quando**, selezionare di ripetere l'allarme:
 - **Una volta**
 - **Ogni giorno**
 - **Ogni giorno lavorativo**
 - **Ogni settimana**
 - **Ogni mese**
 - **Ogni anno**
- 3 Nel campo **Alle** specificare l'ora dell'allarme. Eseguire questa operazione utilizzando le frecce.
- 4 Eseguire una delle seguenti azioni:
 - Per un allarme non ripetuto, toccare nel campo sottostante e selezionare la data per l'allarme.
 - Per un allarme ripetuto, in **Data inizio**, toccare per selezionare la data in cui ha inizio l'appuntamento e in **Data fine** toccare per selezionare la data in cui termina l'appuntamento.
- 5 Nel campo **Messaggio** immettere il testo dell'allarme.
- 6 Selezionare l'opzione **Parla** se si desidera che il messaggio sia letto ad alta voce.
- 7 Selezionare **Mostra messaggio** se si desidera che il messaggio sia visualizzato sul dispositivo.
- 8 Per aggiungere un suono all'allarme, toccare accanto a **Suono**, selezionare un suono e toccare **Apri**.
- 9 Toccare **Salva**.


1.3 Modifica di un allarme

- 1 Selezionare **Strumenti > Agenda > Modifica agenda**.
- 2 Selezionare l'allarme da modificare.
- 3 Toccare **Modifica**.
- 4 Se necessario, modificare la frequenza di ripetizione dell'allarme nell'elenco a discesa **Quando**:
 - **Una volta**
 - **Ogni giorno**
 - **Ogni giorno lavorativo**
 - **Ogni settimana**
 - **Ogni mese**
 - **Ogni anno**
- 5 Se necessario, modificare l'ora dell'allarme nel campo **Alle**. Eseguire questa operazione utilizzando le frecce.
- 6 Eseguire una delle seguenti azioni:
 - Per un allarme non ripetuto, toccare nel campo sottostante e selezionare la data per l'allarme.
 - Per un allarme ripetuto, in **Data inizio**, toccare per selezionare la data in cui ha inizio l'appuntamento e in **Data fine** toccare per selezionare la data in cui termina l'appuntamento.
- 7 Se necessario, modificare il testo dell'allarme nel campo **Messaggio**.
- 8 Se necessario, modificare l'opzione **Parla** se si desidera che il messaggio sia o meno visualizzato sul dispositivo.
- 9 Se necessario, modificare **Mostra messaggio** se si desidera che il messaggio sia o meno visualizzato sul dispositivo.
- 10 Se necessario, modificare il suono all'allarme toccando accanto a **Suono**, selezionare un suono e toccare **Apri**.
- 11 Toccare **Salva**.
- 12 Toccare **OK**.

1.4 Eliminazione di un allarme


- 1 Selezionare **Strumenti > Agenda > Modifica agenda**.
- 2 Selezionare l'allarme da eliminare.
- 3 Toccare **Modifica**.
- 4 Toccare **Cancella** nella finestra di dialogo **Editor allarmi**.
- 5 Toccare **OK**.



1.5 Aggiunta di un'attività

- 1 Selezionare **Strumenti > Agenda > Modifica agenda**.
- 2 Toccare **Aggiungi**.
- 3 Nel campo **Attività**, immettere il nome dell'attività o dell'appuntamento.
- 4 Accanto al campo **Immagine**, toccare  per aggiungere un'immagine all'attività.
- 5 Utilizzare gli elenchi a discesa nella finestra di dialogo **Simbolo** per trovare l'immagine, selezionarla e toccare **OK**.
- 6 Nell'elenco a discesa **Quando**, selezionare di ripetere l'attività:
 - **Una volta**
 - **Ogni giorno**
 - **Ogni giorno lavorativo**
 - **Ogni settimana**
 - **Ogni mese**
 - **Ogni anno**

- 7 Nel campo **Durata**, scegliere una delle seguenti opzioni:
 - **Intero giorno**
 - **Da Fino a**
- 8 Se è stata selezionata l'opzione **Da Fino a**, immettere il tempo di inizio e fine dell'attività nei campi **Da** e **Fino a**. Toccare le cifre delle ore e utilizzare le frecce per personalizzare l'ora. Toccare le cifre dei minuti e utilizzare le frecce per personalizzare i minuti.
- 9 Se necessario, selezionare l'opzione **Allarme** se si desidera essere avvertiti quando l'attività inizia o prima che inizi.
- 10 Selezionare una delle seguenti opzioni dall'elenco a discesa **Allarme**.
 - **All'avvio**
 - **5 minuti prima dell'inizio**
 - **15 minuti prima dell'inizio**
 - **30 minuti prima dell'inizio**
 - **1 ora prima dell'inizio**
 - **2 ore prima dell'inizio**
 - **1 giorno prima dell'inizio**
- 11 Toccare per impostare l'allarme.
- 12 Nel campo **Messaggio** immettere il testo dell'allarme.
- 13 Selezionare l'opzione **Parla** se si desidera che il messaggio sia letto ad alta voce.
- 14 Selezionare **Mostra messaggio** se si desidera che il messaggio sia visualizzato sul dispositivo.
- 15 Per aggiungere un suono all'allarme, toccare accanto a **Suono**, selezionare un suono e toccare **Apri**.
- 16 Toccare **OK**.
- 17 Toccare **Salva**.
- 18 Toccare **OK**.

1.6 Modifica di un'attività

- 1 Selezionare **Strumenti > Agenda > Modifica agenda**.
- 2 Selezionare l'attività da modificare.
- 3 Toccare **Modifica**.
- 4 Se necessario, immettere il nome dell'attività o dell'appuntamento nel campo **Attività**.
- 5 Accanto al campo **Immagine**, se necessario toccare,  per aggiungere un'immagine all'attività o per modificare l'immagine dell'attività.
- 6 Utilizzare gli elenchi a discesa nella finestra di dialogo **Simbolo** per trovare l'immagine, selezionarla e toccare **OK**.
- 7 Se necessario, nell'elenco a discesa **Quando**, modificare la ripetizione dell'attività:
 - **Una volta**
 - **Ogni giorno**
 - **Ogni giorno lavorativo**
 - **Ogni settimana**
 - **Ogni mese**
 - **Ogni anno**
- 8 Se necessario, modificare una delle seguenti opzioni nel campo **Durata**:
 - **Intero giorno**
 - **Da Fino a**
- 9 Se è stata selezionata l'opzione **Da Fino a**, immettere il tempo di inizio e fine dell'attività nei campi **Da** e **Fino a**. Toccare le cifre delle ore e utilizzare le frecce per personalizzare l'ora. Toccare le cifre dei minuti e utilizzare le frecce per personalizzare i minuti.
- 10 Se necessario, selezionare l'opzione **Allarme** se si desidera essere avvertiti quando l'attività inizia o prima che inizi.


- 11** Selezionare una delle seguenti opzioni dall'elenco a discesa **Allarme**.
- **All'avvio**
 - **5 minuti prima dell'inizio**
 - **15 minuti prima dell'inizio**
 - **30 minuti prima dell'inizio**
 - **1 ora prima dell'inizio**
 - **2 ore prima dell'inizio**
 - **1 giorno prima dell'inizio**
- 12** Toccare  per impostare l'allarme.
- 13** Nel campo **Messaggio** immettere il testo dell'allarme.
- 14** Selezionare l'opzione **Parla** se si desidera che il messaggio sia letto ad alta voce.
- 15** Selezionare **Mostra messaggio** se si desidera che il messaggio sia visualizzato sul dispositivo.
- 16** Per aggiungere un suono all'allarme, toccare  accanto a **Suono**, selezionare un suono e toccare **Apri**.
- 17** Toccare **OK**.
- 18** Toccare **Salva**.
- 19** Toccare **OK**.

1.7 Eliminazione di un'attività

- 1 Selezionare **Strumenti > Agenda > Modifica agenda**.
- 2 Selezionare l'attività da eliminare.
- 3 Toccare **Modifica**.
- 4 Toccare **Cancella**.
- 5 Toccare **OK**.

1.8 Impostazione dello sfondo dell'agenda



In una griglia di comunicazione che utilizza riquadri per l'agenda, è possibile impostare uno sfondo personalizzato per ogni mese.

- 1 Aprire una griglia di comunicazione con i riquadri per l'agenda.
- 2 Passare a **Strumenti > Agenda > Sfondo personalizzato**.
- 3 Toccare  accanto al mese di cui si desidera personalizzare lo sfondo.
- 4 Utilizzare gli elenchi a discesa nella finestra di dialogo **Simbolo** per trovare l'immagine, selezionarla e toccare **OK**.
- 5 Ripetere dal punto 2 per altri mesi.
- 6 Toccare **OK**.
- 7 Eseguire una delle seguenti azioni per salvare le modifiche nella griglia della comunicazione.
 - Selezionare **File > Salva**.
 - Premere **Salva (Ctrl+S)**.



2 Rubrica

Il dispositivo è in grado di salvare tutti i nomi e i numeri di telefono degli amici e dei contatti nella rubrica. La rubrica è utilizzabile in una griglia di comunicazione, ad esempio per chiamare un contatto.

2.1 Aggiunta di un contatto


- 1 Selezionare **Strumenti > Rubrica indirizzi**.
- 2 Toccare **Aggiungi contatto** .
- 3 Toccare  per aggiungere un'immagine al contatto.
- 4 Utilizzare gli elenchi a discesa nella finestra di dialogo **Simbolo** per trovare l'immagine, selezionarla e toccare **OK**.
- 5 Toccare il campo **Nome** e immettere il nome del contatto. È un campo obbligatorio.
- 6 Toccare il campo **Telefono** e immettere il numero telefonico del contatto.
- 7 Toccare **OK**.

2.2 Modifica di un contatto

- 1 Selezionare **Strumenti > Rubrica indirizzi**.
- 2 Toccare **Modifica contatto** .
- 3 Toccare  per aggiungere un'immagine (diversa) al contatto.
- 4 Utilizzare gli elenchi a discesa nella finestra di dialogo **Simbolo** per trovare l'immagine, selezionarla e toccare **OK**.
- 5 Toccare il campo **Nome** e modificare il nome del contatto. È un campo obbligatorio.

- 6 Toccare il campo **Telefono** e modificare il numero telefonico del contatto.
- 7 Toccare **OK**.

2.3 Eliminazione di un contatto

- 1 Selezionare **Strumenti > Rubrica indirizzi**.
- 2 Selezionare il contatto da eliminare.
- 3 Toccare **Cancella contatto** .
- 4 Toccare **OK**.

H Connessione con Eddy

1 Che cos'è Eddy?

Eddy è un piccolo display portatile con un altoparlante integrato. È possibile stabilire una connessione bluetooth tra Smart e Eddy. È possibile scegliere se trasmettere testo e/o suoni. Il testo viene visualizzato su 1, 2 o 3 righe, a seconda delle impostazioni.



Figura 1: Eddy

VEDI ANCHE:

"Impostazione di Eddy" a pagina 71

2 Bluetooth

Il bluetooth è una tecnologia di comunicazione senza fili che funziona su brevi distanze. Non è necessaria alcuna connessione fisica per il bluetooth. È possibile scambiare i dati su una distanza di circa 10 metri. Con il bluetooth non è necessario direzionare i dispositivi uno verso l'altro. Se i dispositivi si trovano nel raggio di azione dell'altro, i dati possono essere trasferiti, anche se i dispositivi si trovano in ambienti diversi.

Grazie a Smart è possibile utilizzare il bluetooth per collegarsi ad altri dispositivi dotati della stessa tecnologia. Ad esempio Eddy o un telefono cellulare.



Alcuni dispositivi non sempre sono compatibili con il dispositivo.



Gli oggetti presenti tra i dispositivi possono ridurre la distanza tra quelli in grado di comunicare.

3 Impostazione di Eddy

- 1 Selezionare **Strumenti > Eddy > Impostazioni**.
- 2 Se necessario, è possibile selezionare le seguenti opzioni:


Connetti automaticamente all'avvio di Mind Express	Se selezionato, il dispositivo cercherà automaticamente di connettersi a Eddy.
Invia Audio	Se selezionato, il suono sarà emesso dagli altoparlanti di Eddy.
Invia Testo	Se selezionato, il testo sarà visualizzato su Eddy.
Scrivi in maiuscolo	Se selezionato, il testo sarà visualizzato su Eddy con lettere maiuscole.
Numero di linee sul display	Dall'elenco a discesa, selezionare tutte le linee di testo (1, 2 o 3) desiderate da visualizzare sullo schermo di Eddy.

- 3 Toccare **OK**.


VEDI ANCHE:

"Che cos'è Eddy?" a pagina 70

4 Ricerca di Eddy

- 1 Selezionare **Strumenti > Eddy > Connetti**.
- 2 Toccare **Cerca** .
L'Eddy trovato sarà visualizzato nell'elenco a discesa.
- 3 Eseguire una delle seguenti azioni:
 - Toccare **OK**.
 - Connettersi a Eddy.

5 Connessione a Eddy

- 1 Selezionare **Strumenti > Eddy > Connetti**.
- 2 Toccare **Connetti** .
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Eddy** con il messaggio **Connesso con Eddy**.
- 3 Toccare **OK**.
- 4 Toccare **OK**.

VEDI ANCHE:

"Disconnessione da Eddy" a pagina 73

6 Disconnessione da Eddy

Selezionare **Strumenti > Eddy > Disconnesso**.

Disconnesso da Eddy

VEDI ANCHE:

"Connessione a Eddy" a pagina 72

I Collegamento al computer e connessioni USB

1 Connessione al computer

È possibile utilizzare il cavo USB in dotazione per collegare il dispositivo a un computer. Collegando il dispositivo a un computer, è possibile trasferire dati a e da il dispositivo mediante Mind Express.

2 Connessione del dispositivo al computer

Connettere il cavo USB in dotazione tra il dispositivo e il PC.

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Windows Mobile Device Center** sul computer.

VEDI ANCHE:

"Scollegamento del dispositivo dal computer" a pagina 76

3 Scollegamento del dispositivo dal computer

Per evitare di perdere dati presenti sul dispositivo e di danneggiare la memoria del dispositivo, si consiglia di attenersi alla procedura descritta di seguito quando si scollega il dispositivo dal computer.

- 1 Toccare l'icona USB nell'area di notifica di Windows.
- 2 Toccare l'opzione per rimuovere in sicurezza il dispositivo.
- 3 Rimuovere il cavo USB tra il dispositivo e il computer.

VEDI ANCHE:

"Connessione del dispositivo al computer" a pagina 76

4 Connessione a un pannello di ingresso esterno

- 1 Collegare il pannello di ingresso esterno a Smart utilizzando il cavo adattatore USB in dotazione.
- 2 Selezionare **Strumenti > Smart3 > Impostazioni**.
- 3 Dall'elenco a discesa **Tastiera USB**, selezionare il layout del pannello di ingresso a cui è stata eseguita la connessione.
- 4 Toccare **OK**.

5 Connessione di un mouse esterno

Collegare il mouse esterno a Smart utilizzando il cavo adattatore USB in dotazione.

6 Collegare una penna USB

È possibile creare un backup di Smart su una penna USB.

Utilizzare il cavo adattatore in dotazione per collegare la penna USB a Smart.

J Esecuzione di una chiamata

1 Telefono

È possibile effettuare una connessione bluetooth tra Smart e il telefono cellulare. Una volta stabilita la connessione, è possibile chiamare tramite Smart un numero telefonico immesso o persone presenti nella rubrica (ad esempio utilizzando il file *app_call_smart*).

2 Attivazione di bluetooth

Per eseguire una connessione tra il telefono cellulare e Smart, è necessario attivare il bluetooth su entrambi i dispositivi.

Selezionare **Strumenti > Telefono > Attiva bluetooth**.

Un segnale audio viene emesso non appena si attiva il bluetooth.

3 Impostazione delle opzioni del telefono Smart

È possibile modificare il nome del bluetooth di Smart ed è possibile attivare automaticamente bluetooth quando si avvia Smart. È possibile anche visualizzare degli eventi. Ad esempio quando si attiva bluetooth, o quando si viene chiamati, ...

- 1 Selezionare **Strumenti > Telefono > Impostazioni**.
- 2 Se necessario, modificare il nome bluetooth di Smart nel campo **Nome Bluetooth**.
Il nome viene visualizzato nell'elenco dei dispositivi compatibili presenti sul telefono.
- 3 Se necessario, selezionare l'opzione **Connetti all'avvio** per abilitare il bluetooth quando si avvia il Smart.
- 4 Se necessario, selezionare l'opzione **Mostra ulteriori informazioni** per spiegare alcuni eventi sullo schermo.

ESEMPIO: Attiva bluetooth.

- 5 Selezionare **Notifica chiamata in arrivo**.
Viene visualizzato un messaggio quando si chiama Smart.
- 6 Toccare **OK**.

4 Collegamento del telefono a Smart

Il collegamento tra un telefono cellulare e Smart dipende dalla marca e dal tipo di telefono cellulare. Di seguito è riportata una descrizione della procedura generica.



Fare riferimento alle istruzioni di funzionamento del telefono cellulare.

- 1 Abilitare il bluetooth di Smart.
- 2 Abilitare il bluetooth sul telefono cellulare e consentire al telefono di cercare i dispositivi disponibili.
- 3 Cercare il nome del bluetooth di Smart nell'elenco dei dispositivi disponibili e accoppiarli.
- 4 Immettere il codice pin di Smart. Il codice standard è 1111.

Se la connessione avviene in modo corretto è possibile utilizzare Smart per chiamare, rispondere a chiamate o agganciare.

5 Chiamata di un numero di telefono

È possibile utilizzare Smart per chiamare un numero presente in memoria.



È possibile chiamare i contatti presenti nella rubrica utilizzando il file `app_call_smart`.

- 1 Selezionare **Strumenti > Telefono > Chiama**.
- 2 Immettere il numero telefonico (solo cifre) nella finestra di dialogo **Numero di Telefono**.
- 3 Toccare **OK**.

6 Risposta al telefono

È possibile utilizzare Smart per rispondere a una telefonata in ricezione.



È possibile inoltre rispondere al telefono dal file `app_call_smart`.

Selezionare **Strumenti > Telefono > Rispondi**.

7 Interruzione

È possibile utilizzare Smart per interrompere.



È possibile inoltre agganciare utilizzando il file `app_call_smart`.

Selezionare **Strumenti** > **Telefono** > **Interrompi**.

K Controllo ambientale

1 Controllo ambientale

Smart è dotato di un ricevitore e un trasmettitore a infrarossi. In questo modo è possibile utilizzare Smart per controllare dispositivi come televisori, radio, lettori DVD tramite codici a infrarossi. Smart è in grado di imparare a riconoscere i codici a infrarossi dei dispositivi.

2 Acquisizione di un codice a infrarossi

1 Selezionare **Strumenti > Controllo Ambientale > Registra**.

2 Selezionare un codice a infrarossi nella finestra di dialogo **JabblaiR**.

3 Nel campo **Nome** specificare il nome del codice a infrarossi.

ESEMPIO: Altoparlante televisivo

4 Tenere il telecomando del dispositivo pertinente (ad esempio, il telecomando del televisivo) a una distanza di circa 5 cm dal ricevitore a infrarossi di Smart (5).

5 Toccare **Registra**.

Nel campo **Stato**, sarà visualizzato il messaggio **Mantieni premuto il tasto**.

6 Premere rapidamente il pulsante del telecomando (ad esempio, il pulsante per aumentare il volume).

Nel campo **Stato**, viene visualizzato il messaggio **OK**. Se viene visualizzato **Errore**, ripetere la procedura partendo dal punto 5.

7 Puntare Smart verso il dispositivo di cui si desidera verificare il codice a infrarossi.



Il segnale a infrarossi viene trasmesso attraverso il trasmettitore a infrarossi (13) sul retro di Smart.

8 Toccare **Test**.

Se il codice a infrarossi esegue effettivamente il comando richiesto, quindi il test è OK. In caso contrario, il codice deve essere acquisito di nuovo.

- 9 Ripetere dal punto 2 per acquisire altri codici a infrarossi.
- 10 Toccare **OK**.

3 Creazione di un backup dei codici a infrarossi

È possibile creare un backup dei codici a infrarossi in modo da poterli ripristinare in casi di qualsiasi problema. Può essere utile se Smart è utilizzato in diverse sedi. È possibile acquisire i codici a infrarossi per la sede A. Creare un backup. Eseguire la stessa operazione per la sede B. Se si visualizza **Ripristino** è possibile passare da un codice a infrarossi all'altro, a seconda della sede.

- 1 Selezionare **Strumenti > Controllo Ambientale > Backup**.
- 2 Nel campo **Nome** specificare il nome del backup.
ESEMPIO: Inizio
- 3 Toccare **OK**.
- 4 Toccare **Sì** nella finestra di dialogo **Backup**.
Viene creato il backup.

VEDI ANCHE:

"Ripristino di un backup dei codici a infrarossi" a pagina 88

4 Ripristino di un backup dei codici a infrarossi

È possibile creare un backup dei codici a infrarossi in modo da poterli ripristinare in casi di qualsiasi problema. Può essere utile se Smart è utilizzato in diverse sedi. È possibile acquisire i codici a infrarossi per la sede A. Creare un backup. Eseguire la stessa operazione per la sede B. Se si visualizza Ripristino è possibile passare da un codice a infrarossi all'altro, a seconda della sede.

- 1 Selezionare **Strumenti > Controllo Ambientale > Ripristino**.
- 2 Nell'elenco **Scegli backup** toccare il nome del backup da ripristinare.



Il ripristino di un backup può durare qualche minuto.

- 3 Toccare **OK**.
Il backup viene ripristinato.

VEDI ANCHE:

"Creazione di un backup dei codici a infrarossi" a pagina 87

L Comunicazione

1 Comunicazione

Mind Express 4 sono stati installati in Smart.

Mind Express è un programma per computer facile da utilizzare e che contiene tutto ciò che necessita un logopedista per creare griglie di comunicazione ed esercizi. Un'ampia gamma di simboli, immagini, testo per messaggi vocali, musica e suoni è utilizzabile per creare interessanti e stimolanti griglie di comunicazione.

Grazie a Mind Express, è possibile creare messaggi vocali per selezionare immagini e simboli. Mind Express inoltre dispone di un modulo di grammatica integrato che, tra le altre cose, coniuga automaticamente i verbi.

È disponibile anche un'ampia gamma di simboli e icone, utilizzabili per realizzare schede di comunicazione, giochi, esercizi e altre applicazioni. È possibile inoltre aggiungere i propri disegni, foto o nuovi simboli.



È possibile creare e modificare i documenti in Smart; tuttavia è più facile creare un documento sul computer e poi inoltrarlo a Smart mediante una connessione USB.



Per creare o modificare i documenti sul computer, attenersi alla procedura descritta nelle istruzioni di funzionamento di Mind Express.

2 Aggiunta di un'azione di Smart specifica

Oltre alle azioni standard disponibili in Mind Express, è possibile assegnare delle azioni specifiche in Smart per perfezionare

- Eddy
- Controllo ambientale
- Ruota vista
- Smart 3 Camera
- Smart3

3 Aggiunta di un'azione Eddy

Se si aggiunge una delle azioni Eddy a un riquadro nella griglia di comunicazione, selezionando quindi il riquadro a cui è possibile connettersi o disconnettersi da Eddy, attivare o disattivare il testo, attivando o disattivando il suono e aumentando o riducendo il volume.

- 1 Selezionare **Modifica > Modalità modifica**.
- 2 Toccare due volte un riquadro in cui inserire un'azione.
- 3 Selezionare **Eddy** dal gruppo di opzioni **Azioni**.
- 4 Selezionare una delle seguenti opzioni dall'elenco a discesa **Azioni > Eddy**.

(Re)connetti	Connette a Eddy.
Disconnesso	Disconnette da Eddy.
Cancella testo	Cancella il testo da Eddy.
Suono: on	Attiva il suono di Eddy.
Suono: on/off	Disattiva il suono di Eddy.
Suono: off	Attiva lo stato del suono di Eddy. Se il suono è attivato, viene successivamente disattivato dopo questa azione. Se il suono è disattivato, viene successivamente attivato dopo questa azione.
Testo: on	Attiva il testo su Eddy.
Testo: off	Disattiva il testo su Eddy.
Testo: on/off	Attiva lo stato del testo di Eddy. Se il display del testo è attivato, viene successivamente disattivato dopo questa azione. Se il display del testo è disattivato, viene successivamente attivato dopo questa azione.
Alza volume	Aumenta il volume di Eddy.
Abbassa volume	Abbassa il volume di Eddy.

4 Aggiunta di un'azione di controllo ambientale

Se si aggiunge una delle opzioni di **Controllo Ambientale** a un riquadro della griglia di comunicazione, selezionando quindi il riquadro, è possibile controllare un dispositivo nell'ambiente.

- 1 Selezionare **Modifica > Modalità modifica**.
- 2 Toccare due volte un riquadro in cui inserire un'azione.
- 3 Selezionare **Controllo Ambientale** dal gruppo di opzioni **Azioni**.
- 4 Dall'elenco a discesa **Azioni > Controllo Ambientale** scegliere una delle seguenti opzioni:

Pausa	Se necessario, nel campo Durata , modificare il numero di millisecondi di durata della pausa. L'azione di pausa viene utilizzata per creare del tempo tra 2 azioni di controllo ambientale. Ad esempio: se un dispositivo non accetta una rapida successione di segnali.
IR1	È possibile immettere il nome definito dall'utente per questa particolare azione di controllo ambientale. Se necessario, andare nel campo Ripeti per modificare il numero di volte di trasmissione del segnale. Ad esempio: se si desidera aumentare il volume di un dispositivo in modo significativo senza dover toccare il riquadro 10 volte, è possibile immettere Ripeti 10 .

5 Aggiunta di un'azione Smart 3 Camera

Se si aggiunge una delle azioni **Smart 3 Camera** a un riquadro nella griglia di comunicazione, quando si seleziona il riquadro è possibile scattare una foto, visualizzare la foto precedente o successiva oppure eliminare una foto.



Per abilitare la visualizzazione delle immagini, la griglia di comunicazione deve contenere un riquadro del tipo Smart 3 Camera.

- 1 Selezionare **Modifica > Modalità modifica**.
- 2 Toccare due volte il riquadro in qualsiasi punto per inserire un'azione di fotocamera.
- 3 Selezionare **Smart 3 Camera** dal gruppo delle opzioni **Azioni**.
- 4 Selezionare una delle seguenti opzioni dall'elenco a discesa **Azioni > Smart 3 Camera**.

Acquisisci snapshot	Consente di scattare una foto.
Immagine successiva	Viene visualizzata la foto successiva contenuta nella libreria.
Immagine precedente	Viene visualizzata la foto precedente contenuta nella libreria.
Elimina immagine	Viene eliminata l'immagine attiva dalla libreria.

6 Aggiunta di un'azione Smart3

Se si aggiunge una delle azioni **Smart3** a un riquadro nella griglia di comunicazione, selezionare il riquadro per poter regolare la luminosità, impostare il dispositivo in standby o spegnerlo, attivare o disattivare il microfono.

- 1 Selezionare **Modifica > Modalità modifica**.
- 2 Toccare due volte un riquadro in cui inserire un'azione.
- 3 Selezionare **Smart3** nel gruppo delle opzioni **Azioni**.
- 4 Nell'elenco a discesa **Azioni > Smart3**, selezionare una delle seguenti opzioni.

Aumenta luminosità	Aumenta la luminosità dello schermo
Diminuisci luminosità	Riduce la luminosità dello schermo.
Vai in standby	Passa il dispositivo in standby.
Arresto	Spegne il dispositivo.
Accendi Microfono	Accende il microfono del dispositivo
Spegni Microfono	Spegne il microfono del dispositivo
Acceso-Spento Microfono	Passa da una modalità all'altra. Se il microfono è acceso, questa azione lo spegne. Se il microfono è spento, questa azione lo accende.

7 Aggiunta di un'azione di rotazione dello schermo

Se si aggiunge una delle azioni di **Ruota vista** a un riquadro nella griglia di comunicazione, quando si seleziona quel riquadro è possibile scegliere se la visualizzazione con orientamento dello schermo in verticale oppure orizzontale o passare dall'orientamento verticale a quello orizzontale e viceversa.

- 1 Selezionare **Modifica > Modalità modifica**.
- 2 Toccare due volte un riquadro in cui inserire un'azione.
- 3 Selezionare **Ruota vista** dal gruppo di opzioni **Azioni**.
- 4 Dall'elenco a discesa **Azioni > Ruota vista**, selezionare una delle seguenti opzioni:

Verticale	Viene visualizzato l'orientamento dello schermo verticale.
Orizzontale	Viene visualizzato l'orientamento dello schermo orizzontale.
Alterna visualizzazione	Lo schermo viene ruotato. Se si visualizza l'orientamento dello schermo verticale, dopo questa azione passa all'orientamento dello schermo orizzontale. Se si visualizza l'orientamento dello schermo orizzontale, dopo questa azione passa all'orientamento dello schermo verticale.

M Risoluzione dei problemi

1 Ricerca del numero di serie di Smart

In caso di contatti con il servizio di assistenza, sarà richiesto di fornire il numero di serie di Smart.

- 1 Posizionare Smart in modo che la fascetta sia rivolta verso l'alto.
- 2 Eseguire una delle seguenti azioni:

Il dispositivo dispone di un fodero di protezione	Staccare la fascetta e rimuovere il fodero protettivo per visualizzare l'adesivo che riporta il numero di serie.
Il dispositivo non dispone di un fodero di protezione	Sganciare il fermo della la fascetta o spostarla lateralmente per visualizzare l'adesivo che riporta il numero di serie.

2 Verifica della versione di Mind Express su Smart

- 1 Selezionare **File > Informazioni licenza**.
- 2 La versione di Mind Express è disponibile in alto alla finestra di dialogo **Mind Express**. Ad esempio 4.2.3.1267.

3 Visualizzazione delle librerie dei simboli attive

- 1 Selezionare **File > Informazioni licenza**.
- 2 Visualizzare le librerie dei simboli nell'elenco. Se necessario utilizzare la barra di scorrimento verticale per visualizzare l'elenco completo.

Indicazione	Spiegazione
nero	installato + licenza
grigio + *	non installato o non disponibile nella lingua selezionata
grigio chiaro	installato, ma senza licenza



Per applicare una licenza per altre librerie di simboli, contattare il distributore da cui è stato acquistato il dispositivo.

4 Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Il touchscreen è lento o non funziona correttamente.	<ul style="list-style-type: none">• Utilizzare una penna per toccare il touchscreen.• Riavviare il dispositivo per correggere qualsiasi errore software.• Verificare che sia installata la versione più recente del software.• Nel caso di graffi o danni al touchscreen, contattare il reparto di assistenza del distributore dove il dispositivo è stato acquistato.
Il dispositivo non risponde più.	Tenere premuto il pulsante di riavvio per 5 secondi. Il dispositivo si spegnerà. Premere il pulsante di avvio per riavviare il dispositivo.
Il dispositivo è caldo.	Durante l'uso lungo e intensivo del dispositivo, può riscaldarsi. È normale e non ha alcun effetto sulla vita delle prestazioni del dispositivo.
Non è stato trovato alcun dispositivo bluetooth.	<ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che sia abilitata la tecnologia bluetooth sul dispositivo a cui si desidera connettersi.• Assicurarsi che il dispositivo e l'altro dispositivo si trovino nel raggio di azione massimo di 10 metri.• Se necessario, rimuovere qualsiasi oggetto che si frappone tra un dispositivo e l'altro.• Il dispositivo non può essere compatibile con il dispositivo dell'utente.

Problema	Soluzione
Nessuna connessione tra il dispositivo e il computer.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che il cavo tra il dispositivo e il computer sia stato collegato in modo corretto.• Verificare che sia installato Windows Mobile Device Center sul computer.
Il dispositivo non può essere acceso. Quando si accende il dispositivo, l'indicatore di accensione/spengimento lampeggia.	La batteria non è carica in modo sufficiente. Collegarlo all'alimentatore e lasciar il dispositivo a caricarsi per alcuni minuti prima di riaccenderlo.
La batteria non si ricarica in modo corretto.	Nel caso la batteria non riesca più a ricaricarsi totalmente, contattare il reparto di assistenza del distributore dove il dispositivo è stato acquistato.

N Appendici

1 Acapela

Tabella 1: Consonanti

Simbolo	Trascrizione	Come nella
b	b i l m b a	bimba
bb	b a l b b o	babbo
tS	l a l n tS a	lancia
ttS	k a l t tS a	caccia
d	d a l d o	dado
dd	f r e l d d o	freddo
dz	m a l n d z o	manzo
ddz	m E l d d z o	mezzo
f	s t u l f a	stufa
ff	s t O l f f a	stoffa
g	l a l g o	lago
gg	l E l g g o	leggo
dZ	a l d Z o	agio
ddZ	m a l d d Z o	maggio
L	d i l r L i	dirgli
LL	a l L L o	aglio
J	J O l k k i	gnocchi
JJ	d Z u l J J o	giugno
j	p j O l d d Z a	pioggia

Simbolo	Trascrizione	Come nella
k	k w O1 k o	cuoco
kk	p a1 k k o	pacco
l	p a1 l a	pala
ll	p a1 ll a	palla
m	l a1 m a	lama
mm	m a1 m m a	mamma
n	n O1 n a	nona
nn	n O1 n n a	nonna
p	p a1 p a	Papa
pp	p a1 p p a	pappa
r	f a1 r o	faro
rr	f E1 r r o	ferro
s	s O1 s t a	sosta
ss	r o1 s s o	rosso
S	S E1 n t s a	scienza
SS	a1 S S a	ascia
t	t u1 t a	tuta
tt	t u1 t t a	tutta
ts	f O1 r t s a	forza
tts	p i1 t t s a	pizza
v	v i1 v a	viva
vv	a v v o k a1 t o	avvocato

Simbolo	Trascrizione	Come nella
w	wO1 m o	uomo
z	rO1 z a	rosa
N	t rO1 N k o	tronco
M	i M v i l t o	invito
R	S a R k o l	charcot
RR	b l e l i R R	Blair

Tabella 2: Vocali

Simbolo	Trascrizione	Come nella
a	s a l k k o	sacco
e	s e l r a	sera
E	m j E l e	miele
i	s i l t o	sito
o	s o l l o	solo
O	s w O l l o	suolo
u	s u l k k o	succo
@	b i l t @ l s	Beatles
e~	e t j e~	Etienne
a~	m i t e l R a~	Mitterrand
o~	m a l n o~	Manon

Indice

A

- Acapela 104
- Accensione 29
- Accensione/spengimento
 - Indicatore 23
 - pulsante 23
- Agenda 58
 - imposta sfondo 65
- Alimentatore 23
- Allarme
 - aggiungi 59
 - cambia 60
 - cancella 61
- Altoparlanti 23
- Appendici 103
- Archiviazione
 - pulizia della memoria 47
- Arresto 41
 - aggiungi azione 94
- Attività
 - aggiungi 61
 - cambia 63
 - cancella 65
- Avvio
 - imposta opzioni 39
- Azione
 - attivazione/disattivazione del suono di Eddy 91
 - attivazione/disattivazione del testo di Eddy 91
 - aumento/riduzione del volume su Eddy 91
 - cancellazione del testo di Eddy 91
 - controllo ambientale 92
 - disconnessione da Eddy 91
 - esecuzione di una connessione con Eddy 91
 - esecuzione di una foto 54
 - fotocamera 93
 - luminosità 94
 - microfono 94
 - Ruota vista 95
 - spegni 94
 - standby 94

B

Barra dei menu

nascondi 39

ripristino 39

Batteria 15

Indicatore durante la ricarica 23

richiesta capacità residua 31

visualizzare stato 30

Bluetooth 70

accensione 80

C

Codici a infrarossi

acquisisci 86

crea backup 87

ripristino 88

Computer

connetti dispositivo al computer 76

Comunicazione 90

Connessione

a Eddy 72

al computer 76

e disconnessione da Eddy 73

scollegamento del dispositivo e del computer 76

Contatto

aggiungi 66

cancella 67

modifica 66

Controllo ambientale

aggiungi azione 72

Crea backup

dei codici a infrarossi 87

di Smart 46

D

Dimensioni 15

Dispositivo

accensione 29

fornisci il fodero protettivo 28

passa in standby 41

spegni 41

Dizionario 44

E

Eddy

aggiungi azione 91

che cos'è Eddy? 70

disconnetti 73

esegui connessione 72

impostazione 71

ricerca 72

F

- Fascetta 23
- File 32
 - cancella 48
- Fodero protettivo 19, 23
 - fornito con Smart 28
- Fotocamera 23, 54
 - aggiungi azione 93

I

- Immagine 54
 - cancella 55, 56
 - esegui 54
 - visualizza 55
- Immissione di testo 33, 35
- Imposta la velocità della sintesi vocale 36
- Imposta lingua del software 36
- Impostazione del tempo di spegnimento 38
- Impostazione dell'ora 36
- Impostazione della data 36
- Indicatore
 - accensione/spegnimento 23
 - batteria 23
- Infrarossi 86
 - ricevitore 23
 - trasmettitore 23
- Istruzioni d'uso

uso 11

L

- Librerie dei simboli
 - visualizzazione disponibile 99
- Lingua
 - imposta lingua del software 36
 - impostazione 36
- Luminosità
 - aggiungi azione 94

M

- Memoria
 - interna 15
 - ripulire 47
- Memoria interna 15
- Microfono 23
 - aggiungi azione 94
- Mind Express
 - verifica versione 98
- Modalità mouse
 - registra messaggio 51
- Modalità registrazione
 - registra messaggio 50
- Mouse

connessione di un mouse esterno 77

N

Normative di sicurezza 18

Numero di serie

Cerca Smart 98

P

Pannello di ingresso 33

connessione a un pannello di ingresso esterno 77

mostra sullo schermo 34

nascondi visualizzato 34

Pannello di ingresso visualizzato 33

nascondi 35

show 34

penna USB

connetti 77

Porta USB 23

Previsione frase 45

Previsione parola 45

Processore 15

Pulire 20

Pulsante

Accensione/spengimento 23

Pulsante di riavvio 23

Pulsante di riavvio 23

R

Registra

in modalità mouse 51

in modalità registrazione 50

messaggio 50

suono 50

Registra messaggio 50

in modalità mouse 51

in modalità registrazione 50

Registrazione

cancella 52

impostazione 40

Regolazione della luminosità dello schermo 37

Ricarica in corso... 29

Riparazione 20

Ripristino

di 47

di codici a infrarossi 88

Risoluzione dei problemi 100

Rubrica 66

Ruota vista 38

aggiungi azione 95

S

Schermo 15

regola luminosità 37

Sintesi vocale

impostazione 36

Sistema operativo 15

Smart

cerca numero di serie 98

componenti forniti 22

connetti al telefono 81

Introduzione 23

uso 13

vista laterale destra 23

vista laterale sinistra 23

vista posteriore 23

Specifiche tecniche 15

Suono

imposta volume generico 37

registra 50

T

Telefono 80

aggancia 83

chiama numero di telefono 82

connetti a Smart 81

impostazione 80

registra 82

Tocco 31

Tocco leggero 31

Touchscreen 23

gebruiken 31

Trascinamento 31

Trascrizione fonetica 104

U

USB 15

Collegare una penna USB 77

connessione a un pannello di ingresso esterno 77

connessione al computer 76

connessione di un mouse esterno 77

V

Vai in standby 41

aggiungi azione 94

Visualizzare agenda 58

Voce

imposta tipo di voce 36

imposta volume 36

Volume

imposta volume di voce 36

imposta volume generico 36, 37

